


Pistola per il massaggio muscolare

Fascia GUN – V6



ISTRUZIONI

Indicatore di funzione

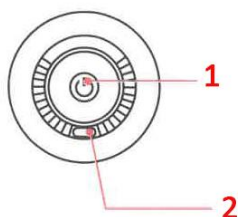

Pulsante di accensione, 2. Porta di ricarica

Caratteristiche

1. Accensione: premere il pulsante di accensione, la spia si accende, la macchina inizia a funzionare e l'accensione è completata.
2. Modifica dell'intensità: dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante di accensione per aumentare l'intensità al massimo grado.
3. Spegnimento: quando la macchina è in funzione, premere a lungo il pulsante di accensione, la macchina smette di funzionare, la spia si spegne e lo spegnimento è completato.

Descrizione del prodotto

FASCIAL GUN è una sorta di apparecchiatura per il massaggio a vibrazione. Ha le caratteristiche di una grande coppia e di una regolazione multistadio. È in grado di alleviare efficacemente il dolore causato dall'accumulo di acido lattico dopo un esercizio fisico intenso e di alleviare i dolori muscolari di persone sedentarie, lavoratori d'ufficio e gruppi di esercizi di fitness, nonché il disagio muscolare generale. Esistono diverse versioni di questo prodotto, il numero di teste massaggianti varia a seconda della versione specifica del pacchetto selezionato.

Parametri del prodotto

Tensione nominale: 7,4 V

Tensione di carica: 5 V

Corrente di carica: 2A

Potenza nominale: 18 W

Istruzioni per la batteria

Quando la batteria è scarica, è necessario caricarla per circa 3 ore per ricaricarla completamente.

L'autonomia dell'apparecchio dipende dalla batteria e dall'uso che se ne fa; può essere utilizzato da 30 minuti a 3 ore a seconda delle diverse intensità.

Quando la batteria è carica, utilizzare il cavo di ricarica appositamente fornito con l'apparecchio e caricare con un adattatore di tensione appropriata (5V) (non superiore allo standard) 15W. Quando il modello con un solo pulsante è in carica, la spia rossa di carica sul pannello del prodotto si accende e si spegne quando la carica è completa.

Per sicurezza, non accendere il dispositivo durante la ricarica.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso, inserire la testina di massaggio nel foro anteriore dell'apparecchio (ci sono più testine di massaggio da cambiare in base alle proprie esigenze).

La penetrazione profonda del dispositivo può alleviare in breve tempo dolori, borsiti, spasmi muscolari, nevralgie e altre patologie muscolo scheletriche causate da distorsioni articolari.

Quasi tutte le malattie dei tessuti molli sono legate a traumi, sovraccarico muscolare o postura anomala. La maggior parte di queste patologie interessa il tessuto cicatriziale del viso, che può essere trattato con il dispositivo.

L'esperienza pratica dimostra che in molti casi la combinazione di allenamento con vibrazioni e fisioterapia aumenta l'efficacia del trattamento. Questo dovrebbe essere fatto su consiglio o in compagnia di un medico, uno specialista o un fisioterapista.

Indicazioni

Dolori e spasmi dovuti a contusioni, distorsioni e strappi muscolari

Favorire la circolazione del liquido edematoso nel tessuto connettivo e nella fascia ispessiti

Ridurre l'accumulo di acido lattico nel muscolo

Aumentare l'ampiezza di movimento delle articolazioni

Eliminare l'affaticamento muscolare

Controindicazioni

In caso di aneurismi ed emorragie

Malattie cardiache, pacemaker o defibrillatori

Gravidanza, cancro

Il dispositivo non deve essere utilizzato a meno di 5 cm da un intervento chirurgico entro 90 giorni, ad esempio un intervento alla colonna vertebrale cervicale.

Si noti che parti come la tibia, il dorso del piede, il dorso della mano, ecc. sono meno coperte dalla muscolatura.

Consultare il medico specialista in caso di disturbi o prima di iniziare un trattamento di routine.

Risoluzione dei problemi

Schermo nero o il dispositivo non si accende

Il problema potrebbe essere dovuto alla protezione da sovraccarico della batteria;

Collegare la linea di ricarica per caricare l'apparecchio e attivare la batteria.


Problemi che richiedono attenzione

Per ridurre il rischio di guasti, scosse elettriche, lesioni, incendi, morte e danni alle apparecchiature, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

- Questo prodotto non è destinato a scopi medici, ma svolge esclusivamente una funzione di massaggio personale.
- Non permettere ai bambini o a persone non sorvegliate di utilizzare questo prodotto; collocare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- È vietato utilizzarlo sulla superficie della pelle non asciutta e pulita, può essere utilizzato attraverso gli indumenti, premere e muovere delicatamente sulla pelle, circa 10 secondi per ogni parte.
- È vietato utilizzare il prodotto sulla sommità del capo o su qualsiasi parte dura o ossea del corpo; se non si avverte dolore o fastidio, utilizzare il prodotto solo sui tessuti molli del corpo.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di lividi, dolore o fastidio nella zona da massaggiare.
- Non stare in piedi o seduti direttamente sul prodotto, per non rischiare di cadere.
- Un uso eccessivo provoca il surriscaldamento del prodotto e ne riduce la durata. In caso di uso ripetuto, lasciare raffreddare il prodotto per un po' prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi, come il bagno, e non immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Non collocare il prodotto vicino al fornello o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il prodotto in caso di fulmini.
- Non inserire o far cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
- Non coprire il massaggiatore quando è in uso, per evitare malfunzionamenti dovuti all'aumento della temperatura del motore.

- Non lasciare che dita, capelli o altre parti del corpo si avvicinino all'albero e alla parte posteriore della testa vibrante, perché potrebbero rimanere intrappolati.
- Prima di smaltire l'apparecchio, è necessario rimuovere la batteria dall'apparecchio.
- Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.

Procedura per rimuovere la batteria quando si smaltisce l'apparecchio:

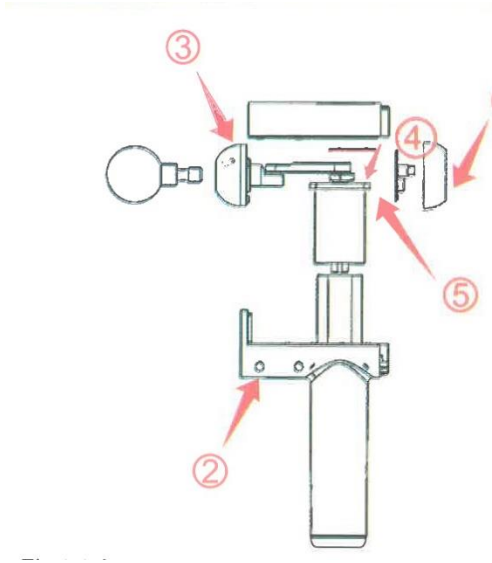

1. Per prima cosa, rimuovere con un cacciavite una vite in totale al punto (1) come mostrato nella figura e aprire il coperchio posteriore della macchina.
2. Successivamente, rimuovere la vite (2) come mostrato in figura con un cacciavite e aprire il coperchio superiore della macchina.
3. Rimuovere quindi le viti (3) con un cacciavite a croce, allentare le viti in 4 punti con una chiave a brugola da 2,5 e rimuovere l'eccentrico.
4. Aprite la vite (5) con un cacciavite Phillips e rimuovete il motore. 5. Dopo aver rimosso il motore, cercate di individuare il motore. 5. Dopo aver rimosso il motore, individuare la spina della batteria sul circuito stampato, estrarre la spina, rimuovere la batteria e smaltirla secondo le norme vigenti.

Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere la batteria dall'apparecchio e differenziare correttamente i rifiuti.