


Instrumento para o cuidado do pescoço e eliminação de rugas – SC327



MANUAL DO UTILIZADOR

Estrutura do produto

Instrumento para o cuidado do pescoço e eliminação de rugas – SC327

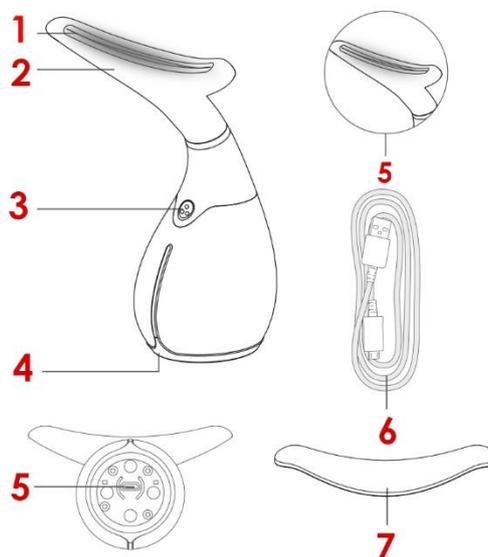

1. Linha de deteção; 2. Luz azul/vermelha/verde; 3. Tecla de interruptor ON/OFF; 4. Anel sensor; 5. Interface USB; 6. Cabeça de massagem; 7. Cabo USB; 7. Tampa de proteção

(Após ligar, pressione o anel sensor e deixe o cabeçote de massagem tocar o seu pescoço, então o dispositivo começará a vibrar)

Instruções dos 3 modos

1. Modo de primeira velocidade

Modo de baixa velocidade

Frequência de vibração média

Luz azul

2. Modo de segunda velocidade

Modo de velocidade média

Frequência de vibração um pouco mais alta

Terapia de calor magnético a $45\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$

Luz verde

3. Modo de terceira velocidade

Modo de alta velocidade

Frequência de vibração mais alta

Terapia de calor magnético a $45\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$

Luz vermelha

A luz azul é a luz mais fria, que pode promover a síntese de colagénio, ativar a pele, melhorar a flacidez e refinar os poros. Além disso, contribui significativamente para melhorar a pele oleosa e sensível.



A luz verde pode aumentar o metabolismo celular, promover a microcirculação na superfície da pele e ajudar com a linfa e o edema. Ao mesmo tempo, tem o efeito de suavizar e equilibrar a pele.




A luz vermelha pode reforçar a vitalidade celular, acelerar a circulação sanguínea e promover o crescimento de fibroblastos e colagénio. Também tem uma influência significativa na melhoria das linhas finas, rugas, flacidez, melanina e cicatrizes.




Características do produto

- O cabeçote de massagem foi especialmente concebido para os ombros, pescoço e outras partes do corpo. O seu design aerodinâmico está em conformidade com a teoria ergonómica e pode ajudar a transportar a energia para cada parte da pele.
- As cabeças de massagem aquecem a 45 °C para ativar a pele, combinando com três modos IPL acústicos em baixa, média e alta velocidade, e 3 modos (azul, verde, vermelho) de massagem com luz colorida, podem promover a circulação sanguínea, estimular os pontos de acupuntura do pescoço, limpar os meridianos, melhorar a circulação e promover o metabolismo, promover a descarga de substâncias tóxicas acumuladas a longo prazo, retardar o envelhecimento das células da pele, suavizar o contorno do pescoço, reduzir o inchaço, relaxar o pescoço, fazer tratamentos de acupuntura, eliminar rapidamente a fadiga e restaurar a aptidão física.
- Três modos sónicos como baixa velocidade (azul), velocidade média (verde), alta velocidade (vermelho), todos feitos através de tecnologia avançada, após selecionar o modo, quando a cabeça de massagem entra em contacto com a pele, a vibração começa.
- Com função de memória de modo e função de lembrete pessoal de 60 segundos, pode ajustar facilmente o tempo de massagem.
- Carregamento por cabo USB, segurança e proteção do meio ambiente.
- Pequeno e portátil, pode ser usado em qualquer lugar a qualquer momento.
- Conceitos de design biônico recém-adotados, em forma de cauda de golfinho, uma novidade que preserva o que há de bom no clássico.


A nossa massagem ultrassónica com iões de chumbo ajuda a pele a absorver eficazmente os nutrientes.

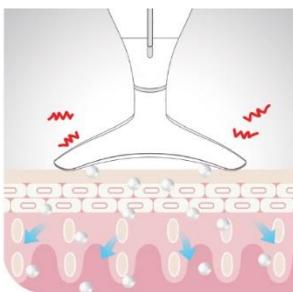

A nutrição da massagem tradicional fica na superfície da pele e não é capaz de nutri-la.

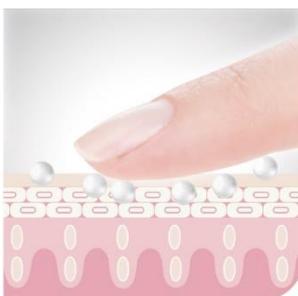

Como usar no pescoço

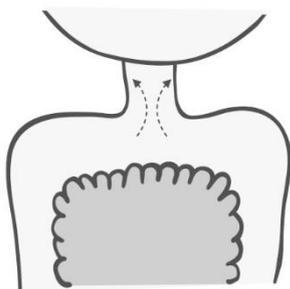

1. Para ligar o dispositivo, o anel sensor deve estar pressionado e a cabeça de massagem deve estar em contacto com a sua pele.
2. Aplique o produto de cuidado da pele no pescoço.
3. Selecione o modo de sua preferência, segure o cabeçote de massagem e levante o pescoço por baixo.
4. A nuca também precisa de massagem, use o dispositivo para massagear os pontos de acupuntura pressionando, apertando, acariciando, empurrando, etc.

Como usar no rosto



1. Aplique o produto de cuidados da pele uniformemente no rosto.
2. Selecione o modo que preferir.
3. Pressione os pontos de acupuntura para aliviar a tensão muscular.
4. Toque suavemente a pele do rosto, movendo-se de baixo para cima, adaptando-se ao formato do seu rosto.

Cómo limpiiar


1. Pressione a tecla ON/OFF durante um segundo para desligar o aparelho.
2. Limpe o produto com um pano macio, não é permitido o uso de produtos de limpeza abrasivos.
3. Feche a tampa de proteção e coloque-o num local ventilado e seco.

Precauções


1. Leia o manual do produto antes de utilizá-lo e guarde-o para futuras consultas.
2. Carregamento por cabo USB, o carregamento da estação de bateria baixa até à saturação demora cerca de 2 horas, completamente carregada permite cerca de 1-2 horas de utilização contínua.
3. Quando a bateria está fraca, a luz vermelha pisca; quando a bateria está a carregar, a luz azul pisca; quando a luz azul está acesa, indica que a carga está completa.
4. O produto tem função de memória de modo, ao ligá-lo, entrará automaticamente no modo que escolheu da última vez.
5. O produto desligar-se-á automaticamente se não for utilizado durante mais de 2 minutos (se houver alguma operação em 2 minutos, permanecerá em estado de espera).
6. Não é permitido utilizar este produto enquanto estiver a carregar.
7. O produto possui função de aquecimento, a temperatura aproximada é de 45 °C. Pessoas diferentes têm formas diferentes de sentir a temperatura, algumas são propensas a sentir calor. Após aplicar o óleo essencial ou creme de massagem na pele, o produto ajustará automaticamente a temperatura para a mais confortável.
8. Por favor, pare de usar o produto se sentir desconforto ou algum incómodo na pele e consulte um médico.
9. O produto não é resistente à água, por favor, não o molhe.
10. Coloque o produto num local seco e ventilado, para evitar a luz solar direta, e certifique-se de que não há produtos químicos corrosivos ao redor.
11. O pano de limpeza utiliza material de lã de alta qualidade, podendo ser lavado repetidamente.
12. Lembrete: utilize um produto de cuidados da pele moderado. O uso excessivo do produto para cuidados da pele não pode ser completamente absorvido. Pelo contrário, os resíduos podem penetrar no aparelho e danificá-lo. Limpe o dispositivo atempadamente com um pano de limpeza após a utilização.
13. Após um longo período de inatividade, o produto necessita de cerca de 15 minutos para reativar o estado de carga (a luz indicadora acenderá gradualmente) e a luz indicadora piscará em azul, conforme mostrado na imagem.
14. Mantenha fora do alcance das crianças para evitar qualquer perigo.

CARGA DO EQUIPAMENTO

No início do carregamento, pisca

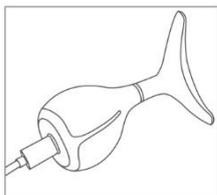

Quando a luz permanecer acesa, o equipamento está totalmente carregado.

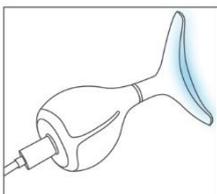

Perguntas e respostas frequentes

O produto de repente não vibra, não funciona, qual é o motivo?

Aumente a dose de óleo essencial/creme de massagem utilizada.

Verifique se a alimentação elétrica do produto está correta.

Verifique se o aparelho liga corretamente.

Reinicie o produto.

Entre em contacto com o distribuidor da marca ou consulte o fabricante.

Quando se utiliza o produto, se a vibração parar às vezes, isso é normal?

Este produto adota a tecnologia de vibração tátil inteligente. Quando as suas mãos entram em contacto com o anel sensor inteligente e a cabeça do sensor entra em contacto com a pele ao mesmo tempo, ele começa a funcionar de forma inteligente. É normal que a vibração pare quando o produto não estiver completamente ajustado à pele.

Posso usar este produto todos os dias?

Sim, a intensidade da vibração e o ajuste da temperatura deste dispositivo foram concebidos de forma inteligente por uma equipa profissional, pelo que pode ser utilizado várias vezes ao dia.

Sou alérgico à pele, posso usá-lo?

Este aparelho é especialmente fabricado com aço inoxidável de qualidade alimentar, que cumpre as normas internacionais, e silicone de qualidade alimentar de grande atividade, pelo que se provou ser seguro, saudável e não irrita a pele, pelo que as pessoas alérgicas à pele podem usá-lo.

Qual é o período de tempo mais recomendado todos os dias?

Pode ser usado a qualquer momento, utilizando entre 5 a 10 minutos em cada ocasião..

Especificações

Nome do produto: Instrumento para cuidados com o pescoço e eliminação de rugas

Modelo: ST-H309 / SC327

Tensão nominal: 5V

Potência nominal de entrada: 3W