


Instrumento de fototerapia para rejuvenescimento - DS-8811A



MANUAL DE USUÁRIO

Observação: O dispositivo não é à prova d'água, limpe-o com um lenço facial úmido ou pano úmido após o uso.

Peças de equipamentos

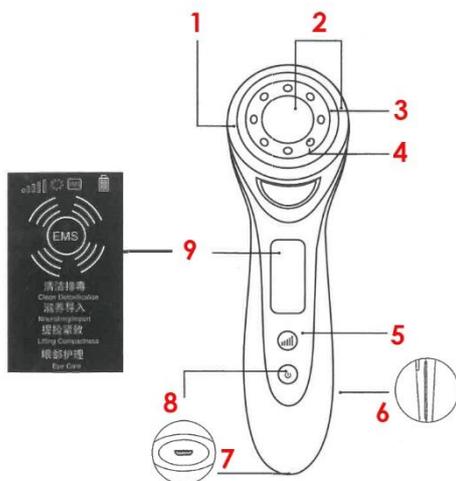

1. Anel de fixação de algodão para maquiagem; 2. Cabeça de massagem; 3. Abajur; 4. Luzes LED; 5. Ajuste de temperatura; 6. Tira de indução de íons; 7. USB; 8. Botão liga/desliga/interruptor de modo; 9. Tela de exibição de operação.

Modos

Modo 1: Função de limpeza e desintoxicação: Luz azul + Vibração Intensidade forte/fraca
Intensidade da vibração: 1 a 5 mudanças.

Modo 2: Função Nutritiva Importante: Luz vermelha + Aquecimento + Intensidade de vibração Forte/Fraca, Luz vermelha e vibração sincronizada muda de 1 a 5 velocidades.

Modo 3: Função de levantar e apertar: Luz amarela + Aquecimento + Vibração + EMS Intensidade forte/fraca, Temperatura constante + Vibração constante + EMS 1 a 5 mudanças


Modo 4: Função de cuidado dos olhos: Aquecimento + Vibração Intensidade forte/fraca, Temperatura constante + Vibração constante

Diferentes modos de funcionamento

Limpeza e desintoxicação (é necessário utilizar um algodão de maquiagem)

Este modo pode limpar eficazmente a sujidade dos poros e iluminar a pele. Utilize a máquina para limpar primeiro o rosto e depois utilize a espuma de limpeza para limpar a sujidade derivada (a espuma de limpeza e a máquina não podem ser utilizadas ao mesmo tempo).


1. Retire a proteção de algodão

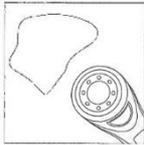

2. Coloque um algodão de maquiagem



3. Despeje a loção

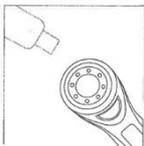

4. Pressione e segure o botão liga/desliga por 1,5 segundo para iniciar o instrumento



5. Segure as tiras de indução em ambos os lados da máquina com os dedos



6. Limpeza facial circular (massagem circular no sentido anti-horário)



Importação nutritiva (não é necessário utilizar com algodão de maquiagem).

Este modo pode melhorar a atividade celular, atenuar as rugas e ajudar os produtos de cuidados da pele a hidratar profundamente a pele.

1. Colocar uma máscara facial no rosto ou utilizar produtos de cuidados da pele.



2. Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 1,5 segundos para ligar o equipamento e selecionar o modo "Nourishing Import".



3. Segurar o instrumento, tocar nas tiras de indução de ambos os lados do instrumento, massajar em movimentos circulares no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no rosto para absorver.



4. Lave a essência restante da máscara facial com água ou massageie para absorver de acordo com as necessidades da sua pele.



Lifting & Tightening (não precisa de ser utilizado com a almofada de maquiagem)

Este modo desperta e relaxa a pele, ajudando-a a recuperar a sua luminosidade e vitalidade.

1. Aplicar uniformemente na pele os produtos de cuidados diários ou a loção reafirmante.



2. Premir e manter premido o botão de alimentação durante 1,5 segundos para iniciar o instrumento e selecionar o modo "Lifting Compactness".



3. Segure o instrumento, toque nas tiras de indução em ambos os lados do instrumento e levante a face de baixo para cima



Cuidado dos olhos (pode ser utilizado com creme para os olhos)

Este modo é utilizado principalmente para a massagem dos olhos.

1. Aplicar uniformemente o creme de olhos no contorno dos olhos



2. Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 1,5 segundos para ligar o dispositivo e selecionar o modo "Eye Care".



3. Segurar o instrumento, tocar nas tiras de indução de ambos os lados e massajar os olhos de dentro para fora.



Aviso:

1. O dispositivo é ligado premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 1,5 segundos. NOTA: Não pode ser utilizado durante o carregamento.
2. Quando utilizar o dispositivo, utilize os dedos para segurar as tiras de indução em ambos os lados do instrumento para formar um circuito de alimentação com a sua mão.
3. Utilizar desmaquilhante ou loção de limpeza, não utilizar com espuma de limpeza ou desmaquilhante.
4. O aparelho utiliza tecnologia de iões de micro-corrente, existe uma ligeira sensação de corrente é um fenómeno normal, não deve preocupar-se.
5. O aparelho não é à prova de água, por favor, limpe-o apenas com uma toalha de rosto húmida ou um pano húmido após a utilização, NUNCA o mergulhe em água