

Utilização do mini HIFU, 3º
Instrumento de beleza multifuncional.



DISPOSITIVO



FUNÇÕES DO PRODUTO

O instrumento de beleza ultrassônico HIFU de 4 polegadas aprimorado é composto por ultrassom HIFU / RF / microeletricidade EM / PULSO.

Função ultrassônica HIFU: O ultrassom concentra-se na camada SMAS do corpo humano, reorganizando o colagénio do tecido SMAS sem danificar o tecido normal, restaurando a elasticidade da pele, atenuando as linhas de expressão e melhorando o contorno facial.

Função RF: O RF emite 1 milhão de microondas por segundo, que aquecem profundamente a pele, promovem a decomposição da gordura subcutânea, abrem rapidamente os poros e ajudam a emagrecer a pele.

Função microelétrica EMS: Massagem facial da pele em vários modos, fortalece, reafirma e tensiona a pele.

PULSO: O microcalor pode abrir os vasos sanguíneos e promover a circulação de tensão na pele profunda, tornando o colagénio mais ativo e melhorando a elasticidade da pele.

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO

1. Insira o adaptador de corrente na tomada e a cabeça DC no conector do instrumento.
2. Mantenha premido o botão de ligar durante 3 segundos para aceder à interface principal.
3. Prima **L** para seleccionar um modo. O HIFU/RF/EMS/PULSO pode ser rodado para baixo para seleccionar um modo.
4. Pressione a tecla **M** para entrar no modo de funcionamento (tempo de 20 minutos). Ao terminar ou chegar à metade do modo, pressione a tecla **M** para sair.
5. Pressione a tecla **L** para seleccionar o nível de energia no modo de funcionamento (seleção de ciclo 1S).
6. No modo de funcionamento, pressione o botão do interruptor para desligar ou ligar as luzes LED do cabeçote.
7. Mantenha pressionado o botão do interruptor por 3 segundos para desligar o equipamento.

8. Após a utilização, desligue o adaptador de corrente, retire a cabeça OC do instrumento e limpe a sonda metálica com uma toalha de papel húmida

SEQUÊNCIA DE ENFERMAGEM

Tratamento especial uma vez por semana

Modo <HIFU>: 10 minutos + Modo <RF>: 10 minutos = Total 20 minutos

1. Aplique o gel na área a ser tratada e realize um tratamento no modo <HIFU>.
2. Aplique a essência de beleza na área a ser tratada e realize um tratamento no modo <RF>.

***Atenção: Não é permitido permanecer na pele por mais de 3 segundos.**

***O tratamento no modo único é permitido.**

	Mova-se ao longo da linha do rosto, desde a parte inferior da mandíbula até a parte posterior da orelha. Em seguida, mova-se da glândula parótida até o ombro.
	Mova-se ao longo da linha do rosto, desde o final da mandíbula até à têmpora. Em seguida, mova-se ao longo da bochecha, desde a narina até à têmpora. Por fim, mova-se por baixo do olho, desde o canto interno dos olhos até à têmpora.
	Mova-se de baixo para cima enquanto levanta as sobrancelhas até a linha do cabelo.

★Realize cada procedimento conforme os passos 1 a 3, de 2 a 3 vezes

★Mova-se de forma constante e lenta e não permaneça na mesma parte por mais de 3 segundos.

★Adicione mais gel quando secar.

Tratamento diario

Modo <EMS> = 10 minutos + Modo (PULSO): 10 minutos = Total 20 minutos

1. Aplique o gel na área a ser tratada.


Durante o tratamento, aplique mais gel se sentir secura. Se usar pouco gel, poderá sentir irritação na pele ou o efeito do tratamento poderá não ser evidente.

*Coloque todos os elementos perto da área da pele a ser tratada.

O tratamento excessivo sobrecarrega a pele. Nunca use este produto várias vezes ao dia.

*Durante o uso, caso a cabeça do produto fique áspera devido à aderência de sujeira, etc., limpe a superfície da cabeça com um pano macio.

*Não use este produto se não se sentir bem.

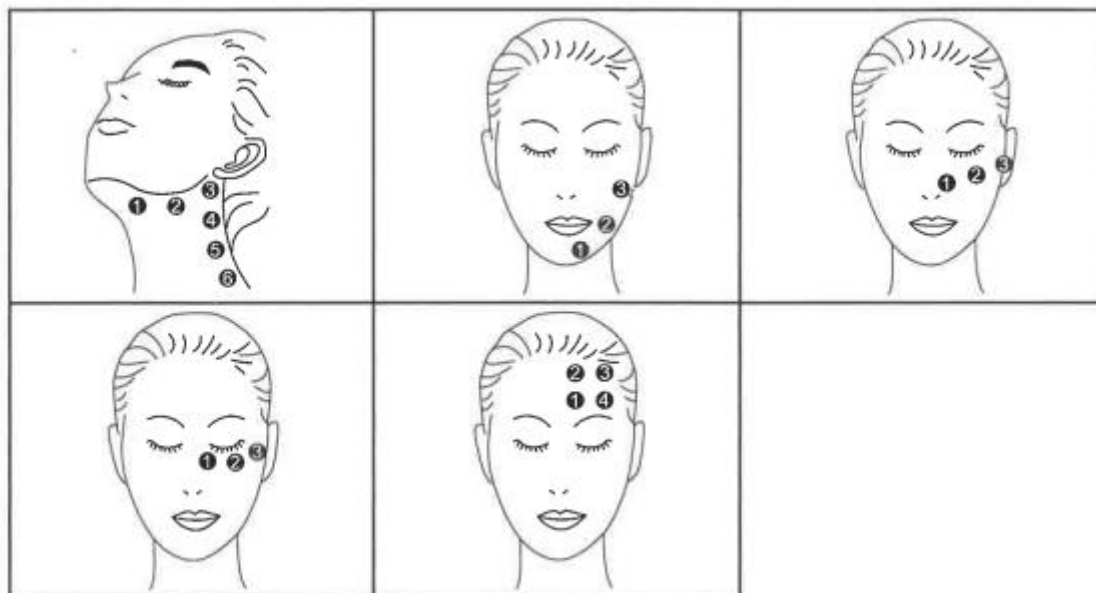

★Repita cada procedimento 2 a 3 vezes.

★Aplique este produto sobre a pele na ordem indicada durante aproximadamente 3 segundos, conforme mostrado na ilustração. O procedimento de tratamento na ilustração é uma indicação.

★ Adicione mais gel quando secar.

AVISO

Não utilizar nas mucosas, nas pálpebras superiores, nos globos oculares, à volta das orelhas e na maçã de Adão.

PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DESTE PRODUTO

Não utilize em pessoas com:

- Doenças cardíacas, pressão arterial anormal e tumores malignos.
- Febre ou doenças infecciosas ou agudas.
- Em tratamento dentário.
- Imunidade diminuída devido a uma deficiência causada por uma doença como a SIDA ou medicamentos imunossupressores.
- Pessoas com hemofilia, doença hemorrágica, diabetes, neuralgia facial que têm percepção e dor anormais.
- Pessoas com constituição cicatricial, doença da pele negra facial, fotoalergia, pigmentação.
- Uso crónico de medicamentos somatostatina ou telangiectasia causada por disfunção hepática.
- Pessoas com constituição alérgica, dermatite alérgica, doenças de pele, músculos sensíveis ou pele frágil.
- Pessoas com histórico de epilepsia ou incómodo causado por luzes intermitentes.
- Pessoas com sequelas na cabeça ou nos olhos causadas por acidentes de trânsito, etc.
- Pacientes que se submeteram a cirurgia ocular (consulte o seu médico antes de usar a ceratomileuse in situ a laser).
- Mulheres grávidas, período de fisiologia, período de amamentação.
- Crianças pequenas, pessoas incapazes de se expressar.
- Pessoas que estão bêbadas ou com ressaca.
- Pessoas que tomam medicamentos para dormir, que estão extremamente cansadas e doentes.
- Pessoas que tiveram problemas de pele, como manchas e dermatite de contacto causadas por fibras químicas.
- Pessoas que têm ou tiveram dermatite causada por cosméticos.
- Esfoliações químicas recentes em salões de beleza.

- Pessoas que tiveram problemas na pele após usar equipamentos de beleza.

Não usar nas seguintes áreas:

- Posição não designada.
- Membranas mucosas que envolvem o coração, o globo ocular e a pálpebra superior, os lábios e a boca.
- Local de verruga doente ou viral.
- Área da pele que causa formigamento e inflamação devido à exposição excessiva ao sol.
- Feridas, eczema, manchas secas, bolhas, feridas supurantes e espinhas, depilação ou barbear recente.

PRECAUÇÕES ANTES DE USAR

Proibição	*Não use em conjunto com outros procedimentos cosméticos. *Não use para fins não cosméticos. Não use em condições danificadas ou que não funcionem corretamente. Este instrumento cosmético é um instrumento de enfermagem cosmética e não deve ser usado para fins terapêuticos ou outros. *Não olhe fixamente para a luz LED. *Não utilize no mesmo local continuamente. Caso contrário, poderá danificar a pele ou causar problemas cutâneos, como infecção, inflamação, sangramento, pigmentação ou agravamento dos sintomas. *Não utilizar em animais de estimação.
Proibição de uso em áreas húmidas	*Não utilize nem guarde no banheiro ou em locais húmidos. *Não coloque em locais onde possa entrar em contacto com água (lavatório, etc.).
Proibição de molhar	*Não mergulhe o dispositivo em água, nem derrame água sobre ele ou o borrife. (Caso contrário, poderá causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento).
Proibição de mãos molhadas	*Não toque no dispositivo com as mãos molhadas. (Caso contrário, poderá provocar um choque elétrico e ferimentos).
Proibição	*Não utilize perto de diluentes, óleos voláteis, água desoxidante, aerossóis ou outros materiais combustíveis. *Não utilize adaptadores CA não específicos. O adaptador CA é exclusivo para carregar este produto.

	*Não ligue o adaptador CA a outro produto (pode causar incêndio, choque elétrico ou falha).
Desligar	*Certifique-se de segurar a extremidade do conector ao ligar ou desligar o adaptador. *Não puxe o cabo para ligar ou desligar o adaptador. *Não ligue o adaptador CA específico a outros dispositivos.
Proibição	*Não danifique o cabo da ficha. *Não o corte, dobre, puxe, torça, coloque objetos pesados sobre ele nem o prenda (caso contrário, poderá causar um incêndio, uma descarga elétrica ou um mau funcionamento). *Evite sobrecarregar a ficha (caso contrário, causará aquecimento ou um incêndio).
Obrigação	*Aplicável apenas a tomadas domésticas. *Certifique-se de que o adaptador CA e a ficha estão bem ligados.

PRECAUÇÕES

Desligue o dispositivo	*Pare de usar e desligue a alimentação se ocorrer a seguinte condição; desconecte o adaptador CA da tomada: -Terremotos, trovoadas -Este dispositivo ou o adaptador CA, a cablagem emitem fumo, calor anormal, odor anormal, deformação.
Proibição	*Este dispositivo pode aquecer durante a utilização sem qualquer problema de segurança. *Não ligue este dispositivo a produtos metálicos ou elétricos. ※Telemóveis, televisores, etc.
Proibido retirar	*Não desmonte, modifique nem repare o dispositivo por conta própria. Consulte o departamento de pós-venda para repará-lo.
cláusula obrigatória	*Certifique-se de remover joias, óculos e lentes de contacto ao usar o aparelho. ※ Joias: brincos, colares, relógios, etc. *Certifique-se de começar no nível 1 ao usar o aparelho pela primeira vez ou se ainda não estiver habituado. *Não pressione o cabeçote com força sobre a pele, não permaneça no mesmo local por mais de 3 segundos, caso contrário, causará problemas na pele.

	*Ao cuidar da pele ao redor dos olhos, aplique-o nos olhos antes de usar *Se sentir dor anormal na pele ou no corpo durante o uso, pare de usar imediatamente e consulte o seu médico. Pare de usar e consulte um especialista
--	--

LEIA ATENTAMENTE OS SEGUINTE PONTOS ANTES DE UTILIZAR

1	Cuidados especiais para cada área = 1 vez por semana *Semanas 1-2, amamente duas vezes por semana. A partir da terceira semana, comece a inspecionar o estado da pele e decida quais cuidados realizar aproximadamente a cada semana. *Cuidar demais não é bom para a pele. Os cuidados diários devem ser realizados com uma frequência de 1 vez por dia ou 2 vezes por dia. Use de acordo com as condições da pele.
2	*Remova a maquiagem e limpe o rosto, elimine a maquiagem e a sujidade sebácea e aplique uma loção de beleza especial antes dos cuidados faciais.
3	O estado da pele varia de acordo com o estado do corpo. *Depende do estado da pele. Se a pele apresentar erupções, vermelhidão, comichão e outras condições anormais, interrompa o uso e consulte um especialista.

Especificações do produto

Nome do produto	Uso de MINI HIFU 3.º
Tamanho do produto	$230 \times 80 \times 75$ mm
Tamanho da embalagem	$260 \times 150 \times 85$ mm
Tensão de entrada	24 V CC
Corrente de trabalho	600 mA
UF	2,4 MHz
RF	3 MHz
Frequência elétrica	100 Hz
Frequência de impulso	200 kHz
Temporizador	20 minutos
Peso	650 g