

SISTEMA DE DEPILAÇÃO IPL – A109



Manual do utilizador

Parâmetros técnicos

Tubo da lâmpada: Tubo de xénon de quartzo

Fonte de luz: Luz intensa pulsada

Frequência de energia: 1,5 - 3,9 J/cm²

Tamanho do foco: 4,2 cm²


Comprimento de onda: 470nm-1100nm

Vida útil do tubo da lâmpada: 600000 flashes

Adaptador: AC100-240V @ 12V DC 3A

Gama de temperaturas de funcionamento: 5-30°C

Gama de humidade de funcionamento: Humidade de rotação 30%-60%

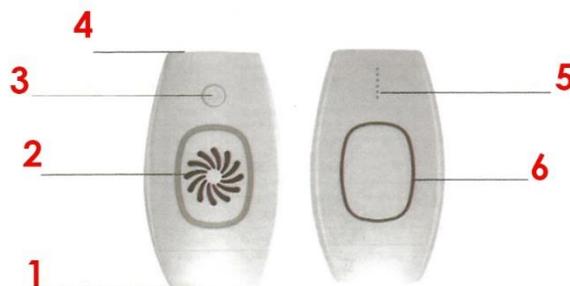

1. Janela de flash / saída de luz pulsada, 2. Entrada de ar de arrefecimento, 3. Botão de alimentação/intensidade, 4. Saída de ar de arrefecimento, 5. Indicador luminoso de intensidade/pronto, 6. Botão de flash

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES

Este aparelho destina-se à depilação e ao rejuvenescimento da pele. Pode ser utilizado para o excesso de pêlos em várias partes do corpo (por exemplo, lábios, axilas, membros, testa, etc.). O aparelho funciona mais eficazmente em utilizadores com pêlos pretos ou escuros. Não é adequado para cabelos brancos, cinzentos ou loiros. Do mesmo modo, não é adequado para pessoas com um tom de pele castanho escuro. Para referência, consulte a ficha de contraste de cores abaixo.

Cartão de contraste de cores da pele e do cabelo

	1	2	3	4	5	6
A	x	x	x	x	x	x
B	x	x	x	x	x	x
C	x	x	x	x	x	x
D	√	√	√	√	√	x
E	√	√	√	√	√	x
F	√	√	√	√	√	x
G	√	√	√	√	√	x

COR DA PELE

1. Branca, 2. Amarela, 3. Castanho claro, 4. Castanho médio, 5. Castanho, 6. Castanho escuro.

COR DO CABELO

A. Branco ou cinzento, B. Ruivo, C. Dourado claro, D. Castanho claro, E. Castanho, F. Castanho escuro, G. Preto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) Utilizar um toalhete com álcool medicinal para limpar a janela de vidro antes da utilização.
 - 2) Ligue o dispositivo a uma tomada eléctrica. A luz indicadora branca deve piscar.
 - 3) Prima e mantenha premido o <Botão de alimentação> durante 3 segundos para colocar o dispositivo no estado de funcionamento. O ecrã liga-se enquanto o sistema está em funcionamento.
- Nota: A luz indicadora branca estará acesa durante o processo de arranque.
- A luz indicadora branca piscará quando estiver perto da pele, devido ao sensor incorporado na janela do flash.
 - Se a luz indicadora branca não piscar, aproxime o dispositivo da pele até que ela pisque.
- 4) Clique no botão <<Power>> para seleccionar o nível de intensidade pretendido.



O aparelho dispõe de 5 níveis de intensidade (1 - mínimo, 5 - máximo), como mostra o esquema abaixo. Para regular o nível de intensidade, prima o botão <<Power>> até obter o nível de intensidade pretendido.

1 ●	1 ●	1 ●	1 ●	1 ●
2 ○	2 ●	2 ●	2 ●	2 ●
3 ○	3 ○	3 ●	3 ●	3 ●
4 ○	4 ○	4 ○	4 ●	4 ●
5 ○	5 ○	5 ○	5 ○	5 ●
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
Intensity level 1	Intensity level 2	Intensity level 3	Intensity level 4	Intensity level 5

5) Mova a janela do flash em direção à área-alvo na pele até a luz indicadora de potência piscar. Prima o "botão de libertação da luz de pulso" para piscar uma vez. Após cada flash, a luz indicadora desliga-se para carregar a energia. Após 1-3 segundos, a luz regressa para indicar que está pronto a ser utilizado.

Nota:

- Para obter resultados ideais, recomenda-se que pisque na área-alvo 2-3 vezes e de forma consistente em todas as áreas-alvo.

- O dispositivo não estará a funcionar corretamente se a luz indicadora branca não estiver a piscar. Se esta situação ocorrer, siga os passos abaixo:

A. Certifique-se de que a janela do flash está suficientemente perto da pele.

B. Se a luz indicadora branca não estiver a piscar, segure o dispositivo junto à pele durante 3-5 segundos e verifique se a luz está a funcionar normalmente.

C. Se o passo B não for eficaz, reinicie o dispositivo e tente novamente a função.

D. Se os passos anteriores não resolverem o problema, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

6) Prima e mantenha premido o <<Botão de alimentação>> durante 3 segundos para desligar o dispositivo.

7) Quando terminar de utilizar o dispositivo, limpe a janela do flash com um pano embebido em álcool. Nota: Após uma utilização frequente do aparelho, podem aparecer manchas brancas no interior da objetiva. Isto não afectará o funcionamento.

PROCESSO DE GESTÃO DO CABELO

TESTE ANTES DA UTILIZAÇÃO

Recomenda-se vivamente a verificação de reacções adversas através da realização de um teste cutâneo pelo menos 2 horas antes de qualquer procedimento de depilação.

Método de teste:

- Numa pequena área da pele (por exemplo, na parte interna do braço), aplicar flashes 1 ou 2 vezes de baixa intensidade para alta intensidade.
- Se após 2 horas aparecerem vermelhidão, ardor, picadas ou outros sintomas, consultar um médico antes de voltar a utilizar o produto.
- Se ocorrer um ligeiro desconforto, baixar o nível de intensidade antes de voltar a utilizar o produto. Se o desconforto persistir, consulte um médico antes de voltar a utilizar o produto.

PASSOS DE FUNCIONAMENTO

- 1) Limpar a janela do flash com toalhetes com álcool medicinal e raspar a área da lente. Limpar os pêlos remanescentes.
- 2) Ligar o aparelho e selecionar o nível de intensidade mais adequado para a depilação.
- 3) Depois de utilizar o aparelho, recomenda-se que arrefeça a pele com água gelada, uma toalha molhada ou um bálsamo refrescante. Pode também utilizar um tónico para reter a humidade da pele.
- 4) Recomenda-se vivamente que o aparelho não seja utilizado várias vezes na mesma zona. A intermitência só deve ocorrer duas ou três vezes seguidas no mesmo local. Os tempos de frequência de funcionamento devem ser reduzidos quando o aparelho é utilizado com um nível de intensidade elevado.

Nota:

- Utilizar 6 a 10 vezes durante um ciclo de remoção.
 - Utilizar uma vez de 2 em 2 semanas durante o ciclo de depilação.
 - Se crescerem novos pêlos finos após a utilização, utilize uma vez a cada 2-3 meses e continue para obter melhores resultados.
 - Recomenda-se que apare as áreas com pêlos grossos antes da utilização.
 - Continue a utilizar o aparelho com menos frequência quando o crescimento dos pêlos abrandar consideravelmente.
 - Os resultados podem variar consoante as características individuais do pelo e o tom de pele.
- 5) Para obter uma referência sobre as sessões, o nível de intensidade para a cor da pele e partes específicas do corpo, consulte o diagrama seguinte:

Posição**Debaixo do braço**

Cores de pele claras: Intensidade: 3-5 / Sessões: 3-4

Cor da pele Castanho claro: Intensidade: 3-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele Castanho médio e castanho: Intensidade: 2-3 / Sessões: 2-3

Cor da pele Castanho escuro: Não aplicável

Braços

Cor da pele branca: Intensidade: 3-5 / Sessões: 3-4

Cor da pele amarela e castanha clara: Intensidade: 2-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha média e castanha: Intensidade: 1-3 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Pernas

Cor da pele branca: Intensidade: 3-5 / Sessões: 3-4

Cor da pele amarela: Intensidade: 2-4 / Sessões: 3-4

Cor da pele castanha clara: Intensidade: 2-4 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha e castanha média: Intensidade: 1-3 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

Facial

Cor da pele branca: Intensidade: 3-4 / Sessões: 3-4

Cor da pele amarela e castanha clara: Intensidade: 2-3 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha média e castanha: Intensidade: 1-2 / Sessões: 2-3

Cor da pele castanha escura: Não aplicável

NOTAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO

- 1) Não utilizar o flash perto ou diretamente sobre os olhos durante a utilização.
- 2) Não limpar a janela do flash diretamente com álcool em spray.
- 3) Não aplicar cosméticos como gel de água na pele antes da utilização.
- 4) Evitar alimentos sensíveis à luz (por exemplo, espinafres) durante o funcionamento.
- 5) Para obter os melhores resultados, utilize os níveis de intensidade mais elevados adequados às suas características individuais (ATENÇÃO: NÃO TENHA ATRAVÉS DE TER SEGUIDO AS INSTRUÇÕES ACIMA).
- 6) As cores de pele mais escuras podem não gerar reações cutâneas imediatas. Respeitar o período de espera de 2 horas acima referido antes de aumentar o nível de intensidade.
- 7) Os hidratantes da pele e o protetor solar podem ser utilizados de acordo com as instruções após a utilização.
- 8) Evite os raios UV durante a utilização e proteja a sua pele quando estiver ao sol.

- 9) Não bloqueie a entrada de ar e a saída de arrefecimento, pois isso pode afetar o processo de arrefecimento do aparelho.
- 10) Os cabelos colados ao aparelho podem dar origem a manchas brancas; no entanto, isto não afecta o funcionamento do aparelho.
- 11) A utilização recorrente do aparelho pode provocar uma descoloração escura da lâmpada. Isto não afectará o funcionamento do aparelho, a menos que a lâmpada deixe de funcionar.
- 12) Este produto não é à prova de água e deve ser mantido afastado da água.
- 13) Interrompa imediatamente a utilização se o cabo da ficha estiver desgastado.
- 14) Não guardar perto de áreas com campos magnéticos fortes, humidade, poeira ou temperaturas elevadas.
- 15) Manter fora do alcance das crianças.
- 16) Não utilizar em combinação com outros produtos de depilação por luz pulsada.