


Instrumento de radiofrecuencia multipolar – ZM113

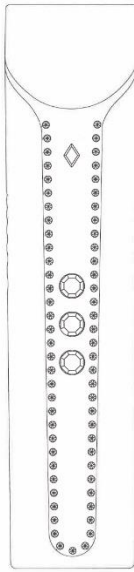

Manual de instrucciones


Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual.

Características del producto

El instrumento de belleza de radiofrecuencia multipolar es un instrumento de belleza facial que puede activar, rejuvenecer y mejorar el contorno facial. Integra electroporación de ultra pulsos + ondas de media y alta frecuencia + micro vibración + luz roja + luz azul + EMS:


1. EMS: También conocida como microcorriente, su función principal es relajar el espasmo muscular, aumentar el ejercicio, reducir y prevenir la atrofia muscular, aumentar la circulación sanguínea local y el reejercicio muscular. Utiliza una corriente débil para estimular los músculos y la linfa, contrae los músculos y logra el efecto de eliminar el edema, levantar y tensar.
2. Vibración: La vibración física se utiliza para ayudar al metabolismo de la piel, mejorar la capacidad de absorción y limpieza de los productos para el cuidado de la piel, ejercitar los músculos a través de la contracción y relajación muscular.
3. Luz roja: 610nm - 630nm, la luz roja penetra profundamente en la dermis, promueve la proliferación de colágeno y elastina, reduce las arrugas y restaura la vitalidad juvenil de la piel.
4. Luz azul: 405nm - 425nm, la luz azul refresca la piel, mejora el acné, granos, etc. , promueve la proteína, activa la piel e inhibe rápidamente la inflamación en poco tiempo. El uso a largo plazo puede tensar la piel flácida y disminuir las arrugas.
5. Electroporación de ultra pulsos: La electroporación de ultra pulsos emite intermitentemente y actúa sobre la piel en forma de rotación extremadamente rápida, que puede descomponer la grasa de la piel y limpiar la suciedad de los poros.

6. Introducción de pulso: Con el medio de electroporación de ultra pulso UP y las ondas de alta frecuencia, el canal de la piel se abre por la acción de la corriente eléctrica, y las moléculas nutritivas como el colágeno y el ácido hialurónico se introducen en la capa inferior de la piel para ayudar a la absorción de la esencia nutritiva.

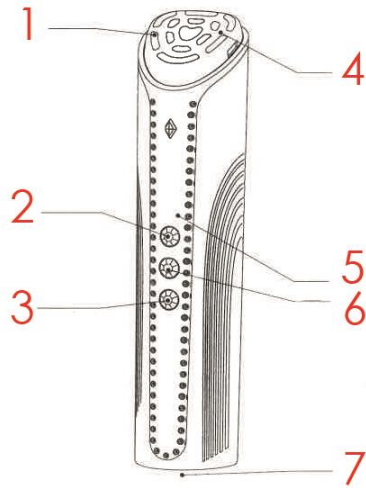

1. Electrodo, 2. Botón de encendido / Modo RM, 3. Botón de ajuste de intensidad, 4. LED, 5. Pantalla indicadora, 6. Modo RE, 7. Puerto USB

Iconos de la pantalla y funciones clave

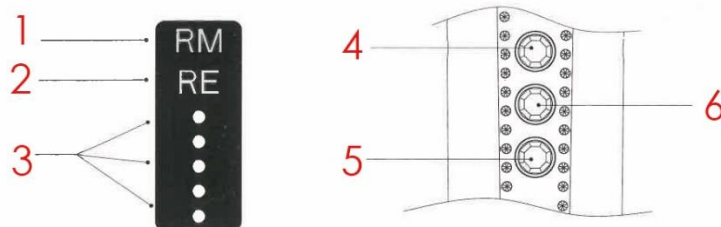

1. Modo RM, 2. Modo RE, 3. Indicador de intensidad de 5 niveles, 4. Botón de encendido / Modo RM, 5. Botón de ajuste de intensidad, 6. Modo RE.

1. En el estado apagado, presione prolongadamente el primer botón para encender la máquina, la máquina comienza a estar en modo RM, presione brevemente este botón para encender la vibración de pulso y presiónelo brevemente de nuevo para apagar la vibración de pulso.

2. Presione brevemente el segundo botón en el estado de encendido para cambiar al modo RE, presione brevemente este botón para encender la vibración de pulso y presione brevemente de nuevo para apagar la vibración de pulso.

3. En el estado de encendido, pulse brevemente el tercer botón para ajustar la intensidad del superpulso en los modos RM y RE y la intensidad del pulso importado, EMS y ondas de media y alta frecuencia.

4. Cuando la batería está baja, el zumbador avisará una vez cada 3 segundos, las luces de engranaje de intensidad se mostrarán cíclicamente durante la carga y las cinco luces se encenderán cuando esté completamente cargada.

5. Cada modo se apagará automáticamente tras 5 minutos de uso y se apagará automáticamente tras 5 minutos después de cambiar de modo.

Modo de empleo

Antes de amamantar:

1. Por favor, quítese los collares anillos y otros accesorios, así como todos los metales que lleve en el cuerpo.

2. Antes de dar el pecho desmaquíllese, límpiese, elimine el maquillaje y la suciedad sebácea como de costumbre y después continúe con la lactancia.

Modo RM:

1. La combinación de corriente de pulso de liberación intermitente, electroporación de ultra pulso, onda de radiofrecuencia, LED y vibración de pulso puede llevar a cabo el cuidado de la piel con alta eficiencia en un corto período de tiempo.

2. Uso con tóner, loción y esencia, aplique el tóner diario o loción de manera uniforme sobre la piel, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo, botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo y seleccione el modo "RM".

3. Sujete el aparato y levántelo la cara de abajo hacia arriba. Este modo puede mejorar la actividad celular, reducir arrugas y penetrar los ingredientes de belleza en cada rincón de la piel.

4. Frecuencia de uso: Utilizar de 1 a 2 veces a la semana, y la frecuencia de uso puede reducirse adecuadamente para piel sensible. No utilizar más de 10 minutos cada vez, 1-5 minutos cada vez para pieles sensibles, dejar de usar después de que los productos de cuidado de la piel se absorban, no aplique en seco.

5. No permanezca en la misma parte durante más de 3 segundos, de lo contrario causará problemas en la piel.

6. Después del tratamiento, limpie su cara con agua o utilice un algodón humedecido en agua pura para limpiar toda la cara y limpie el cabezal de masaje del instrumento.

Modo RE:

1. A través de la combinación de micro-corriente, LED y vibración pulsada, el cuidado de los músculos expresivos se puede realizar de manera eficiente.

2. Utilice con tónico, loción y esencia, aplique el tónico diario o la loción uniformemente sobre la piel, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo y seleccionar el modo "RE".

3. Sostenga el instrumento y tire de él de abajo hacia arriba en la cara.

Frecuencia de uso: Puede utilizarse una vez al día, y la frecuencia de uso puede reducirse adecuadamente para pieles sensibles. Utilice no más de 10 minutos cada vez, 1-5 minutos cada vez para la piel sensible, deje de usar después de que los productos de cuidado de la piel se absorben, no aplique en seco.

4. Cuidado de transición: causará una carga en la piel, por favor evite usarlo varias veces al día.
5. Durante el uso, si usted encuentra que el cabezal está manchado de suciedad y grasa, por favor limpie con un paño suave o una toalla de papel.
6. Después de cada tratamiento, masajee la cara adecuadamente para ayudar a que el líquido de belleza que queda en la piel penetre y se absorba.
7. Después del tratamiento, por favor, limpie el instrumento con un paño suave o toalla de papel que ha sido empapado en agua para eliminar la suciedad, y luego limpie el agua con una toalla de papel.
8. El cuerpo del producto no es impermeable, por favor no lo lave con agua directamente.
9. Cuando realice cuidados alrededor de los ojos, no mire directamente a la fuente de luz y cierre los ojos.

Cuestiones que requieren atención

1. Durante el uso, los electrodos positivo y negativo del cabezal de masaje están en contacto con la piel para formar un bucle.
2. Este producto adopta la tecnología de iones de microcorriente. Si percibe una pequeña sensación de corriente es normal, por favor úselo con confianza.
3. Cuando lo utilice, no permanezca en la misma parte durante más de 3 segundos para evitar molestias en la piel.
4. No lave el cuerpo con agua, el instrumento funcionará mal, por favor límpielo con un paño seco o un paño suave humedecido en un poco de limpiador neutro.
5. No limpie el cuerpo con soluciones corrosivas, como alcohol, gasolina, quitaesmalte de uñas, etc., que pueden causar fallos en el producto o agrietamiento o decoloración de los accesorios.
6. No debe utilizarse en cirugía plástica facial ni en implantes metálicos subcutáneos. Por favor, úselo bajo la guía de un médico durante el embarazo.
7. Limpie el cabezal de la guía con una toalla de papel, no la lave con agua y no toque objetos metálicos.
8. No lo coloque en un lugar húmedo como el baño para evitar un cortocircuito.
9. Este instrumento es adecuado para la cara, evitando pústulas y acné inflamatorio.
10. Las personas que utilizan equipos médicos electrónicos como marcapasos, máquinas de circulación extracorpórea, electrocardiógrafos y equipos de infusión no deben utilizar este equipo.
11. Las mujeres embarazadas, en periodo menstrual o de lactancia no deben utilizarlo.

12. Las personas con enfermedades del corazón y presión arterial anormal no deben usarlo.
13. Las personas con alergias, dermatitis alérgicas, enfermedades de la piel, piel sensible o piel frágil no deben usarlo.
14. No toque la cabeza del instrumento con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
15. Si usted está recibiendo tratamiento hospitalario recientemente, o tiene un historial médico pasado, por favor consulte a su médico antes de usar.
16. Este producto es un instrumento de belleza facial, por favor no lo utilice para otras partes u otros propósitos de tratamiento.

Prueba cutánea previa

Cuando utilice este producto o un producto para el cuidado de la piel por primera vez, asegúrese de comprobar previamente la compatibilidad del producto con su piel.


1. Limpie la piel, lave el interior del brazo con jabón y séquelo con una toalla, etc.
2. Aplique productos para el cuidado de la piel o agua en la parte interior de la muñeca y utilice el producto en modo RM durante 5 minutos.

Nota: Para evitar problemas en la piel, asegúrese de realizar una prueba con antelación. Si se producen condiciones anormales como sarpullido, picor e irritación en el lugar de la prueba, detenga la prueba inmediatamente y suspenda el uso del instrumento.

Método de uso recomendado

Modo RM:

1. Deslice desde la barbilla a lo largo del contorno facial hasta la parte posterior de la oreja, luego a través de la glándula subauricular, deslice por el cuello.
2. Deslice desde la punta de la barbilla hasta la sien a lo largo del contorno facial, y luego deslice desde la nariz hasta la sien a través de la mejilla.
3. Levante desde las cejas hasta el nacimiento del cabello y deslice de abajo hacia arriba para su cuidado.
4. Por favor, siga empujando lentamente y evite permanecer en la misma parte continuamente.
5. Si siente que la loción de belleza está seca, puede aplicar un poco más.

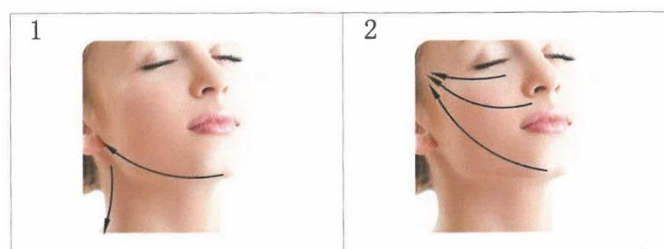


VENTAJAS:

1. La combinación de corriente de pulso de liberación intermitente, electroporación de ultra pulso, ondas de frecuencia media y alta, y LED pueden mejorar eficientemente el cuidado de la piel en un corto período de tiempo.
2. Utilice el modo RM 1-2 veces a la semana, reduzca la frecuencia de uso adecuadamente para la piel sensible.
3. Utilice con tónico, loción y/o esencia, aplicar el tónico diario o la loción uniformemente sobre la piel, no usar este equipo en seco.

Modo RE:

1. Aplique gel u otros productos de cuidado en la cara o el cabezal del instrumento, y aplicarlo en la cara con un movimiento circular de abajo hacia arriba.
2. Utilice el método lifting, desde la comisura de los labios hasta los pómulos, y realice un masaje lifting de abajo hacia arriba.
3. Con la crema para el contorno de ojos o la esencia para el contorno de ojos, utilice una técnica de presión en forma de puntos, y masajee suavemente el cabezal de masaje desde la esquina interna del ojo hasta el final del ojo, y permanezca en cada punto durante 2 segundos para reducir la fatiga y favorecer la absorción.
4. Uso repetido en la secuencia de presionar-dejar-mover.
5. Por favor, siga presionando lentamente y evite permanecer en la misma parte continuamente.
6. Si siente que el tónico de belleza está seco, puede aplicar un poco más.

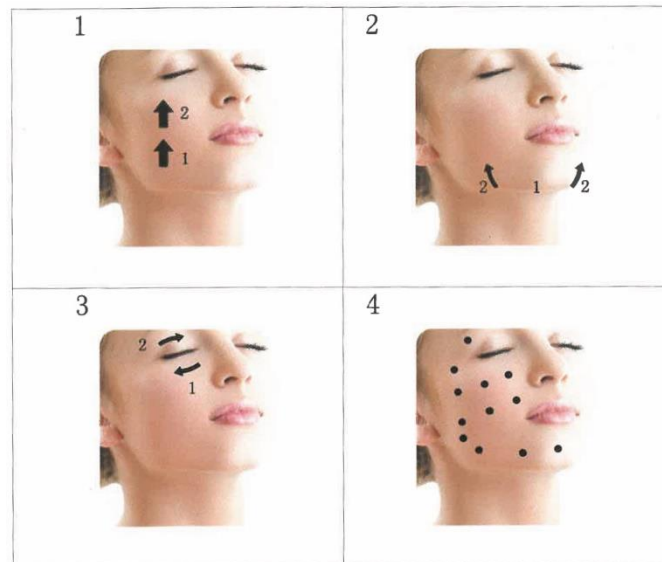

VENTAJAS:

1. A través de la combinación de micro-corriente, radiofrecuencia y LED, mientras calienta la piel, puede realizar eficientemente el cuidado de los músculos faciales.

2. El modo RE se puede utilizar una vez al día, el número de veces de uso se puede reducir adecuadamente para la piel sensible.
3. Utilizar con tónico, loción y esencia, aplicar el tónico diario o loción uniformemente sobre la piel, no usar este equipo en seco.

Parámetros del producto

1. Nombre del producto: Instrumento de belleza de RF multipolar.
2. Modelo del producto: ZM113
3. Tamaño del producto: 162*38*38mm.
4. Peso neto del producto: 195g.
5. Tensión/corriente de salida: DC5V = 1A.
6. Potencia nominal: 9W.
7. Tensión nominal/capacidad nominal: 3,7V/2000mAH.
8. Tiempo de carga: unas 3 horas.
9. Engranaje de resistencia: 5 marchas.
10. Norma de ejecución: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008.