

Dispositivo electrónico contra la picazón de insectos.

Manual de instrucciones.



Por favor, guarde este manual en un lugar seguro para futuras comprobaciones.

Contiene


1. In instrumento antipruriginoso de pulso de calor.
2. Un cable de carga Tipo-C.
3. Un manual de usuario.

Descripción del producto

Este producto adopta la tecnología de pulso de calor para infiltrar uniformemente el calor calmante proporcionado por el colector microcristalino en la piel mordida, complementado por el masaje de vibración del motor lineal para aliviar el picor.

Control preciso de la temperatura, hay dos temperaturas ajustables que son 40°C y 50°C, utiliza la forma física para aliviar el picor, sin residuos químicos. Es adecuado para la irritación de la piel, enrojecimiento e hinchazón después de ser picado por los mosquitos. Puede ser utilizado por todo tipo de personas, incluidos niños (mayores de 1 año) y mujeres embarazadas; puede utilizarse unas 100 veces con una carga completa.

Detalles del producto

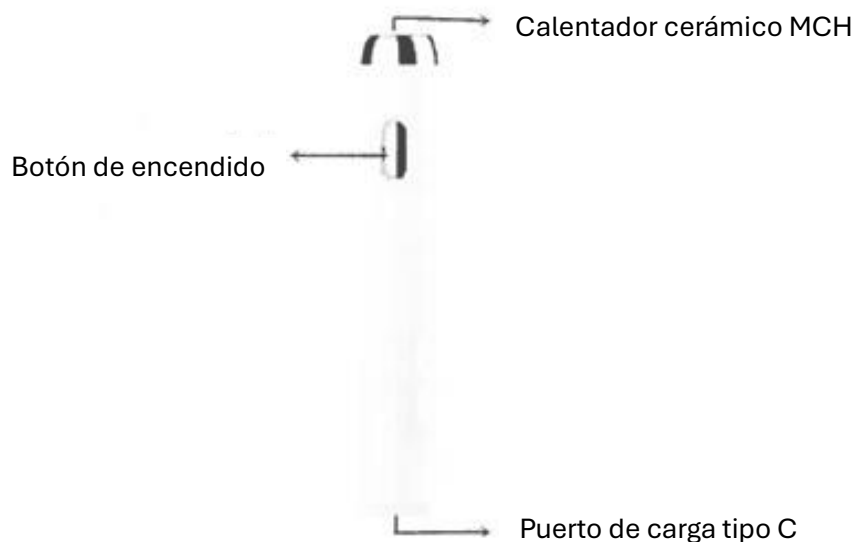

Pasos de uso

Abra la caja de embalaje, saque el cable de carga Tipo-C y cargue el producto por completo; la luz indicadora blanca está parpadeando cuando se está cargando, y la luz indicadora blanca dejará de parpadear cuando está lleno. Está prohibido utilizarlo durante la carga.

1. En primer lugar, utilice la estructura en cruz patentada del stick antipicor para presionar la parte mordida o con picor.
2. Pulse el interruptor de encendido para seleccionar el nivel de temperatura correspondiente. Se recomienda seleccionar 50°C para adultos (1 nivel, pulsar una vez para soltar, y la luz indicadora será blanca), y a los bebés y niños pequeños se les recomienda seleccionar 40°C (2 niveles, pulsar dos veces seguidas) y soltar de nuevo, el estado del indicador es luz blanca parpadeando)
3. Después de seleccionar el rango de temperatura correspondiente, coloque el cabezal cerámico de fisioterapia MCH cerca de la zona donde picó el mosquito, y después de 20 segundos, el programa de picor se apagará automáticamente;

Nota: Si el picor se ha aliviado o la temperatura es demasiado alta durante el proceso, puede detenerse a mitad de camino; Si tras finalizar su uso no se ha aliviado el picor, se pueden repetir los pasos.

Precauciones

1. El tacto será diferente si lo prueba sobre piel normal y sobre la zona de la piel mordida por los mosquitos, pero es normal.
2. No lo use en heridas, ojos y áreas circundantes, no lo use en áreas sensibles o delgadas de la piel, no lo use en la piel mojada, seque bien antes de usar.
3. Las personas con mala circulación sanguínea, alergias de la piel, entumecimiento o enfermedades de la piel, y los que son lentos a la temperatura, por favor no lo use.
4. Este producto no puede tratar o tratar las picaduras de insectos o reacciones alérgicas después de las picaduras.
5. La cabeza de cerámica MCH de este producto se puede limpiar con alcohol, no con agua. Por favor, preste atención a la limpieza e higiene cuando lo utilice.