

Instrumento para succionar puntos negros – X17



Manual de instrucciones

Para evitar daños causados por un uso incorrecto, recomendamos leer detalladamente este manual antes de usar este instrumento y conservarlo para futuras consultas.

Principio del dispositivo absorbente de puntos negros X17

Este instrumento forma un circuito de vacío a través de la presión negativa del vacío, el cabezal de succión de pista de cuatro esquinas especialmente diseñado actúa directamente sobre la piel manteniendo en contacto burbujas ultrafinas durante mucho tiempo, promoviendo un efecto de barrido. Las burbujas ultrafinas se combinan con un efecto de absorción en un estado seguro e indoloro, limpiando así, profundamente la cara, eliminando los queratinocitos envejecidos, reduciendo la grasa, así como también eliminando por completo diversas impurezas, ácaros y residuos del embudo del folículo piloso, mientras que incorpora nutrientes para proporcionar un estado más saludable a la piel. Su piel quedará más humectada, delicada y brillante.

Parámetros del producto

Nombre: Instrumento para succionar puntos negros con micro-burbujas

Modelo: X17

Peso neto: 165 gr.

Tensión nominal: 3,7V

Potencia nominal: 1,5W

Tensión de carga: 5V

Tipo de corriente: Corriente continua


Tamaño del producto: 218 x 51 x 66 mm

Contenido del paquete: Instrumento x1, Cabezales de succión x6, Cable de carga x1, Tanque de agua x2

Tipo de piel aplicable: El instrumento es adecuado para todo tipo de piel (Cuando lo use con alguna loción tenga presente utilizar la que más se adecúe a sus necesidades específicas)

Beneficios: Limpia profundamente la piel, elimina puntos negros / acné y puntos blancos, elimina maquillaje y aceite, hidrata.

Descripción del producto:

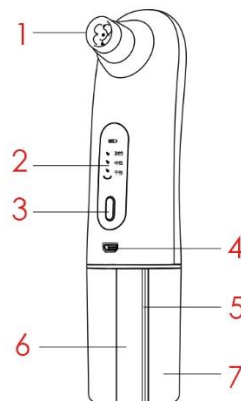

1. Cabezal, 2. Indicadores de modo, 3. Botón encendido/cambio de marcha, 4. Puerto de carga USB, 5. Sonda, 6. Tanque de agua limpia, 7. Tanque de agua residual.

Recomendaciones:

1. Hay 6 tipos de cabezales de succión, el cabezal pequeño es adecuado para la nariz y pliegues pequeños del rostro, el cabezal mas grande es adecuado para partes mas amplias como las mejillas o frente, tenga en consideración utilizar el cabezal mas adecuado a la zona de la piel que vaya a tratar.

2. Tiene 3 niveles de intensidad de succión, escoja el nivel de acuerdo con la sensación que sea confortable para su piel.

3. Cuando el instrumento esté encendido y operando, está prohibido agitarlo o colocarlo boca abajo, el ángulo debe ser siempre menor a 45°.

4. Utilice y conserve el cable de carga adecuadamente, no lo doble de más ni coloque objetos de peso sobre él.

5. Durante la carga la luz indicadora parpadeará y cuando el instrumento esté totalmente cargado permanecerá encendida. Si nota cualquier anomalía, corte inmediatamente la fuente de alimentación.

Instrucciones:

1. Se recomienda que después de limpiar el rostro con agua tibia, coloque una toalla caliente sobre la nariz unos 2-3 minutos para abrir los poros.
2. Agregue aproximadamente 2 tercios de agua limpia al tanque de agua, no exceda del nivel recomendado y coloque nuevamente el tanque de agua en el fuselaje de forma vertical.
3. Seleccione e instale el cabezal de succión que se ajuste a su necesidad, presione prolongadamente el botón interruptor para encender el instrumento, seleccione el nivel de fuerza adecuado a su necesidad y tipo de piel. Se recomienda usar primero un cabezal redondo pequeño y un nivel de intensidad bajo. Tenga cuidado de no permanecer mas de dos segundos operando en una misma zona para evitar lastimarse la piel, debe realizar movimientos suaves y constantes, desplazándose por la superficie del rostro.
4. La distancia entre el deslizamiento y la elevación debe ser de 1 a 2 cm cada vez.
5. Tenga atención a las marcas de agua después de deslizarse.
6. Después de usar este producto, el enrojecimiento de la piel puede ser una reacción normal y debería desaparecer tras unos 5 a 10 minutos


NOTA: Antes de usarlo por primera vez se recomienda realizar una prueba preliminar en una pequeña área al dorso de la mano, así comprobar que el cabezal o el nivel de fuerza de succión no le lastimará la piel; evite daños y marcas por exceso de succión.

Método de desmontaje del tanque de agua:

Levante la maquina verticalmente a 90°, sostenga firmemente el cuerpo del instrumento con una mano y el tanque de agua con la otra, realizando movimientos de izquierda a derecha para aflojar y luego tire hacia abajo, saque el tanque de agua suavemente hacia abajo y coloque el agua necesaria.

Método de instalación del tanque de agua:

Levante la maquina verticalmente a 90°, sostenga firmemente el cuerpo del instrumento con una mano y alinee el tanque de agua con las fijaciones del cuerpo, gírelo hasta el final y presione suavemente hacia adentro.

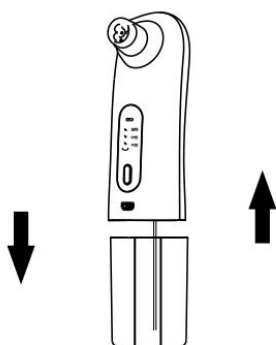

Cosas a tener en cuenta antes de usar:

1. Queda prohibido el uso para un distinto al original.
2. Elija el cabezal y el nivel de intensidad adecuado cuando lo use para evitar daños en la piel.
3. El uso excesivo puede dañar la piel, si siente alguna incomodidad o dolor, suspenda el uso inmediatamente.
4. Se recomienda utilizar el instrumento con algún líquido especial para el tratamiento y extracción de puntos negros, así como también se recomienda no usar este instrumento más de una vez por semana.
5. Cuando utilice productos faciales o lociones para el cuidado de la piel, primero asegúrese que son los adecuados para su tipo de piel específica y así evitar hacerse daño.
6. Está prohibido almacenar el equipo en sitios de mucha humedad o calor, lugares donde se almacenen fuegos artificiales o sustancias inflamables.
7. Las personas que sufren enfermedades de la piel, casos severos de acné o que acaban de someterse a alguna cirugía deben consultar al dermatólogo antes de empezar cualquier tratamiento con este equipo.
8. Cuando utilice este producto puede notar un enrojecimiento el cual puede ser producto de un uso y ajuste de intensidad muy fuerte, ajuste al nivel adecuado a la sensibilidad de su piel.
9. Si descubre alguna anomalía o daño en este equipo deje de usarlo inmediatamente.
10. No cargue este equipo por mucho tiempo sin supervisión, el tiempo de carga no debe exceder a las 12 horas. Si no usará este equipo durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez cada 6 meses para evitar el daño de la batería.
11. No desarme ni intente reemplazar la batería usted mismo, si descubre que la batería se ha dañado o tiene alguna fuga, suspenda el uso y comuníquese con el servicio postventa, el desecho de la batería de este equipo se debe gestionar según la normativa vigente de gestión de residuos de su país.
12. Se recomienda cargar, usar y almacenar este producto en un ambiente de -10 a 40° C.

Advertencias:

1. Después de utilizar este producto guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y evitando la luz solar directa.
2. Queda prohibido el uso, mantenimiento o almacenaje por niños o personas discapacitadas mentalmente sin la supervisión directa de un tutor o adulto responsable.
3. Está prohibido cargar en ambientes húmedos.
4. No se permite que niños jueguen con este instrumento.
5. Antes de cargar este producto, asegúrese de haberlo apagado.

6. Limpie el agua y otros productos de la carcasa del instrumento antes de encenderlo para evitar que entren al cuerpo y puedan dañarlo.
7. Este producto no debe usarse en áreas de la piel que hayan sido sometidas a cirugías cosméticas de la piel o rinoplastia.
8. Este producto no es resistente al agua, no lo lave para evitar daños, límpielo con un paño seco de ser necesario.
9. Si el cable de carga se daña, éste debe ser reemplazado por un cable original, acuda solo a distribuidores y tiendas autorizadas.
10. Queda prohibida el desmontaje o reparación por personal técnico no autorizado, evite peligros.
11. No arroje este producto al fuego o al agua par evitar cortocircuitos u otros peligros impredecibles.
12. No golpee ni deje caer este producto, si el producto se daña debido a una colisión o caída déjelo de usarlo inmediatamente y evite así, peligros y posibles daños a su piel debido a un mal funcionamiento.
13. No arroje la batería al fuego para evitar explosiones.
14. No cortocircuite la batería para evitar que se queme y provoque un incendio.
15. A menos que quiera desecharlo, no intente desmontar el equipo, puede ocasionar daños y afectar el funcionamiento del instrumento.
16. Antes de retirar la batería para desecharla, asegúrese que debe estar desconectada la fuente de alimentación y que la batería debe estar totalmente agotada.