


# Rodillo masajeador 3D – G1

## Método de uso

### (Método básico de sujeción con la mano)


- Sujete la parte más gruesa en la palma de la mano
- Tenga cuidado de no cubrir el panel solar

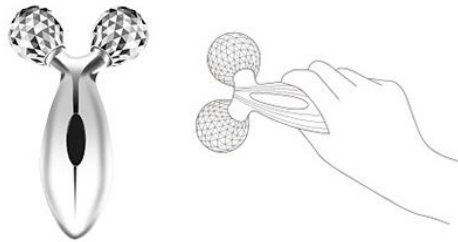

### (Método del rodillo)

- Pase suavemente el rodillo por la parte blanda de la piel hacia delante y hacia atrás siguiendo las líneas de la cara y el cuerpo
- Puede ajustar el ángulo del mango para ajustar la fuerza del rodillo para levantar la piel


#### Empuje el rodillo hacia delante

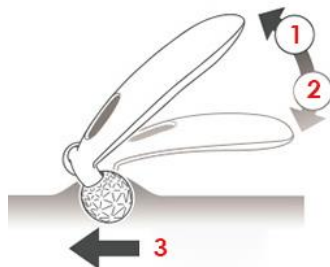

1. Fuerte, 2. Débil, 3. Dirección del masaje

Levante el mango lentamente para confirmar la fuerza de elevación

#### Tire del rodillo hacia atrás

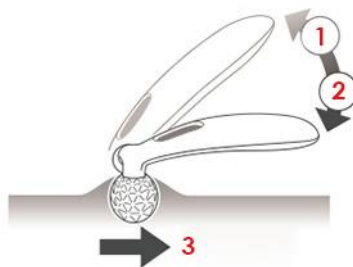

1. Débil, 2. Fuerte, 3. Dirección del masaje

Baje el mango lentamente para confirmar la fuerza de elevación



### **1. Doble Rodillo**

Utilice doble rodillo de drenaje para reproducir el "amasado" con movimientos complejos de las técnicas profesionales para compactar la piel.

### **2. Panel solar**

A través del panel solar en el mango se absorbe la luz y se produce un gran número de "micro-corrientes".

### **3. Arco mango**

Arco mango, masaje amasado por todos lados, puro y sin impurezas.

## **Precauciones antes de su uso**

1. Cuando utilice este producto, por favor, quítese los accesorios como collar y pendientes.
2. Cuando utilice este producto, por favor enrolle su cabello o fjelo con una diadema, para evitar no enredar su cabello y el masajeador se desplace más suavemente. Utilice horquillas para el pelo corto.
3. Preste atención al pelo junto a las orejas para evitar que se enrede.
4. Para pieles secas o sensibles, se recomienda aplicar una pequeña cantidad de crema hidratante antes de utilizar el producto.
5. Limpie los productos con toallas limpias antes de usarlos. No utilizar en caso de alergias cutáneas o metálicas.

# Cómo utilizar

## 1. Cuidado facial



- Rodar de arriba abajo por el contorno de la cara para reafirmar la piel de la boca, mejillas y rostro.



- Enfoque el masaje siendo cuidadoso, evite sobre presionar.



- Agarre la empuñadura hacia arriba desde la nuca, hacia adelante y hacia atrás para desplazarse hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la nuca.

## 2. Cuidado del cuerpo



- Desplácese por el brazo para ayudar a eliminar la grasa, use alguna ropa cómoda y sin mangas.



- Desplácese por el centro del pecho hasta la axila, desde abajo hasta el medio del pecho, empuja y moldea el busto.



- Desplácese hacia arriba y hacia abajo, desde debajo de la cintura hasta la mitad para modelar la figura.



- Desplácese por dentro de los muslos, recuerde usar un short.



- Desde la axila hasta la mitad del pecho, se puede enrollar hacia adelante y hacia atrás para el aumento de pecho y el modelado.