


## Cepillo para el cuero cabelludo

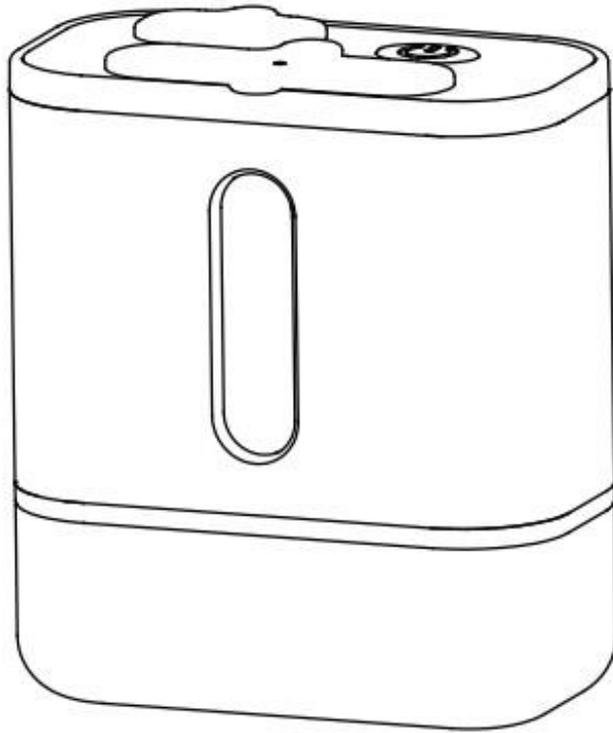


Antes de usar este producto, lea este manual atentamente.

### Características del producto

El recipiente de almacenamiento de líquidos del cepillo para el cuero cabelludo está fabricado con material de PC de protección medioambiental de alta calidad níquel de alta calidad que integran dientes de cuerno, drenaje de líquido y luz roja.


1. Dientes en forma de cuerno: Utilice el peine de cuerno varias veces al día para masajear el cerebro, el cuero cabelludo y los nervios de la cabeza, promover la circulación sanguínea, relajar tensión y fatiga papel del estado de ánimo.
2. Luz roja: 610nm-630nm luz roja va profundamente en la dermis, calmar el cuero cabelludo y la promoción de la piel. El cuero cabelludo absorbe el líquido medicina y mejora el efecto del crecimiento del cabello.
3. IPX5 impermeable, fácil de limpiar.

## Estructura del producto

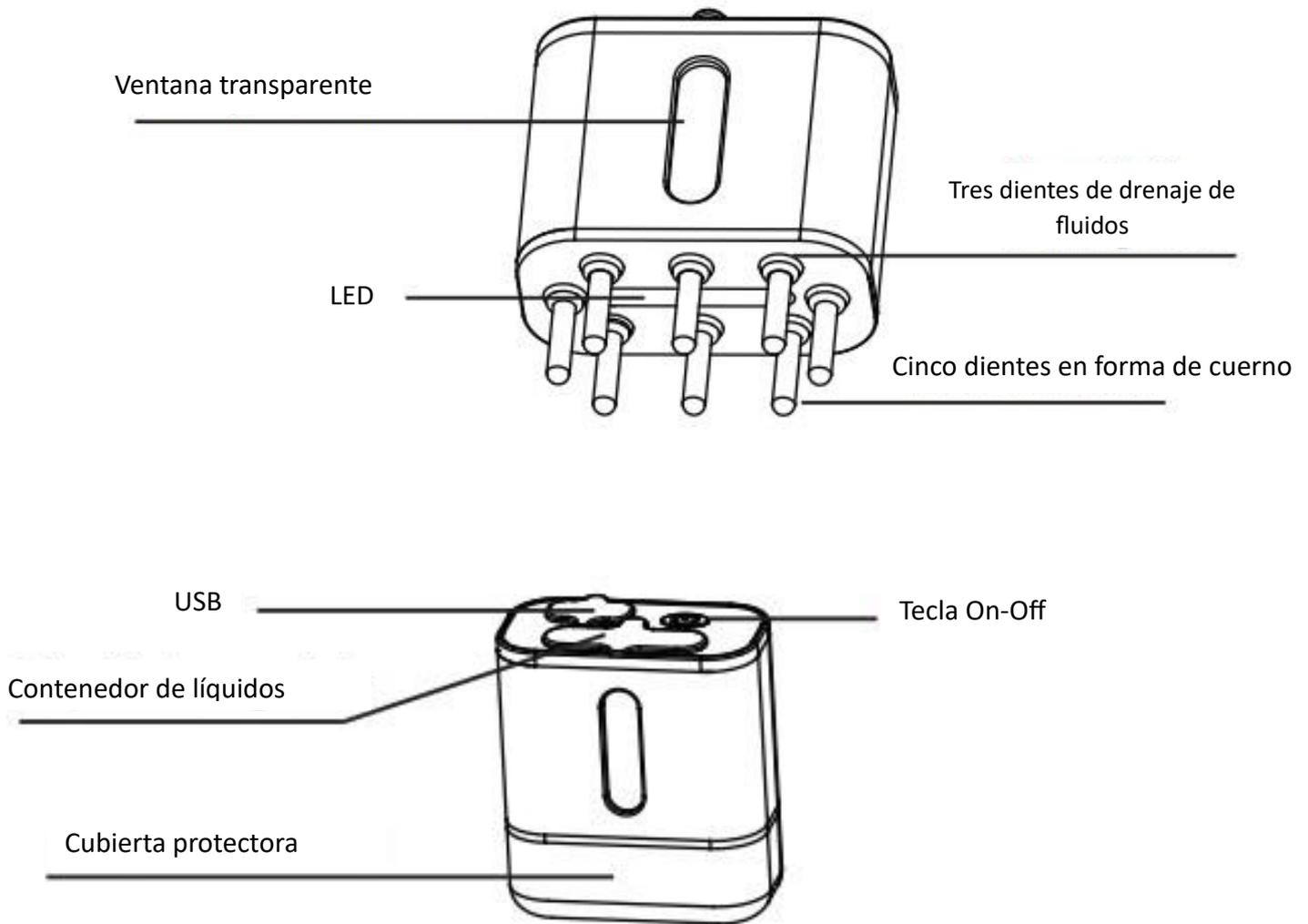

1. En el estado de apagado, mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos segundos. Una vez encendido el LED se iluminará en rojo.
2. Cuando la carga es baja, la luz roja del cabezal parpadea rápidamente, cuando se está cargando, la luz roja parpadea lentamente y una vez la batería está llena la luz roja se apagará.


## Método de uso

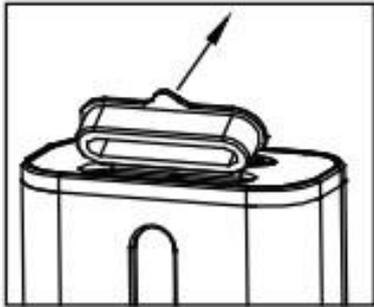

Abir el tapón de silicona hacia arriba, vierta la cantidad adecuada de medicamento líquido, no tire del tapón vigorosamente para evitar daños.

Cubra el

tapón de  
silicona

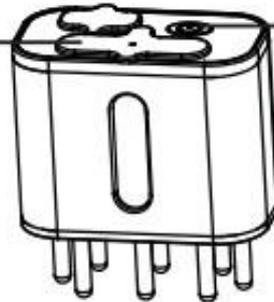

Encender  
y usar

Después de añadir el medicamento líquido tapa el tapón de silicona, pulsa el botón de encendido y empezar a utilizar la fuente de luz cuando se encienda la luz roja.

## Asuntos que requieren atención

1. Después de añadir líquido, cierre la tapa a tiempo y colóquela sobre la cubierta de protección del peine.
2. Después del uso, limpie a tiempo el recipiente de almacenamiento de líquido del fuselaje. Si no se limpia a tiempo, el líquido puede evaporarse fácilmente y cristalizarse en contacto con el aire durante mucho tiempo, lo que resulta en el bloqueo de los dientes de guía de líquido y afectando el efecto de descarga de líquido.
3. No golpee los dientes de la guía de líquido con objetos duros, la deformación de los dientes de la guía de líquido afectará al efecto de descarga del líquido o causará daños irreversibles.
4. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.