


INSTRUMENTO DE BELLEZA DE COLÁGENO BP-16P

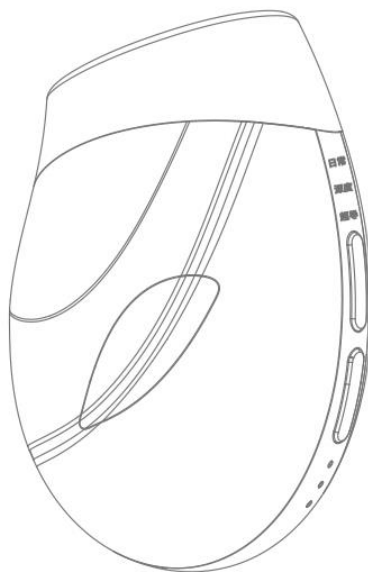

Manual de instrucciones

La compañía se esforzará continuamente por mejorar el rendimiento del producto y garantizar la exactitud del manual. Debido a actualizaciones de la versión del producto, algunos contenidos de este manual pueden ser diferentes de su producto en físico. La empresa se reserva el derecho de modificar este manual.

Por favor, lea y conserve este manual cuidadosamente antes de su uso.

Precauciones relacionadas con las instrucciones

- Gracias por adquirir nuestros productos.
- Las instrucciones le garantizan un uso seguro del producto. Si necesita prestar o regalar el instrumento a otras personas, adjunte este manual.

Uso correcto y seguro

AVISO

Para evitar accidentes o molestias físicas, evite utilizar este aparato si utiliza las siguientes máquinas electrónicas médicas. La acción incorrecta de la máquina electrónica médica puede causar accidentes o malestar físico:

- Máquinas electrónicas médicas implantadas, como marcapasos cardíacos.
- Aparatos electrónicos de mantenimiento de la vida, como corazón o pulmones artificiales.
- Máquinas médicas electrónicas montadas, como un escáner ECG o un gotero.

No debe ser usado por personas con las siguientes condiciones:

- Cardiopatías, neoplasias o tensión arterial anormal.
- Que padezcan enfermedades infecciosas o enfermedades agudas acompañadas de fiebre.
- Durante un tratamiento dental
- Pacientes con inmunidad debilitada o inmunosuprimidas debido a enfermedades de inmunodeficiencia como el SIDA.
- Trastornos hemofílicos o trastornos hemorrágicos A, diabetes A o neuralgia facial.
- Personas con percepción al dolor anormal.
- Pie de cangrejo, melanodermia facial, hipersensibilidad a la luz, anomalías pigmentarias.
- Uso prolongado de hormonas esteroideas o por disfunción hepática causada por dilatación microvascular.
- Personas con alergias, dermatitis atópica, enfermedades cutáneas y piel sensible.
- Personas con antecedentes de epilepsia o molestias debidas al parpadeo de la luz.
- Las personas con secuelas en la cabeza o los ojos causadas por accidentes de tráfico.
- Personas que se hayan sometido a cirugía ocular. (Consulte a su médico antes de utilizar).
- Durante el embarazo, el periodo menstrual o la lactancia.

Uso correcto y seguro

No deben usarlo:

- Niños pequeños o personas incapaces de expresar su propia voluntad.
- Personas con olor a alcohol y resaca.
- Personas que toman medicamentos que inducen somnolencia.
- Que se sientan extremadamente cansado o en malas condiciones físicas.
- Con problemas cutáneos como manchas e inflamaciones causadas por fibras químicas.
- Personas que tienen o han tenido dermatitis debido a los cosméticos.
- Personas que hayan recibido recientemente un tratamiento químico en salones de cuidado de la piel, etc.
- Que tengan problemas cutáneos después de utilizar el instrumento.

No utilizar en las siguientes partes:

- Fuera del lugar designado.
- Zonas mucosas alrededor del corazón, globos oculares, párpados superiores, labios o boca.
- Manchas patológicas, lunares o verrugas víricas.

- Hormigueo e inflamación de la piel causados por una exposición excesiva al sol.
- En lugares de manchas patológicas debido a picores, fiebre, estimulación física, etc.
- Las partes que hayan sido sometidas a cirugía, pubis, ano, alrededor de la nuez de Adán, orejas.
- Las zonas que hayan sido depiladas o afeitadas recientemente.
- Si está recibiendo tratamiento médico, consulte a su médico antes de usarlo.

Precauciones antes de usar

PRECAUCIÓN

- No lo utilice con otros aparatos de belleza.
- No lo utilice para ningún otro fin que no sea la belleza, y no lo utilice en un estado dañado o defectuoso.
- Este instrumento de belleza es un instrumento de cuidado especial para la belleza. No lo utilice con fines terapéuticos ni de otro tipo.
- No mire ni observe directamente la luz LED.
- No utilizar en la misma zona de la piel de forma continuada, para no dañar la piel ni causar problemas cutáneos como infección, inflamación, hemorragia, pigmentación o empeorar los síntomas.
- No utilizar en animales domésticos.
- No utilizar ni guardar en el cuarto de baño ni en lugares con mucha humedad.
- No lo coloque en lugares húmedos con agua (sobre la encimera, etc.).
- No toque el aparato con las manos mojadas. (Puede causar descargas eléctricas, lesiones)
- No lo utilice cerca de agua, aceites volátiles, removedores químicos, aerosoles y otros materiales inflamables.
- No utilice cables USB que no sean los originales.
- No conecte otros instrumentos con cables USB dedicados (Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o el fallo del instrumento)
- No dañe el cable de conexión. Dañar, doblar tirar, retorcer, colocar objetos pesados encima, sujetar el cableado, etc. Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un fallo del instrumento)
- No comparta la regleta con otros aparatos, puede provocar calor o fuego.

ADVERTENCIAS

- Sólo aplicable a enchufes domésticos
- Asegúrese de que el adaptador de CA y el enchufe estén bien conectados.

- El aparato puede calentarse durante el uso. Se trata de un fenómeno normal y no hay ningún problema de seguridad.
- No conecte el aparato a productos metálicos o eléctricos (teléfono móvil, TV, etc.).
- No desmonte, modifique ni repare el aparato usted mismo. Para reparaciones, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió.
- Asegúrese de quitarse los accesorios metálicos, gafas o lentes de contacto antes de utilizar este instrumento.
- Accesorios metálicos pendientes, collares, relojes, etc.
- Para usuarios primerizos o no aclimatados, por favor ajuste la intensidad al uso más primario (nivel 1).
- No presione la guía sobre la piel seca, ni la mantenga sobre alguna parte durante más de 1 minuto para evitar problemas en la piel.
- Cuando cuide la piel alrededor de los ojos, por favor cierre los ojos antes de aplicar.
- Si siente algún dolor o anomalía en la piel o el cuerpo durante el uso, por favor deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.
- No moje, rocíe ni vierta líquido sobre el instrumento. (Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o el fallo del instrumento)

Precauciones antes del uso

AVISO

Lea atentamente los siguientes puntos antes de utilizar este instrumento.

Cuando utilice este producto o un producto para el cuidado de la piel por primera vez, asegúrese de comprobar previamente la idoneidad del producto para la piel.

1. Limpie la piel: lave el interior del brazo con jabón y límpielo con una toalla.
2. Aplique el producto para el cuidado de la piel o agua en el interior de la muñeca y el producto en modo diario durante 4 minutos.

Nota: Para evitar problemas en la piel, asegúrese de realizar la prueba con antelación. si se producen condiciones anormales como erupciones cutáneas, enrojecimiento, irritación, etc. en el lugar de la prueba, interrumpa la prueba inmediatamente y deje de utilizar el instrumento.

Precauciones de mantenimiento

ADVERTENCIA

- No instale piezas metálicas ni las espolvoree en el enchufe. Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un fallo del instrumento.
- No deje caer ni golpee el instrumento.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

No lo guarde en los siguientes lugares:

- Lugares con luz solar directa, mucha humedad, lugar con mucho polvo.
- Lugares con altas temperaturas o temperaturas extremas como bajo cero, coches con sol caliente, etc.
- Lugares con riesgo de incendio o expuestos al viento y la lluvia.
- Productos químicos, lugares que produzcan gases o vibraciones violentas.
- Cerca de equipos de calefacción o fuentes de calor, cerca de sustancias magnéticas.

Método de limpieza:

- Limpie con un paño suave empapado en agua y escurrido. Si utiliza un paño áspero para limpiar el instrumento puede rayarlo o reducir su funcionamiento
- No utilice disolventes alcalinos, alcohol, aceites volátiles y otros disolventes, agua caliente, máquinas de limpieza farmacéutica.

Comprobar antes de usar

- Si la máquina no se ha utilizado durante más de medio año, por favor asegúrese de comprobar si el instrumento tiene alguna anomalía antes de su uso. (Si la luz LED está normalmente apagada, si hay daños por grietas) Si se utiliza en estado de avería puede causar accidentes.

Introducción del producto

El instrumento de la belleza del colágeno está diseñado para un cuidado diario y profundo mediante sus tres modos de la belleza: luz roja, RF, EMS; tres funciones de la belleza en uno que lo convierte en todo un instrumento multifuncional de la belleza.

Introducción de funciones

1. La luz roja, de longitud de onda de 630nm se conoce como (luz bioactiva) es utilizada para mejorar la actividad celular, acelerar la regeneración celular y mejorar la formación de colágeno.
2. La RF hace que las moléculas de la piel se muevan a gran velocidad para generar energía térmica y absorbe mucho calor para sintetizar colágeno, eliminando eficazmente las arrugas y restaurando la elasticidad.
3. La EMS estimula el cerebro para que produzca movimientos musculares involuntarios, incitando al músculo a presionar, lo que hace que la piel sea más elástica.
4. EMS conduce micro-corriente a la base del músculo a través de la guía de inducción, promoviendo el crecimiento de colágeno y mejorando el contorno.

Modo de introducción

Modo superconductor = Fuerte micro-corriente EMS + luz roja se puede utilizar cuando se aplica la máscara y gel o loción, ayuda a los nutrientes de cuidado de la piel mejor absorbido por la piel.)


Modo diario = RF débil + microcorriente EMS + luz roja

Modo profundo = RF fuerte + luz roja

Encendido y apagado

1. Pulse prolongadamente el botón del interruptor durante unos 2 segundos para encenderlo, se encenderá el indicador de modo superconductor predeterminado y se encenderá la marcha.
2. Después del arranque, entre en el estado de trabajo, toque continuamente para cambiar entre Superconductor/Profundo/diario.
3. Las tres luces indicadoras del modo parpadearán sucesivamente durante la carga, y las tres luces se mantendrán encendidas cuando esté completamente cargado.
4. Cuando la batería está baja, los tres indicadores de marcha parpadean juntos para indicar la necesidad de cargar.
5. Si no hay ninguna operación o inducción en 15 minutos, se apagará automáticamente, la función de entrar en el estado de carga no se puede utilizar. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y, a continuación, arranque normalmente.
6. La luz de modo y la luz de engranaje se apagarán, y la placa de control entrará en el estado de apagado.

Composición del producto

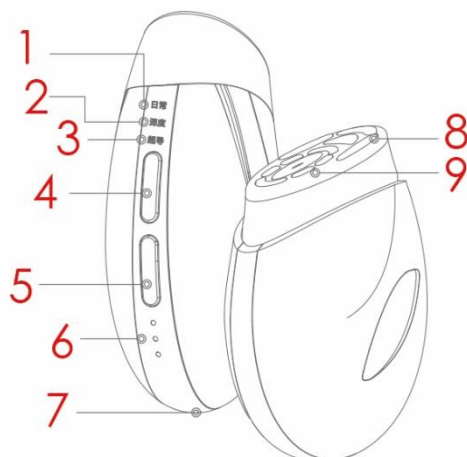

1. Indicador de modo diario, 2. Indicador de modo profundo, 3. Indicador de modo superconductor, 4. Tecla de apagado/ Interruptor de modo, 5. Tecla de marcha, 6. Indicador de marcha/ Luz de carga, 7. Puerto de carga, 8. Cabezal guía RF / EMS, 9. Área de luz roja.

Presentación del producto

Método de aplicación

Al utilizar este instrumento por primera vez, por favor asegúrese de que el producto en sí tiene carga, si no está cargado, por favor, cárguelo completamente y luego úselo (las funciones del equipo no se pueden utilizar durante la carga).

Modelo a elegir


1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos 2 segundos. El PAO de colágeno se enciende.
2. Pulse brevemente el botón para cambiar entre los modos disponibles: El modo superconductor es (microcorriente EMS fuerte + luz roja), el modo profundo es (RF RF fuerte + luz roja), y el modo diario es (RF RF débil + microcorriente EMS + luz roja).

Intensidad de selección

Cada marcha se divide en 3 niveles (3 indicadores, 1 luz en 1ª marcha, 2 luces en 2ª marcha, 3 luces en 3ª marcha).

Pulse la tecla de marcha para cambiar de marcha. Hay 3 posiciones de marcha en total. Pulse continuamente las posiciones de marcha para cambiar en la secuencia de 1-2-3-2-1.

Método de cuidado

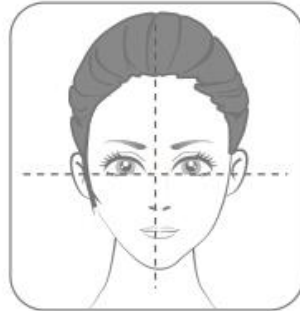

Para el cuidado de toda la cara, divida la cara en cuatro partes según la imagen y aplique y cuide en secuencia, en lugar de aplicarlo en toda la cara a la vez.

Cuidado previo

- Quítese los collares, anillos y otros accesorios, así como todos los objetos metálicos del cuerpo.
- Siga los procedimientos generales de desmaquillado y limpieza para eliminar los cosméticos, el sebo y la suciedad antes del cuidado.
- Aplique el gel en la zona de cuidado según el modo de uso.

Modelo de tratamiento superconductor


Cuando aplique la mascarilla o después de aplicar la loción para el cuidado de la piel en la zona a tratar, muévase lentamente y evite permanecer más de 3 segundos.

* Si siente que la loción para el cuidado de la piel facial es insuficiente durante el tratamiento, por favor añada más.

- Una dosis demasiado pequeña puede causar irritación de la piel y el efecto de cuidado no podrá desarrollarse plenamente.
- Durante el tratamiento, por favor ajuste el cabezal a la piel de forma que haga contacto completamente.
- Un cuidado excesivo causará carga en la piel. Evite utilizarla más de una vez al día.
- Limpie la superficie del cabezal con un paño suave o un pañuelo facial si la superficie de la guía está sucia y no es lisa.

* Evite utilizarla cuando se encuentre mal.

Secuencia de cuidado superconductor

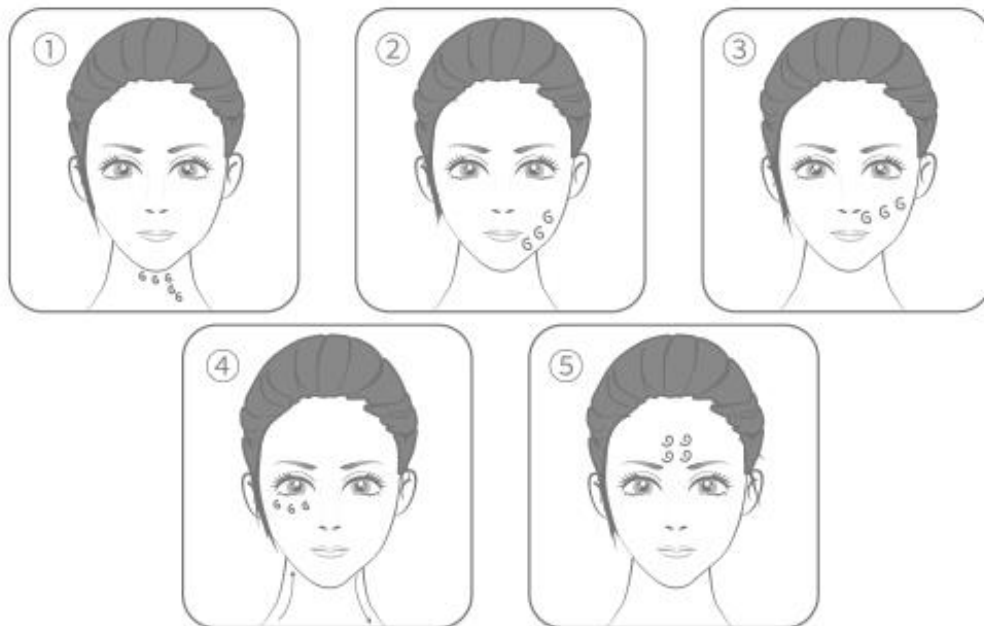

- Realice los pasos 1-5, 2-3 veces respectivamente.
- Cuide cada parte de la piel con el instrumento sólo durante unos 3 segundos en la secuencia que se muestra en la figura.
- Si considera que la cantidad de gel es insuficiente, añada más.

NOTA: No aplicar en mucosas, párpado superior, globo ocular, oído y manzana de Adán.

Cuidados posteriores

Después del tratamiento, puede masajear suavemente la piel para ayudar a que el gel que queda en la piel penetre y se absorba. Una vez finalizado el tratamiento, limpie el instrumento con un paño suave húmedo o una toalla facial para eliminar los restos de suciedad y, a continuación, limpie la humedad con un pañuelo facial seco.

Después del uso, pulse prolongadamente el botón de apagado para apagar, limpie la superficie de la máquina y guárdela.

Frecuencia de utilización

El modo superconductor es de dos funciones (fuerte micro-corriente EMS + luz roja), que se puede utilizar cada dos días por primera vez, y se puede utilizar dos veces por semana después de 2-3 meses.

Modelo de cuidado profundo

Por favor, aplique el gel en la zona después del tratamiento, muévase lentamente y evite permanecer más de 3 segundos.

* Por favor, añada gel adicional si se siente insuficiente durante el tratamiento.

- Una dosis demasiado pequeña puede causar irritación de la piel, y el efecto de cuidado no se puede desarrollar plenamente.


* Durante el tratamiento, por favor ajuste el cabezal a la piel de forma que haga contacto completamente.

* Un cuidado excesivo causará carga en la piel. Evite utilizarla más de una vez al día.

- Limpie la superficie de la guía con un paño suave o un pañuelo de papel si la superficie del cabezal esté sucia.

* Evite utilizarla si no se encuentra bien.

Secuencia de cuidado profundo

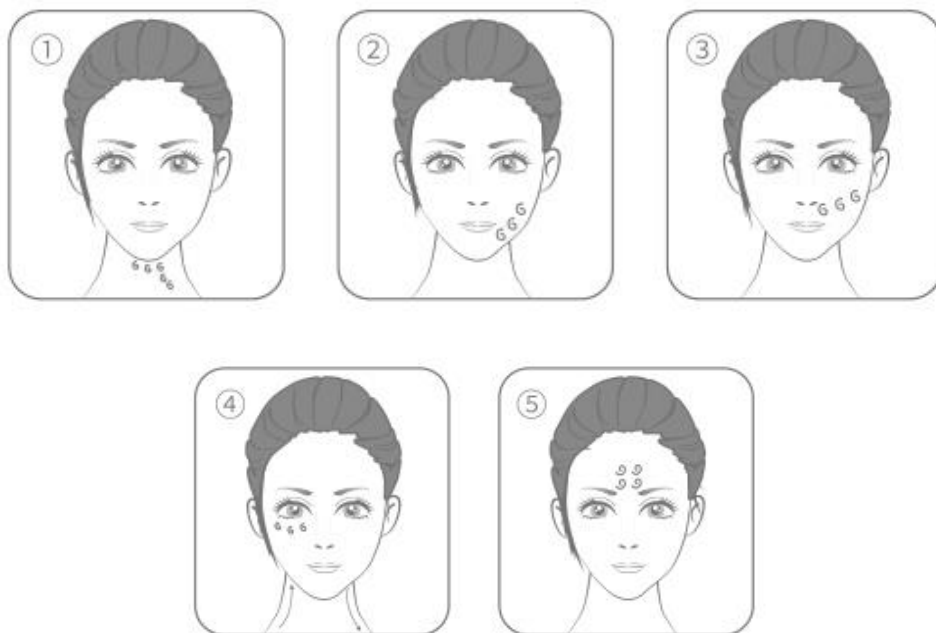

- Realice los pasos 1-5, 2-3 veces respectivamente.

- Cuide cada parte de la piel con el instrumento sólo durante unos 3 segundos en la secuencia que se muestra en la figura.

- Si considera que la cantidad de gel es insuficiente, añada más.

Cuidados posteriores

Después del tratamiento, masajee suavemente la piel para ayudar a que el gel que queda en la piel penetre y se absorba. Una vez finalizado el tratamiento, limpie el aparato con un paño suave húmedo o una toalla facial para eliminar los restos de suciedad y, a continuación, limpie la humedad con un pañuelo facial seco.

Después del uso, pulse prolongadamente el botón de apagado para apagar, y limpie la superficie de la máquina y guárdela.

Frecuencia de utilización

El modo profundo es (RF fuerte + Luz roja) dos funciones, la primera puede ser usada de forma inter diaria, después de 2-3 meses, puede ser usada un par de veces a la semana.

Modelo de cuidado diario

Aplicar gel a la zona de atención y luego tratar.

- * Por favor, añada gel adicional si se siente insuficiente durante el tratamiento.
- Una dosis demasiado pequeña puede causar irritación de la piel, y el efecto de cuidado no se puede desarrollar plenamente.
- * Durante el tratamiento, por favor ajuste el cabezal a la piel de forma que haga contacto completamente.
- * Un cuidado excesivo causará carga en la piel. Evite utilizarla más de una vez al día.
- * Durante el cuidado, si la superficie del cabezal está sucia y áspera, límpiela con un paño suave o papel facial.
- * Por favor, evite el uso en seco cuando el cuerpo no esté cómodo.

Secuencia de cuidado rutinario



- Desde la barbilla a lo largo del contorno de la cara, desliza por detrás de las orejas. Luego se desliza desde allí hasta el hombro.
- Deslízate desde la punta de la barbilla por el contorno de la cara hasta la sien. A continuación, desde la nariz, pasando por las mejillas, hasta la sien. Por último, deslízate desde la cabeza del ojo a lo largo del ojo hasta la sien.
- Desde las cejas hasta el nacimiento del cabello como desde abajo hacia arriba.

- Realice los pasos 1-3, 2-3 veces respectivamente.
- Por favor, muévase lentamente y evite permanecer en el mismo lugar continuamente.
- Si considera que la cantidad de gel es insuficiente, añada más.

Cuidados posteriores

- Después del tratamiento, masajee suavemente la piel para ayudar a que el gel que queda en la piel penetre y se absorba.
- Una vez finalizado el tratamiento, limpie el aparato con un paño suave húmedo o una toalla facial para eliminar los restos de suciedad y, a continuación, limpie la humedad con un pañuelo facial seco.
- Después del uso, pulse prolongadamente el botón de apagado 2S para apagar, la pantalla digital se apaga y la superficie de la máquina se limpia y se guarda.

Frecuencia de utilización

El modo diario tiene tres funciones (RF débil + microcorriente EMS + luz roja), que pueden utilizarse para el cuidado diario.

Estado normal: 3 veces a la semana; Estado sensible: una vez a la semana; Estado seco: dos veces a la semana; Estado graso: 3-4 veces por semana.