

# Instrumento de belleza de radiofrecuencia para limpieza y rejuvenecimiento.

## Manual de instrucciones.



### **Funciones principales del producto:**

1. El pulso intermitente de frecuencia media puede calmar la piel con alta intensidad, aumentar la tasa de introducciones de ingredientes para el cuidado de la piel e introducirlos directamente en las capas profundas de la piel.
2. La microcorriente EMS estimula el movimiento muscular, alivia la flacidez facial, levanta y tensa la piel, ayuda a dar forma de V al rostro.

3. La luz roja que irradia el producto, puede promover la circulación de la sangre en la zona, reduciendo así las arrugas faciales y mejorando la calidad de la piel del rostro.
4. La irradiación de luz azul en la cara puede inhibir el acné, regular la secreción de las glándulas sebáceas, promover la proliferación de colágeno de la piel, reducir los poros, etc.

### **Método de uso:**

1. El instrumento de belleza importado tiene dos modos de cuidado de la piel, “Modo 1: microcorriente EMS + luz roja” y “Modo 2: pulso intermitente central + luz azul”.
2. Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para encender el dispositivo. Una vez encendido, la luz indicadora de marcha se iluminará en blanco, en el modo 1.
3. Después de encenderlo, el modo predeterminado es 1, presiónelo brevemente para cambiar al modo 2. El botón superior sirve para seleccionar el siguiente nivel de intensidad, el nivel máximo es 3. Presione brevemente el botón hacia arriba para cambiar los niveles 1-2-3.
4. Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para apagar el dispositivo.

### **Cuestiones que requieren especial atención**


1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1.5 segundos para encender el dispositivo.
2. Durante el uso, los polos positivo y negativo del cabezal de masaje están en contacto con la piel para formar un bucle.
3. Este producto utiliza tecnología iónica de micro-corriente, por lo que una pequeña sensación de corriente es normal.
4. Cuando lo utilice, no permanezca en la misma zona durante más de 3 segundos para evitar molestias en la piel.
5. No lave el cuerpo del dispositivo con agua, ya que esto causará un mal funcionamiento del dispositivo. Por favor, límpielo con un paño seco o un paño suave humedecido con un poco de líquido jabonoso.
6. Cuando limpie el anillo de algodón, enjuáguelo con agua limpia.
7. No limpie la carrocería con soluciones corrosivas como alcohol, gasolina, quitaesmalte, etc., que podrían provocar fallos en el producto, grietas, decoloración de los accesorios, etc.
8. No utilizar en cirugía plástica facial ni en implantes metálicos subcutáneos. Por favor, utilice este producto bajo la supervisión de un médico durante el embarazo.
9. Limpie el cabezal de la guía con toallas de papel, no lo lave con agua y no toque objetos metálicos.
10. No lo coloque en un lugar húmedo, como un cuarto de baño, ya que podría provocar un cortocircuito.
11. Este instrumento ha sido probado en la cara y el vigor para prevenir pústulas y acné inflamatorio.

## Prueba cutánea previa


Cuando utilice éste o cualquier otro producto para el cuidado de la piel por primera vez, asegúrese de comprobar previamente la compatibilidad del producto con su piel.

1. Limpiar la piel: lavar el interior del brazo con jabón y secar con una toalla, etc.
2. Aplica productos para el cuidado de la piel o agua en la parte interior de la muñeca y utiliza el producto en modo hidratación durante 5 minutos.


## Método de uso recomendado




1. Limpieza ultrasónica: Después de limpiar la cara con agua limpia tras desmaquillarse, utilizando el modo de limpieza ultrasónica de este producto, coloque un disco de algodón en el cabezal de entrada, vierta la loción y el limpiador facial en el disco y limpie la cara con movimientos circulares.




2. Introducción nutritiva : Aplicar el gel u otros productos conductores para el cuidado de la piel sobre el rostro con agua o con el cabezal del instrumento, y aplicar sobre el rostro con movimientos circulares ascendentes.



3. Reafirmar el rostro en forma de V: utilizar el método lifting, desde la comisura de los labios hasta los pómulos, y dar un masaje lifting de abajo arriba.

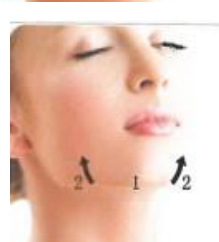

4. Rejuvenecimiento fotónico: Aplicar una delicada pasta sobre la piel del rostro, mover lentamente sobre el rostro, se puede combinar con una mascarilla u otros productos para el cuidado de la piel.



5. Revitalizar los ojos: con la crema o esencia para el contorno de ojos, utilizar una técnica de presión puntual, y el cabezal de masaje masajea suavemente la tensión desde el ángulo interno del ojo hasta el final del ojo, permaneciendo en cada punto durante 2 segundos para reducir la fatiga y favorecer la absorción.



6. Bolsa de hielo calmante: uso repetido en el siguiente orden: presionar - dejar - mover.