

**Producto de belleza**  
**Guía de inicio rápido**



**Gane un entendimiento más profundo del producto para un uso mejor:**

- Estructura del producto:



## Preparación para el cuidado de la piel usando un producto de belleza:



1) Por favor, remueva el maquillaje, limpie su cara y remueva sus pendientes u otros accesorios antes del uso.




2) Aplique una cantidad apropiada de gel a la zona de tratamiento.



3) Conéctelo, cuando el producto este conectado, presione el botón de encendido durante 1.5 para encenderlo.

Se encienden la luz del modo ocular y la luz de la marcha 1, el modo ocular (predeterminado) comienza a funcionar y se enciende el LED naranja del cabezal.

## Selección de modo:

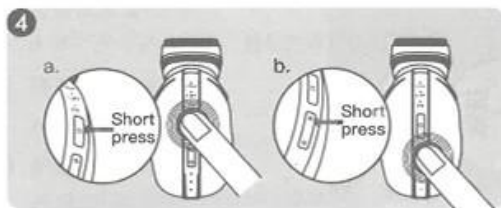

4) Presione el botón de cambio de modo y cuando se encienda la luz del modo se encienda y permanezca encendida por un tiempo, el producto entrará el modo de trabajo.


a) Cada vez que pulse el botón de cambio de modo, el modo cambiará siguiendo el siguiente ciclo:

EYE → V-Lift → STAMP → EYE

b) Cada vez que pulse el botón de cambio de marcha, la velocidad cambiará siguiendo el siguiente ciclo:

1 → 2 → 3 → 1

## Qué área de la cara cuidar:

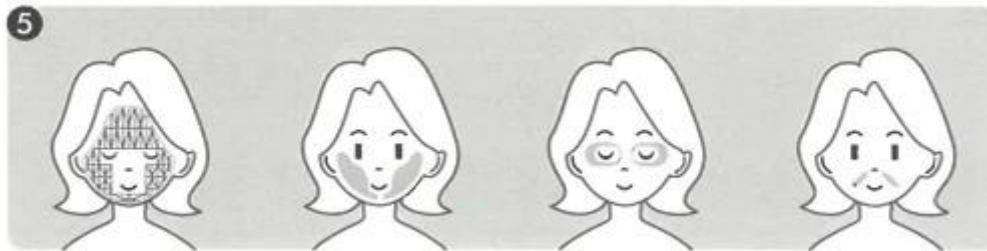

5) El cuidado es proporcionado a las siguientes áreas.

## Preguntas frecuentes:

P: ¿Puedo usarlo en el baño?

R: Este producto no es resistente al agua, no lo utilices en el baño.

P: ¿Calor en la piel después de usarlo?

R: Se debe a los efectos térmicos.

P: ¿La guía de uso no transmite calor?

R: Calor profundo en la piel gracias al efecto térmico.

P: ¿En qué consiste el aumento de la marcha?

R: Cuanto mayor sea la intensidad, más intensa será la sensación de fluidez eléctrica y de calor.

•Si lo utiliza por primera vez o no está acostumbrado, utilice la primera marcha.

P: ¿Puedo enjuagarlo con agua?

R: Este producto no es resistente al agua, no lo lave con agua, ya que podría provocar un fallo en el dispositivo.

P: ¿Qué pasa si me olvido de apagar el aparato?

R: Este producto se apagará automáticamente tras 15 minutos si no se utiliza ni se maneja.

P: ¿Puedo utilizar un aparato de belleza con maquillaje en la cara?

R: No. Antes de utilizarlo, es necesario desmaquillarse y limpiarse la cara para asegurarse de que esté libre de grasa y suciedad, de modo que la piel quede limpia y despejada.

P: ¿Cuál es la frecuencia y la duración de uso recomendadas?

R: Se recomienda utilizarlo entre 5 y 6 veces por semana, ajustando la frecuencia en función del estado de la piel.

Se recomienda utilizar el modo deseado por la mañana, antes de maquillarse, o por la noche, después de la limpieza. Para obtener mejores resultados en el cuidado de la piel, se recomienda utilizarlo entre 5 y 6 días a la semana, durante 6 a 10 minutos cada vez.

La combinación científica más recomendada es el uso del modo V-LIFT y el modo EYE (3-4 veces/semana), con un lifting y estiramiento intensos durante 10 minutos; el modo STAMP solo con mascarilla (1-4 veces/semana), tratamiento de todo el rostro durante 6 minutos.

\*Para evitar un cuidado excesivo y daños en la barrera cutánea, la duración máxima de cada uso no debe superar los 15 minutos (sin contar el tiempo de preparación, como la aplicación del gel).

Modelo de cuidados semanales con recomendaciones:

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
STAMP	VLift+EYE	STAMP	VLift+EYE	STAMP	VLift+EYE	Descanso

P: ¿Puedo llevar mi producto de belleza en un tren de alta velocidad o un avión?

R: Si puede.

**Por favor, lea con cuidado y siga las siguientes precauciones de seguridad:**

- Antes de utilizar este producto por primera vez, realice una prueba de tolerancia cutánea en la parte interior del brazo.
- Después de limpiar la parte interior del brazo, aplique una cantidad adecuada de gel y utilice el modo V-LIFT en la zona de prueba durante 3 minutos.
- Este producto se puede utilizar si no aparecen anomalías cutáneas en la zona de prueba en un plazo de 24 horas.
- No utilice este producto en las siguientes zonas sombreadas durante los tratamientos faciales:
- La zona dentro de la cuenca del ojo, como el globo ocular, la parte superior del ojo, etc.
- Los labios (incluidos el labio superior y el inferior) y el interior de la boca.



- Asegúrese de mantener la punta del electrodo en contacto con la piel una vez que lo haya colocado correctamente.
- No lo mantenga en la misma zona durante mucho tiempo ni lo reutilice.
- No enjuague el instrumento con agua ni lo limpie con líquidos corrosivos, como alcohol, detergentes alcalinos o lejía.