

Manual de instrucciones del Hidrógrafo

Modelo: AV0054



Gracias por el interés mostrado en nuestro Hidrógrafo, este producto debe ser utilizado de acuerdo con las «Condiciones de Uso» siguiendo sus instrucciones para el montaje y el uso del producto.

Lea atentamente el «manual de usuario» y guárdelo en un lugar seguro. Si tiene dudas adicionales, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más información.

Peligro

- No cargue el producto cerca de bañeras llenas de agua, duchas, lavabos u otros lugares donde exista la posibilidad de inmersión.
- Mantenga el producto y la fuente de alimentación en un lugar seco y limpio.
- Si el producto está dañado, deje de utilizarlo primero.
- No toque ninguna de las piezas internas para evitar descargas eléctricas.
- No utilice este producto en niños menores de una semana y mantenga a los niños menores de un año alejados de este producto cuando lo esté utilizando.
- Asegúrese de colocar la maquina en su lugar, en caso contrario, es posible que no pueda cargarse.
- No desmonte ni modifique el producto para evitar un funcionamiento incorrecto.
- Este producto tiene una batería recargable incorporada. No arroje este producto al fuego y evite usarlo en ambientes con altas temperaturas. Esto puede causar un mal funcionamiento o un incendio.

Advertencia


- Revise y limpie regularmente el tope de suciedad para evitar daños en el producto.
- No lo utilice en mascotas para evitar causar daños.
- No utilizar en los párpados superiores para evitar daños en la zona ocular.
- Configure la intensidad de energía según la condición de su piel. Asegúrese de comenzar desde el nivel 1 cuando lo use por primera vez.
- La botella de solución original y el microchip son artículos desechables y no se pueden reciclar.
- Después de lavarse durante 20 minutos, aplique una crema fácil que no contenga alcohol, fragancia ni ningún otro efecto (sin blanqueamiento, eliminación de pecas, efectos antienvjecimiento, alcohol, ácido salicílico, etc.)
- Qúitese cualquier joya metálica, gafas o lentillas antes de utilizar el aparato.
- Utilice diferentes niveles de intensidad para las distintas partes del cuerpo.
- Por favor, apague primero la alimentación cuando este inactivo o este limpiando.

No apto para personas y situaciones

1. No utilizar en niños, mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, mujeres durante la menstruación, pacientes con cicatrices, diabetes, músculos frágiles y personas sometidas a inyecciones de relleno o tratamientos inflamatorios (durante un breve período de tiempo).

2. Está prohibido el uso en periodos en los que la piel sea frágil, como el acné, enrojecimiento, picazón, inflamación y alergias.
3. Prohibido utilizarlo en los párpados superiores, globos oculares, membranas mucosas.
4. No lo utilice si tiene enfermedades que suprimen la respuesta inmune (incluyendo la infección por VIH, lupus eritematoso, porfiria, etc.)
5. Úselo después de la limpieza, si la superficie de la piel no esta limpia y seca, puede afectar la experiencia del uso del producto.
6. El uso del producto está prohibido para cualquier tipo de herida que no haya cicatrizado.
7. Después de usar el fotómetro de agua, algunas personas pueden experimentar enrojecimiento en la piel. Este es un fenómeno normal y generalmente no requiere tratamiento. Desaparecerá por si solo en 24 horas y se puede aplicar hielo según sea necesario para acelerar la recuperación.
8. Antes de utilizarlo por primera vez, se recomienda que haga una prueba cutánea en la cara interna del brazo o detrás de la oreja. Si hay enrojecimiento, picazón intenso, hinchazón u otras alergias, no lo utilice.


Visualización del cuerpo del producto

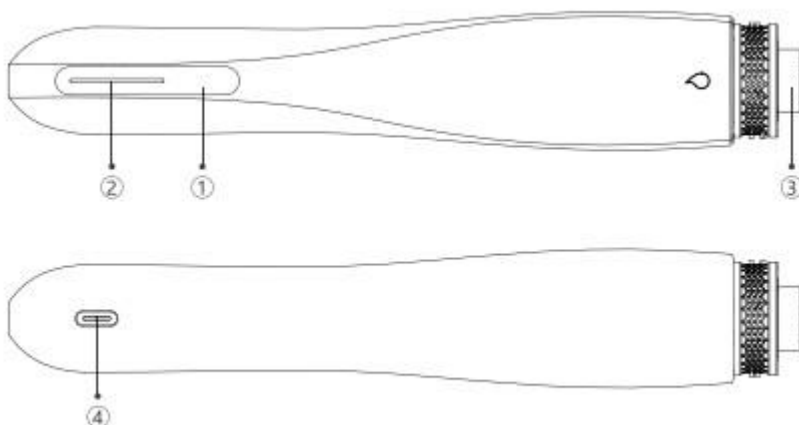

Nombre de la pieza:

1. Botón de encendido.
2. Luz indicadora de la marcha.
3. Botella de solución original.
4. Puerto de carga.

Recordatorio de carga

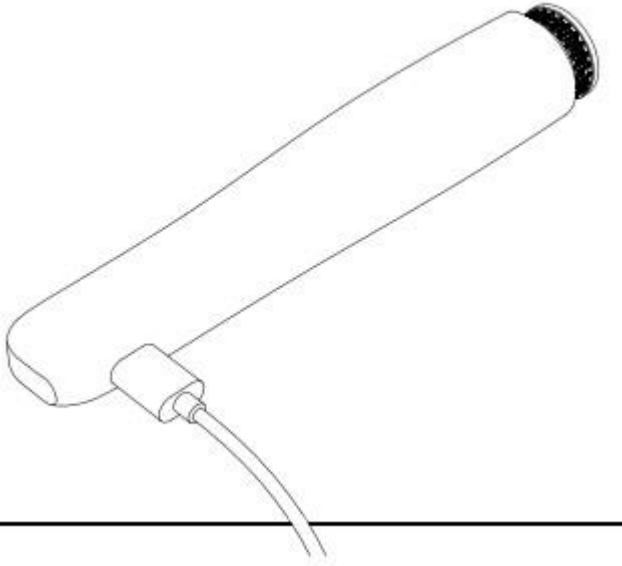

- Durante la carga, la luz roja se enciende, cuando está completamente cargada, la luz pasará a blanco.
- Durante el recordatorio de batería, cuando el tiempo de uso es superior a 10 minutos, la pantalla de carga de la batería parpadea en rojo.
- Cuando el tiempo de uso es inferior a 10 minutos, la pantalla de carga de la batería muestra una luz roja fija y después de 1.3 segundos, el producto se apaga automáticamente.

Diagrama de instalación de esencia



Paso 1:

Retire la tapa de la botella de esencia.



Paso 2:

Coloque la botella de esencia antes de encender el producto.



Paso 3:


Cuando se instale en su lugar, habrá una ligera sensación de sujeción.




Paso 4:

Saque la botella de suero después de su uso.


Funcionamiento del botón

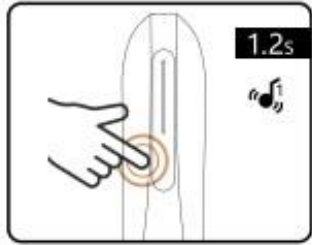


Paso 1: Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,2 segundos para encenderlo. Emitirá un pitido y entrará en el modo de luz de agua de forma predeterminada.

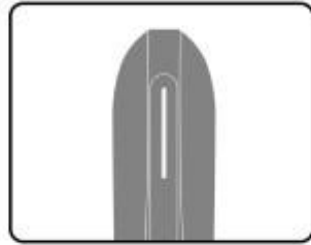

Paso 2: La luz de la pantalla se vuelve blanca después de encender la máquina (se apaga cuando la máquina está apagada.)

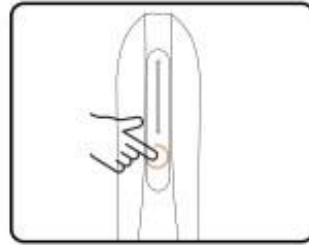

Paso 3: Presione brevemente la tecla de encendido/apagado y la intensidad del modo de luz del agua cambiará de marcha en el orden : bajo - medio - alto.

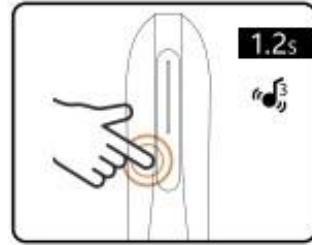

Paso 4: Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,2 segundos mientras el producto está encendido y emitirá un pitido 3 veces.

Pasos de uso detallados



Paso 1: Limpie su cara.



Paso 2: Instale de acuerdo con las instrucciones anteriores. Una vez completada la instalación, encienda la máquina y comience a usarla.



Paso 3: Utilice el instrumento verticalmente en la cara, la frente, el mentón, la nariz y los párpados inferiores. Toque la piel ligeramente y muévela o levántela.



Paso 4: Una vez completado el tratamiento, espera 20 minutos para permitir que la piel absorba el exceso de esencia (no es necesario limpiar al introducir la esencia) o aplique una mascarilla facial durante 20 minutos.

Notas sobre el uso

1. La botella de líquido y el microchip son artículos desechables, deséchelos después del uso.
2. Opere de acuerdo con la condición personal de su piel y evite el uso excesivo.
3. Asegúrese de que la botella de esencia esté instalada en su lugar antes de encender la máquina.
4. El método de uso del modo de luz de agua es moverse rápida y suavemente sobre la cara. La misma zona no debe tocarse más de 3 veces y el tiempo de permanencia cada vez no debe de ser superior a 3 segundos.
5. Al usarlo, la intensidad debe ser moderada para que la esencia se distribuya uniformemente. No presione con demasiada fuerza.
6. Tenga mucho cuidado al usarlo en el área de los ojos y no permita que el producto entre en contacto directo con los párpados o globos oculares.
7. Se recomienda que los usuarios nuevos y los usuarios con piel sensible utilicen la esencia en el interior del brazo o detrás de la oreja para realizar una prueba cutánea y luego la introduzcan desde la configuración de baja intensidad. Después de que su piel se adapta completamente, pruebe otras concentraciones según la condición de su piel.
8. Después de usar el fotómetro de agua, algunas personas pueden experimentar enrojecimiento en la piel. Este es un fenómeno normal y generalmente no requiere tratamiento. Desaparecerá por si solo en 24 horas y se puede aplicar hielo según sea necesario para acelerar la recuperación.
9. Después del uso, algunas personas pueden experimentar un ligero picazón y escozor en la piel. Este es un fenómeno normal y generalmente no requiere tratamiento. Desaparecerá por si solo en 24 horas.
10. Si siente alguna molestia al utilizar el producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte con su médico.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar el instrumento, apáguelo y limpie el cabezal guía con un paño suave humedecido con agua.
2. No enjuagar directamente con agua.
3. No utilice soluciones alcalinas, alcohol, agua de plátano, aceite volátil y otros disolventes. No utilice agua para pulir, polvo para pulir, agua caliente, ni productos químicos para limpiar la máquina.
4. No deje el dispositivo mojado con loción de belleza.
5. Manténgalo en un lugar fuera del alcance de los niños antes de usarlo.

6. No lo guarde en los siguientes lugares:

- Un lugar expuesto a la luz solar directa, con mucha humedad o con mucho polvo.
- Lugares con productos químicos, gases o vibraciones fuertes.
- Cerca de equipos de calefacción o fuentes de calor, o alrededor de materiales magnéticos.
- Lugares con temperaturas extremas como altas o bajo cero, o en automóviles expuestos a altas temperaturas y luz solar.
- Lugares que puedan suponer riesgo de incendio o estar expuestos a la intemperie.

7. Asegúrese de apagar la alimentación cuando no lo esté utilizando.

8. Si la máquina no se ha utilizado durante más de medio año, asegúrese de comprobar si hay alguna anomalía antes de utilizarla. Si se utiliza en un estado defectuoso puede provocar un accidente.

Normas de la garantía

Los consumidores que compren productos a través de canales legales deben comunicarse con nosotros para solicitar la garantía postventa si hay una falla de rendimiento que no sea causada por daño humano y operar de acuerdo con los resultados de la comunicación o devolver el producto en cuestión a su vendedor. Por favor, conserve en perfecto estado el embalaje del producto, accesorios, factura de compra, etc.

Para hacer uso de la garantía o cualquier duda podrá contactarnos a través de:

service@emprendimientosurbanos.es

Período de garantía

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:

1. Fallas y daños causados por uso, modificación o mantenimiento inadecuados.
2. Fallas y daños causados por el vuelco o caída del producto durante su uso después de la compra.
3. Fallas y daños causados por incendios, terremotos, inundaciones y otros riesgos naturales, públicos o anomalías de voltaje, etc.
4. Fallas y daños causados por anomalías en otros equipos eléctricos conectados a este producto.
5. Al reemplazar baterías, consumibles y otras piezas.
6. Mal funcionamiento y lesiones causadas cuando se utiliza en situaciones domésticas no generales (como situaciones comerciales que requieren un uso prolongado).
7. Fallas y daños causados en su uso en vehículos o naves.
8. Fallas y daños causados por el transporte, movimiento y caída después de la compra.
9. Situaciones fuera del alcance especificado en esta tarjeta de garantía.