

Pistola eléctrica de nanoagujas y luz – ZN028



Manual de instrucciones

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar y después de leer, por favor guárdelo cuidadosamente para futuras referencias.


1. Precauciones

Precauciones de seguridad antes del uso.

- No utilizar en bebés, niños pequeños o personas sin capacidad de expresar la consciencia.
- No utilice este producto en personas con lesiones oculares o que hayan sido operadas. No utilice este producto cuando existan síntomas de enfermedades oculares como glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina.
- Cirugía plástica facial, implantación subcutánea de metal, no apto para embarazadas.
- No utilizar en pacientes con ictus, hipertensión e hipotensión.
- No utilizar en lugares de alta temperatura, inflamables, radiación electromagnética, húmedos.

- No usar al bañarse o sudar (no sumergir en el agua).
- Si el producto está deformado, dañado o huele mal, no vuelva a utilizarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Cuando realice tareas de limpieza y mantenimiento, apague la máquina y llévelas a cabo en estado apagado.
- No lave el cuerpo: el instrumento fallará, por favor límpielo con un paño seco o un paño suave con un poco de jabón neutro.
- No utilizar con otros dispositivos médicos electrónicos, como marcapasos, dispositivos médicos electrónicos de mantenimiento de vida cardiopulmonar artificial.
- Si siente algún dolor o anomalía en la piel o el cuerpo, deje de utilizarlo inmediatamente.
- No guarde este producto en un cuarto de baño u otra habitación húmeda.
- Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños.
- La batería debe retirarse del producto antes de desecharlo.
- El producto debe estar apagado cuando se extraiga la batería, y ésta debe colocarse de forma segura en el exterior.
- Este producto no es impermeable, por lo que está estrictamente prohibido aspirar agua en la máquina, verter este producto en el agua o enjuagarlo directamente con el grifo.
- No vuelva a utilizar el producto si resulta dañado por una caída o colisión.
- No desmonte ni repare este producto usted mismo. Póngase en contacto con el departamento de postventa del distribuidor o de la marca que adquirió este producto para cuestiones de reparación.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas con problemas físicos o sensoriales o con falta de conocimientos y experiencia (incluidos los niños), a menos que estén supervisadas o guiadas por alguien responsable de su seguridad. Sólo para la cara y el cuello, en los músculos sensibles no se recomienda el uso diario, pero se puede utilizar una vez a la semana.
- No se recomienda a personas con alergias, enfermedades de la piel, dermatitis, alergias cutáneas y lesiones antiguas graves, ni a personas con lesiones cutáneas, eczemas, hinchazones y otras afecciones.

2. Descripción de los componentes

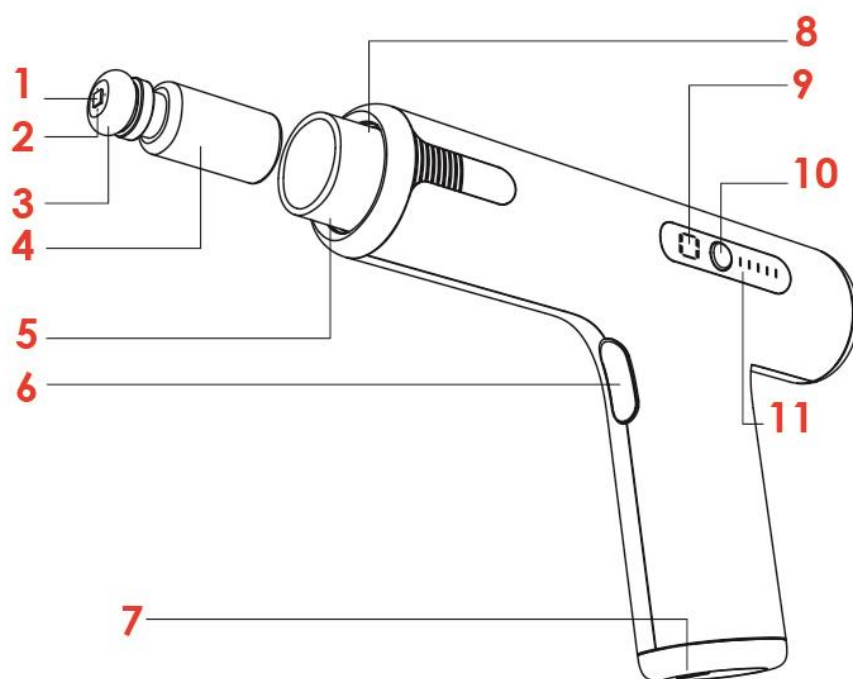

1. Nanocristal de silicio
2. Salida de líquido
3. Tapón del frasco de silicona
4. Frasco de esencias
5. Círculo de protección
6. Botón de encendido y ajuste de la marcha.
7. Puerto de carga Tipo-C
8. Salida de luz de color
9. Pantalla de la marcha (modo)
10. Botón interruptor de luz de color
11. Luz indicadora de encendido

Instrucciones de funcionamiento de la tecla de encendido:

1. Mantenga pulsado para encender el dispositivo. Después de encender, el valor predeterminado es la 1ra marcha, que es la marcha más baja (Esta marcha se recomienda para principiantes o usuarios por primera vez).
2. Pulsación corta para ajustar a las marchas superiores, pulsación corta múltiple para cambiar hacia adelante y hacia atrás dentro de 1-3 marchas.
3. Mantenga pulsado unos segundos para apagar.

Pantalla multifunción:

1. En el estado de arranque, la indicación de marcha de baja a alta es: 1, 2, 3.
2. En el estado de arranque, el indicador de carga muestra 5 barras de carga completa. Si el indicador parpadea, indica baja potencia, por favor cargue lo antes posible.
3. En estado de carga, el indicador de encendido parpadea, y una vez finalizada la carga, el indicador se quedará fijo.

Instrucciones de funcionamiento del botón interruptor de luz de color:

1. En el estado de arranque, pulse el botón de luz de color para cambiar la luz roja, azul y violeta.

Atención: Antes de usar la máquina por primera vez, por favor cárguela completamente antes de usarla. La protección de sobrecarga incorporada del instrumento hace que no se pueda encender durante el proceso de carga, por favor desenchufe la alimentación antes de usarla.

3. Funcionamiento

Preparación antes del uso

Paso 1: Limpiar la piel. Desmaquillar diariamente, después de la limpieza, puede utilizar tónico para la limpieza secundaria;

Paso 2: Tapones de silicona y botellas de loción. Antes de cada uso, por favor, limpie y desinfecte el tapón de la botella de silicona y el cristal de nano-silicio, compruebe si el orificio del líquido está bloqueado, si está bloqueado, por favor, remoje en agua tibia durante 5 minutos y luego limpie la obstrucción con una aguja fina; La botella de esencia también debe limpiarse antes de cada uso para asegurarse de que está limpia;

Paso 3: Instalación del frasco de esencia. Ponga la loción necesaria en el frasco de esencia, tape el frasco de silicona, inserte la boquilla de la pistola de luz de agua;

Pasos de funcionamiento

Paso 4: Encender el aparato. Presione prolongadamente el botón de encendido para encender el chip, la puesta en marcha por defecto es de 1 marcha, presione brevemente el botón de encendido para cambiar la marcha, y el chip debe sentirse indoloro al tocar la piel;

Paso 5: Su cara importa. Cuando se utilizan este tipo de instrumentos, es mejor realizar una operación puntual como un sello a manera de prueba previa;

Mantenimiento después del uso

Paso 6: Mantenimiento del instrumento. Utilice bastoncillos de algodón para limpiar la boca del instrumento para evitar que el líquido de la esencia fluya hacia el interior del instrumento, haciendo que los accesorios del instrumento se atasquen y no puedan funcionar;

Paso 7: Tapón de silicona y botella de suero. Después del mantenimiento, por favor limpie el tapón de silicona y el frasco de esencia con agua tibia y haga el tratamiento de desinfección, para

mantenga el tapón de silicona y el frasco de esencia limpios, (el nano cristal de silicona puede ser utilizado varias veces después de la desinfección) para el próximo uso.

Paso 8: Cuidado facial. Después de usar el instrumento, aplique una máscara de compresa fría durante 15-20 minutos y luego retírela, o aplique productos comunes para el cuidado de la piel para el mantenimiento facial.

Consejos: Durante el uso del instrumento, por favor asegúrese de usar productos para el cuidado de la piel sin alcohol y máscaras faciales para prevenir hormigueo en la piel, alergias y otras condiciones;

Precauciones durante el uso:

1. Productos para el cuidado de la piel: Se deben elegir productos seguros, eficaces, no tóxicos y adecuados para sus propios requerimientos.
2. Antes de la operación, limpie las partes de operación y las manos.
3. Cuando se utilice por primera vez, se recomienda hacer una prueba cutánea en la cara interna de la muñeca en combinación con productos para el cuidado de la piel, y no utilizar si se producen picores u otros fenómenos alérgicos.
4. En el proceso de uso, el chip debe continuar moviéndose, no permanecer en la misma parte durante más de 3-5 segundos y el número de veces de pasar por el mismo sitio no debe ser mayor de 2 veces.
5. La fuerza del chip debe ser moderada, no presione fuerte intencionadamente, no es necesario levantar la muñeca intencionadamente hasta que el chip no pueda entrar en contacto con la piel de forma uniforme.
6. Tras unos 10-20 minutos después del uso del chip, algunas personas tendrán enrojecimiento de la piel; es un fenómeno normal, sin tratamiento, y desaparecerá en 24 horas.
7. Excepto el tapón del frasco de silicona y el frasco de esencia, el resto del instrumento no debe estar en contacto con líquidos como el agua para evitar daños en la máquina.
8. El mismo chip sólo puede ser utilizado por una persona a la vez. Está estrictamente prohibido compartir un chip con otras personas, de lo contrario puede causar irritación de la piel, enrojecimiento, manchas, inflamación y otras consecuencias adversas.
9. Cuando almacene el chip, guarde el chip y el instrumento sin abrir en un lugar bien ventilado, evite la humedad y los golpes, y manténgalo alejado de los niños.

Técnica de funcionamiento

1. Método de sugerencia de puntos:



Después de activar el instrumento y hacer contacto de modo vertical con la superficie de la piel, puede detectar visualmente una ligera sensación de hundimiento. Utilícelo de forma rápida, puntual y suave, para levantarlo hacia arriba y abajo. Ajuste la intensidad según la necesidad de la parte de contacto a tratar.

2. Método deslizante:



Después de activar el instrumento y hacer contacto de modo vertical con la superficie de la piel, puede detectar visualmente una ligera sensación de hundimiento. Deslícelo en línea recta. Mientras se desliza, el nanochip no debe perder contacto con la superficie de la piel. Se recomienda permanecer solo un par de segundos en cada punto y no pasar más de 2 veces por un mismo sitio.

3. Método circular:



Después de activar el instrumento y hacer contacto de modo vertical con la superficie de la piel, puede detectar visualmente una ligera sensación de hundimiento. Aplique el nano chip en pequeños círculos a una velocidad constante sin perder contacto con la superficie de la piel. Se recomienda permanecer solo un par de segundos en cada punto y no pasar más de 2 veces por un mismo sitio.

[Problemas comunes antes del uso]

1. ¿Cómo limpiar?

Las manos y la cara deben limpiarse a fondo. Las manos deben limpiarse con desinfectante de manos o jabón, y la cara debe limpiarse con limpiador facial o loción.

2. ¿Debe desinfectarse el chip?

El chip debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso para prepararlo para el siguiente.

3. ¿Cuánto dura el ciclo de tratamiento?

El uso regular es de 1-2 veces a la semana, 10 - 15 minutos cada vez, la piel sensible se recomienda reducir la frecuencia y el tiempo de uso, y se recomienda utilizar la marcha más baja. La frecuencia real de uso se puede ajustar de acuerdo con la condición de la piel.

4. ¿Qué tipo de productos son adecuados para el tratamiento?

Se recomienda introducir productos de envasado independiente desechables con una única composición, como polvo liofilizado, solución madre (ácido hialurónico, clase VC), aguja de agua y productos de eficacia hidratante.

Prueba de sensibilidad: Antes de la introducción de productos eficaces, una pequeña gama de introducción debe llevarse a cabo detrás de la oreja, y la piel no debe mostrar: color rojo / hinchazón / picazón y otros síntomas alérgicos antes de aplicar en el resto de toda la cara.

[Problemas comunes en el uso]

1. ¿Cómo funciona el método de importación?

Todos los tipos de chips son adecuados para levantar y deslizar, dependiendo del grosor y la resistencia de la piel. Las personas con poca tolerancia utilizan el levantamiento de puntos, las personas con tolerancia fuerte y cuerno grueso utilizan el deslizamiento, generalmente los ojos, la frente, el triángulo de la boca, los pómulos o el cuello y otras zonas debido a la falta de grasa subcutánea se recomienda utilizar el levantamiento de puntos.

- Para el primer uso, se recomienda utilizar la elevación del punto, si no hay ninguna molestia, la segunda vez que se puede deslizar suavemente en la mejilla, la técnica y la fuerza son graduales, las primeras veces para encontrar su propio método y la fuerza, la posterior puede seguir la experiencia existente operación paso a paso.

2. ¿Cómo dominar la intensidad de importación?

Cuando se utiliza por primera vez, toque suavemente la piel, dependiendo de la sensación de la piel, si no hay molestias, aumentar ligeramente la fuerza.

3. ¿Puedo importar varios productos a la vez?

Se recomienda no introducir más de dos productos a la vez y las pieles con poca tolerancia sólo pueden introducir un producto a la vez.

[Problemas comunes después del uso]

1. ¿Es necesario aplicar otros productos para el cuidado de la piel después de la importación?

Se recomienda aplicar una mascarilla hidratante o reparadora después de la introducción, y si la piel está seca, se puede combinar con crema hidratante.

2. ¿Puedo tocar el agua? ¿Puedo lavarme la cara y maquillarme al día siguiente?

Se recomienda introducir el producto por la noche, y no tocar el agua al día siguiente de la introducción. Si al día siguiente no se presentan síntomas molestos como enrojecimiento, hinchazón, sequedad y picor, puede utilizar maquillaje y productos para el cuidado de la piel normales. Si hay síntomas de malestar, por favor, utilice productos hidratantes básicos.

3. ¿Puedo disfrutar del sol, la comida picante, el marisco y el vino?

Se recomienda no exponerse al sol durante tres días después de la importación, comer menos picante, mariscos, alcohol y otros alimentos irritantes.

4. ¿Se puede reutilizar el chip?

Si el chip puede ser utilizado repetidamente, el chip debe ser limpiado y desinfectado después de su uso, mantener la superficie seca y almacenar en un lugar seco.

5. ¿Qué debo hacer si noto rojeces y picores después de la importación?

Puede utilizar una mascarilla hidratante reparadora todos los días durante 3 días consecutivos, generalmente al día siguiente tendrá una mejoría notable.

[Varios pasos de uso de pieles problemáticas y recomendaciones de productos]

Piel seca y sensible:

- Antes de utilizar una variedad de productos funcionales, las primeras tres veces use productos hidratantes (ácido hialurónico, etc.), si la piel no muestra falta de hidratación antes de la introducción de productos funcionales; pruebe una pequeña gama de productos antes del tratamiento, si la piel no muestra color rojo, hinchazón, picazón y otros síntomas después podrá usar en el resto de toda la cara.

- Por favor, utilice sin enjuagar con agua los productos después de la importación.

Piel con problemas de manchas:

Se recomienda utilizar esencias eliminadoras de pecas (como la esencia blanqueadora y eliminadora de pecas) con productos hidratantes.

Piel con problemas de acné:

- Utilice productos para el acné para la introducción, la piel de la enfermedad del acné en sí tiene la inflamación, se recomienda que la guía no debe utilizar toda la cara de ida y vuelta, y llevar a cabo la introducción dirigida a la zona de acné para evitar la infección en otras partes de la cara.

Importación de impresión espinilla x espinilla

Nota:

- Puede utilizar los productos anti-acné y polvo liofilizado para el tratamiento, en primer lugar utilizar el polvo liofilizado para tratar en la marca de acné, tiene que pasar por alto la operación de acné para evitar la infección en otras partes, y, finalmente, verticalmente aplicar productos anti-acné en el acné directamente.

Métodos de operación específicos de las marcas de acné:

- Después de la limpieza, aplicar polvo liofilizado en el bache y luego aplicarlo en el bache.

Después de la introducción específica, aplique el polvo liofilizado por la mañana y por la noche, y generalmente continúe usándolo durante más de tres meses para prestar atención al efecto de uso.

4. Protección y almacenamiento

[Almacenamiento]

- Cuando el periodo de almacenamiento supere los 3 meses, deberá desembalarse el producto y comprobarse.

- No lo coloque cerca del suelo, paredes o techo.

- La habitación debe estar bien ventilada para evitar la luz solar intensa o los gases corrosivos.

[Transporte]

El embalaje del producto tiene protecciones simples a prueba de golpes, es adecuado para el transporte aéreo, ferroviario, por carretera y por barco, debe evitar la lluvia, las salpicaduras de nieve, la inversión y la colisión.

[Comprobación de la fuente de alimentación]

Compruebe la fuente de alimentación. Si la tensión de alimentación supera el rango especificado, no ponga en marcha la fuente de alimentación.

[Mantenimiento]

- Debe tomarse medidas para evitar la humedad, los roedores y la contaminación.

- La limpieza debe realizarse con el aparato apagado.

- Después de su uso, el instrumento debe colocarse en un lugar seguro. No coloque objetos pesados sobre el instrumento.

[Eliminación y reciclaje]

- Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

- Cuando decida desechar este producto, hágalo de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

Pasos básicos del desmontaje de la batería

1. Desconecte la fuente de alimentación externa y retire la carcasa del producto;
2. Corte uno a uno los dos cables de alimentación que conectan la batería.
3. Retire la batería y utilice pegamento aislante para pegar las partes rotas del cable de alimentación.
4. Por favor, deposite la batería usada en un punto limpio de reciclaje;
5. Siga las leyes y directrices medioambientales locales para desechar y proteger el medio ambiente.

Aviso

- La batería debe extraerse del producto antes de desecharlo;
- Al extraer la batería, el producto debe estar apagado;
- La batería debe desecharse de forma segura

5. Especificaciones del producto

Nombre del producto: Instrumento de Nano micro agujas eléctricas

Modelo del producto: ZM028

Material del producto: ABS+PC

Tensión de salida: 3.7V

Tensión de entrada: 5V- 1A

Poder de operación: 0.45W

Capacidad de la batería: 1200mAh

Tamaño del producto: 170*121*36mm

Puerto de carga: TIPO-C

Tamaño del empaque: 240*190*60mm

Nota: Los parámetros de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Declaración especial: Todo el contenido de este material ha sido cuidadosamente revisado, si hay algún error de impresión o malentendido del contenido, póngase en contacto con la empresa.

Además: Si hay mejoras técnicas en el producto, se incluirá en el nuevo manual sin previo aviso. Si se cambia la apariencia y el color del producto, prevalecerá el producto real.