


Gorra masajeadora con tratamiento capilar de luz LED AV0351



Manual de instrucciones

Operación básica:

1. Antes del primer uso cargue la batería incorporada, para ello debe conectar el cable USB típico incluido al conector lateral de la placa (en la zona de color cuero puede apreciar un lado en el costado izquierdo donde no hay costura, allí está el puerto de carga) y el otro extremo del cable USB conectarlo a una fuente de 5V-1A (puede ser un adaptador de corriente del móvil, un puerto USB del ordenador, etc.)
2. La luz indicadora parpadeará mientras esté cargando, dejará de parpadear al finalizar la carga.
3. Coloque la placa de luz en la gorra, tal como se muestra en la imagen:

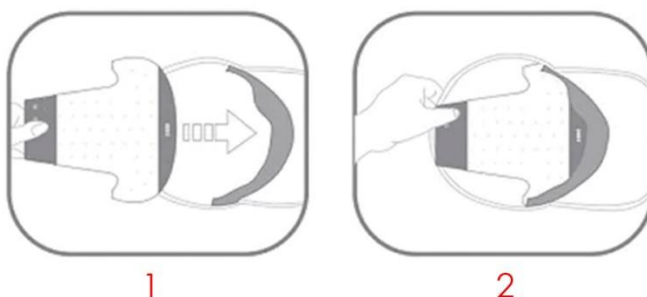

4. Debajo del orificio de la luz en la placa, hay tres botones que se pueden apreciar con el tacto:
A. Pulse brevemente el tercer botón para encender el dispositivo y pulse brevemente el tercer botón para apagarlo.

B. Con el dispositivo encendido, pulse una vez el segundo botón una vez para iniciar el modo masaje con la primera intensidad, pulse nuevamente para la segunda intensidad, pulse de nuevo para la tercera, pulse nuevamente para volver al modo de reposo.

C. Pulse y mantenga unos segundos el primer botón para encender las luces LED en modo 1 (Luz ROJA encendida) al encender sonará un pitido largo, pulse nuevamente para el modo 2 (Luz roja y azul parpadean), siguiente pulsación para el modo 3 (Luz azul siempre brillante), luego modo 4 (Luz roja parpadea), si vuelve a pulsar comenzará de nuevo el bucle de modos desde el modo 1.

D. Para apagar la luz LED presione y mantenga el tercer botón unos segundos.

Modos de luz

Cuidado del cabello diario de 20 a 60 min



Modo 1:

Siempre rojo: brillante, apto para cabello seco y normal.

Modo 2:

Las luces rojas y azules parpadean alternativamente, adecuadas para cabello graso.


Modo 3:

Adecuado para cuero cabelludo graso.

Modo 4:

Recomendado para personas de cabello denso.

Características:

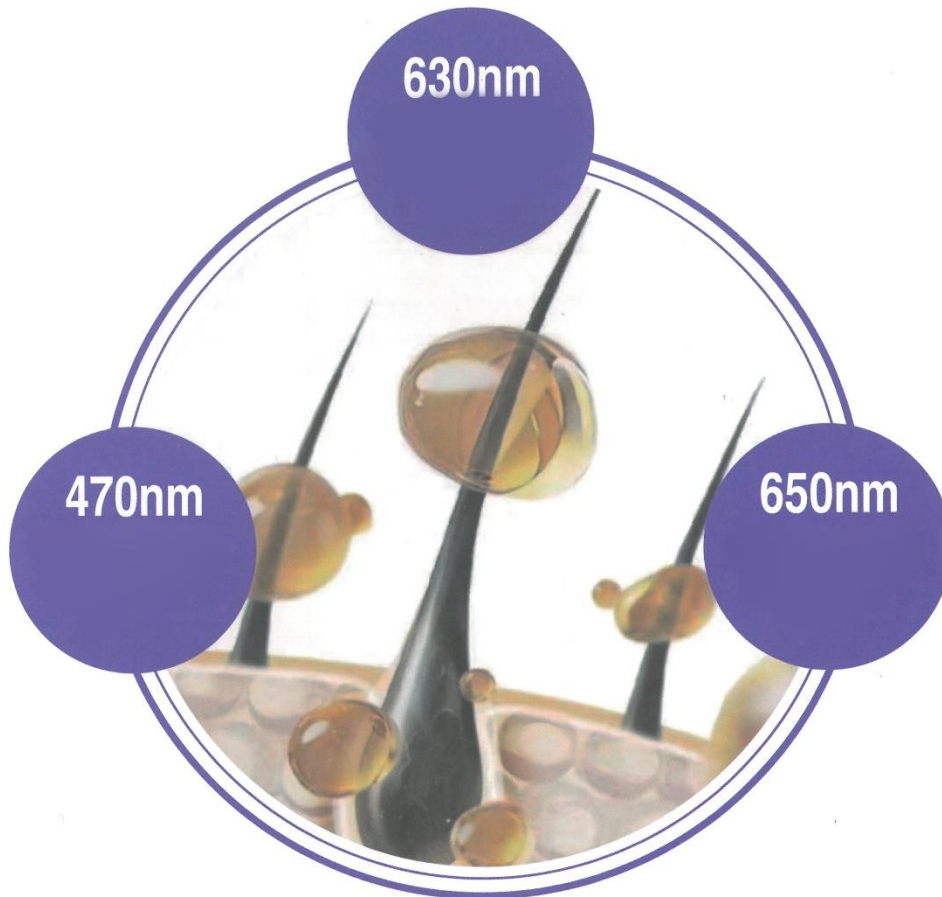

Luz LED azul 470nm:

Regula la secreción de aceite del cuero cabelludo y mejora el entorno de crecimiento de los folículos pilosos.

Luz LED roja 630nm:

Se dirige a las raíces superficiales de cabello cercanas al cuero cabelludo.

Luz LED roja 650nm:

Promueve la circulación sanguínea del cuero cabelludo y nutre las raíces del cabello.