

INSTRUMENTO DE BELLEZA DE COLÁGENO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



* Gracias por comprar uno de nuestros productos, La interfaz de usuario y otras ilustraciones en este manual son diagramas esquemáticos. Utilícelos solo como referencia. Consulte el producto real.

- Para su seguridad, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar este producto.
- Después de leer guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.
 - Si transfiere este producto a otros para su uso, asegúrese de adjuntar este manual de instrucciones.

Tabla de contenidos

1. Información del producto
2. Introducción a la operación
3. Instrucciones de uso
4. Precauciones de seguridad
5. Condiciones de garantía

1. Información del producto

Especificaciones del producto:

Nombre del producto: Instrumento de Belleza Pao de Colágeno

Modelo del producto: BC912

Tamaño del producto: 95x80x38mm

Tamaño de la cabeza guía de matriz de puntos dorada: 40x15 mm

Peso neto del producto: 82g

Entrada clasificada: 5V-1A

Tiempo de carga: unos 90 minutos

Capacidad de la batería: 500 mAh

País de producción: China


Lista de contenido:

Instrumento de Belleza Pao de Colágeno x1

Cable de carga x1

Manual de instrucciones x1

2. Introducción a la operación

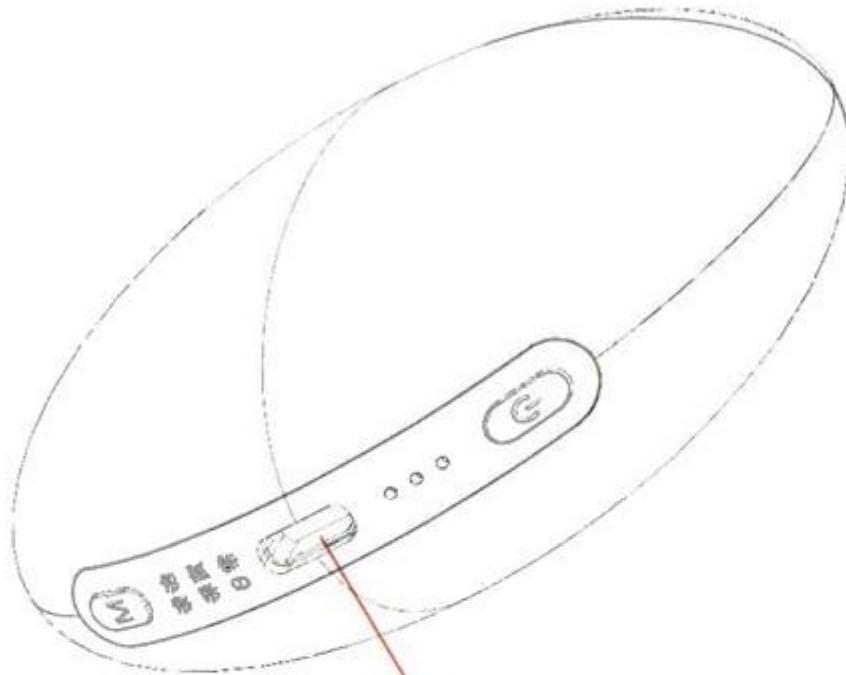

Puerto de carga USB
Tipo C



2.1 Carga

- Conecte el cable de carga al adaptador de corriente (compatible con 5V-1A, adaptador de corriente con CQC y otras certificaciones de cumplimiento).
- Conecte completamente la interfaz del adaptador de corriente tipo C al puerto de carga del host.
- Conecte el adaptador a una toma de corriente.
- Cuando la luz indicadora del host parpadea nuevamente, significa que el host ha entrado en el estado de carga.
- La luz indicadora del host se enciende cuando se completa la carga.

- Una vez completada la carga, desenchufe el cable del adaptador de corriente del enchufe y luego desenchufe el cable de carga del producto.
- Si conecta el cable para usar el instrumento de belleza, use un adaptador con una potencia de 5V=1A o superior.

2.2 Encendido y apagado del dispositivo

En el estado de apagado, mantenga presionado el botón del interruptor de encendido durante 1,5 segundos y el host se encenderá.

El arranque predeterminado es [modo diario] y el nivel de intensidad es 1.

- Después de encender, si el instrumento no se usa en 15 minutos y no toca la piel, se apagará automáticamente. Si necesita usarlo de nuevo, reinicie.
- En el estado de encendido, mantenga presionado el botón del interruptor durante 1.5 segundos, y el host apagará las luces y se apagará.

2.3 Cambio de modo

- Cuando esté encendido, presione brevemente la tecla M durante 0.5 segundos y la luz cambiará entre [profundidad] y [limpieza diaria].

2.4 Interruptor de Modo [Diario] [Profundidad] [Limpieza]

- En el estado de encendido, simplemente presione la tecla M para cambiar entre los modos "diario", "profundo" y "limpio".

2.5 Selección de intensidad

- La intensidad predeterminada al encender el producto es de 1 (la luz tipo 1 está encendida)
- Después de encender, presione brevemente [botón de encendido] para cambiar de intensidad. Se cambiará de acuerdo al siguiente orden 1-2-3-2-1-2-3 de circulación repetida.
- La luz del engranaje cambiará para indicar que el cambio de marcha se ha realizado correctamente.
- El engranaje de mayor intensidad es de 3 engranajes (3 luces encendidas), y el engranaje de menor intensidad es de 1 engranaje (1 luz encendida).

- La primera marcha establece la tolerancia de la piel, la segunda marcha tiene la máxima fuerza de la cabeza facial alrededor de los ojos y la tercera marcha tiene la energía más fuerte.
- Se recomienda iniciar el uso en el nivel 1. En el primer uso, aplique el gel en la zona entre el pulgar y el índice para comprobar la intensidad de la sensación de calor.

2. 6. Indicador de batería

- Durante el encendido y el funcionamiento, no es posible ver el nivel de batería restante. Cuando la batería se agota, el dispositivo se apagará automáticamente. Preste atención al indicador de carga.
- Durante la carga con cable, el indicador de nivel del dispositivo parpadea en modo “respiración”, lo que indica que se está cargando. Cuando la carga se completa, la luz azul permanece fija.


2.7 Aviso de batería

- Este producto admite el uso mientras está conectado al cable de carga.
- En estado apagado, si al mantener pulsado el botón de encendido/modo el dispositivo no se enciende, significa que la batería está baja. Por favor, cárguelo a tiempo para evitar afectar su uso normal.

3. Instrucciones de uso

Diagrama del dispositivo (unidad principal)

- Indicador de modo limpieza
- Indicador de modo profundidad
- Indicador de modo diario
- Botón de encendido / cambio de modo (magnético)

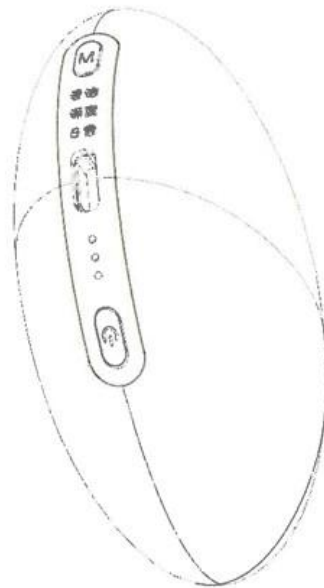

Funciones de los botones:

- **Botón de encendido:**
Mantener pulsado: encender/apagar el dispositivo
- **Botón M:**
Pulsación corta: cambiar entre los modos **limpieza / profundidad / diario**
- **Botón de encendido (función adicional):**
Botón de ajuste de temperatura
- **Pulsación corta:** ajustar la intensidad



4. Precauciones de seguridad

Aviso del fabricante

Antes de usar el producto, lea atentamente todas las **precauciones de seguridad** y utilice el dispositivo estrictamente según las instrucciones de este manual.

Precauciones de uso

- La temperatura de uso recomendada del producto es de **10 °C a 30 °C**.
- Mantenga el entorno de carga dentro del rango de **10 °C a 30 °C**.
- Antes del primer uso o tras un largo periodo de inactividad, cargue completamente el dispositivo y asegúrese de que los botones y los indicadores funcionan correctamente.
- En el primer uso o si la piel no está acostumbrada al tratamiento, comience siempre con el **nivel de intensidad 1**.

Antes del uso diario

- Antes de utilizar el producto, pulse brevemente el botón rojo de encendido/cambio de modo para comprobar que la batería es suficiente y evitar interrupciones durante el uso.
- Desmaquille y limpie completamente el rostro antes de su uso.
- Retire objetos metálicos de la zona de tratamiento, así como gafas y lentes de contacto.
- No utilizar con fines distintos a los tratamientos estéticos.
- No sumergir el dispositivo (ni su base de carga) en agua.
- No colocar ni almacenar la base de carga en lugares con alta humedad.
- En personas con piel sensible o propensas a alergias, se recomienda realizar una prueba previa en la parte posterior de la oreja o en la cara interna del brazo y esperar al menos 15 minutos.

Durante el uso del producto

- Durante el uso, asegúrese de que el cabezal de microcorriente dorado esté completamente en contacto con la piel del rostro.
- Si aparece cualquier reacción anormal en la piel, suspenda el uso inmediatamente y consulte al servicio técnico o a un profesional médico.
- Para el uso sin mascarilla, es necesario aplicar una cantidad adecuada de gel conductor.
- En el **modo de modelado diario**, el dispositivo debe deslizarse continuamente sobre la piel. Se recomienda un movimiento lento y uniforme.
 - Si se siente demasiado calor, añada más gel o reduzca el nivel de intensidad.
 - Si se siente poca temperatura, aumente la velocidad de deslizamiento.
- No mantener el dispositivo fijo en un mismo punto durante mucho tiempo sin mascarilla, ya que podría causar quemaduras. Utilícelo siempre en movimiento sobre la piel.
- No mire directamente a las luces LED durante periodos prolongados, ya que podrían causar daños o molestias oculares.
- No coloque el cabezal de tratamiento dorado sobre los párpados ni en las proximidades directas de los ojos, ya que podría causar lesiones o molestias oculares.
- Debido a las diferencias individuales en la sensibilidad de la piel, la sensación de temperatura puede variar entre usuarios. Esto es normal. Ajuste el nivel de intensidad según sus necesidades y comodidad.
- No utilice el dispositivo de forma continua durante largos periodos sobre la misma zona para evitar irritaciones, lesiones cutáneas o posibles infecciones.

Después del uso

- Durante la carga, mantenga la base de carga y el puerto de conexión limpios y secos.
- Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de que esté apagado y desconectado del cable de carga y del adaptador de alimentación.
- Tras el uso, es normal que la piel presente un ligero enrojecimiento o sensación de calor. Se recomienda utilizar productos cosméticos con propiedades hidratantes o reparadoras.
- Si durante el uso experimenta molestias intensas o cualquier reacción anormal, suspenda inmediatamente el uso y consulte a un médico.

Eliminación de la batería

- No sustituya la batería por su cuenta durante la vida útil normal del producto.
- **Riesgo por fuga de batería:** el electrolito de la batería es altamente corrosivo. Evite el contacto directo con la piel o la ropa. En caso de contacto, limpie inmediatamente la zona con un paño seco y, si se produce alguna reacción adversa, consulte a un médico.
- Antes de desechar el producto, la batería debe retirarse del dispositivo.
 1. Desmonte la carcasa exterior del producto.
 2. Desconecte los cables internos y extraiga la batería.
- Antes de retirar la batería, el dispositivo debe estar apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación.
- La batería debe eliminarse de acuerdo con la normativa local aplicable sobre residuos y reciclaje.

Personas que no deben utilizar este producto

No utilice este producto si se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones, ya que podría provocar accidentes, lesiones o problemas en la piel o en la salud:

- Personas con enfermedades cardíacas, presión arterial anormal, tumores malignos, enfermedades infecciosas o fiebre.
- Personas con trastornos hemorrágicos o tendencia a desarrollar cicatrices anormales (queloides).

- Personas con alteraciones de la sensibilidad o de la percepción del dolor.
- Personas que estén recibiendo tratamientos dentales o bucales; se recomienda consultar previamente con un médico o dentista.
- Mujeres durante la menstruación, el embarazo o la lactancia.
- Personas en periodo de crecimiento o adolescencia.
- Personas con implantes metálicos en la zona de tratamiento.
- Personas que padezcan o hayan padecido alguna de las siguientes enfermedades: cáncer (especialmente cáncer de piel o lesiones precancerosas), enfermedades agudas, tuberculosis, enfermedades febriles, enfermedades infecciosas, enfermedades sanguíneas, enfermedades de órganos internos, enfermedades cutáneas o dermatitis alérgica.
- Personas con el sistema inmunitario debilitado debido a enfermedades inmunosupresoras, como el SIDA, o que estén tomando medicamentos inmunosupresores.
- Personas que tengan implantes cosméticos permanentes, rellenos dérmicos temporales o tratamientos con toxina botulínica (botox) en la zona de aplicación. Consulte previamente con un médico.
- Personas con enfermedades que puedan agravarse por la aplicación de calor en la zona de tratamiento, como el herpes simple recurrente.
- Personas cuya piel presente reacciones o erupciones provocadas por estímulos físicos.
- Personas con predisposición a alergias, piel sensible o piel especialmente delicada.
- Personas que se encuentren en estado de fatiga extrema, agotamiento, bajo los efectos del alcohol o que hayan tomado somníferos.
- Personas con dilatación capilar causada por el uso prolongado de corticosteroides, tratamientos hormonales o trastornos de la función hepática.
- Personas que utilicen dispositivos médicos implantados o de soporte vital, tales como:
 - Pulmón artificial.
 - Marcapasos cardíaco.

- Desfibriladores implantables.
- Monitores cardíacos portátiles u otros dispositivos médicos electrónicos implantados o de uso corporal.

Advertencia

Si padece alguna enfermedad, está bajo tratamiento médico o tiene dudas sobre la idoneidad de este producto para su caso particular, consulte a un médico antes de utilizarlo.

Zonas del cuerpo no aptas para el uso

No utilice este producto en las siguientes zonas del cuerpo ni en las siguientes circunstancias, ya que podría provocar lesiones, irritación o interferencias con dispositivos médicos:

- Cualquier zona distinta de las específicamente indicadas para su uso.
- Ojos, globos oculares, párpados, interior de la boca, zona genital y mucosas.
- Ganglios y zonas linfáticos del rostro y del cuello.
- Zonas con acné severo o lesiones cutáneas importantes.
- Piel con infecciones, inflamación, supuración o procesos inflamatorios activos.
- Zonas con cicatrices queloides o antecedentes de cicatrización anormal.
- Áreas sometidas recientemente a procedimientos quirúrgicos o tratamientos estéticos, tales como:
 - Rejuvenecimiento cutáneo mediante láser.
 - Peelings químicos.
 - Heridas que aún se encuentren en proceso de cicatrización.
 - Cualquier intervención realizada en los últimos 3 meses.
- Zonas con quemaduras solares, inflamación o enrojecimiento causados por la exposición al sol.
- Áreas con manchas pigmentarias de origen patológico o lesiones cutáneas sospechosas.
- Zonas con lunares elevados, verrugas virales u otras lesiones cutáneas similares.

- Áreas donde aparezcan erupciones, irritación, inflamación, eccemas u otras anomalías de la piel.

Importante

Las precauciones de seguridad descritas anteriormente no cubren todas las situaciones posibles. Si tiene dudas sobre si este producto es adecuado para usted o para una determinada zona de aplicación, consulte a un médico o contacte con el fabricante antes de utilizarlo.

5. Condiciones de garantía

Si encuentra cualquier problema con el funcionamiento del producto, podrá contactar directamente con el servicio técnico a través de:

service@emprendimientosurbanos.es