

DISPOSITIVO DE BELLEZA PARA EL CUELLO

MANUAL DE USUARIO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Instrumento de belleza IPL para cuello

Modelo del producto: MJ-400

Voltaje de carga: 5 V = 1 A

Potencia nominal: 5 W

Parámetros de la batería: 3,7 V/500 mAh


Tiempo de carga: 3 horas

Tamaño de la máquina: 14,2 x 8,2 x 3,9 cm

Tamaño de la base: 8 x 7,3 x 4,3 cm

Método de carga: Carga tipo C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

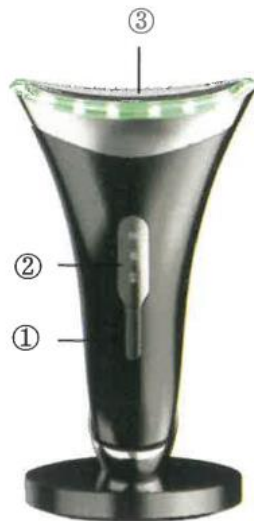

① Botón de cambio: Pulsación larga del interruptor/pulsación corta del interruptor de modo

② Visualización del modo correspondiente

③ Fototerapia de color

Botón de cierre

Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar el dispositivo. El zumbador sonará durante 3 segundos.

Pulsación corta para cambiar

1. Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender, predeterminado en "Modo de limpieza e iluminación", la barra de luz se iluminará en verde y el zumbador sonará durante 3 segundos.

2. Pulsación corta para cambiar al "Modo cálido e hidratante", la barra de luz se ilumina en azul, el zumbador emite un pitido corto (temperatura constante de 45 grados Celsius, control de temperatura NTC)

3. Pulsación corta para cambiar al "Modo de limpieza profunda", luz roja en la barra de luz, calentamiento activado (temperatura constante de 45 grados Celsius, control de temperatura NTC)

Durante la carga, la luz azul frontal está encendida, la luz de frecuencia respiratoria está encendida y la luz azul siempre está encendida cuando está completamente cargada.

Menos del 10 % de batería, luz roja parpadeando

Apagado automático después de un uso continuo durante 20 minutos

Enciende automáticamente la microcorriente EMS al iniciarse

Luz azul: puede promover la síntesis de proteínas y colágeno. Activa la piel, la reafirma y relaja, afina los poros, es muy adecuada para pieles grasas y mejora la piel muy sensible.

Luz roja: mejora la vitalidad celular, acelera la circulación sanguínea, promueve el crecimiento de fibroblastos y colágeno, suaviza las líneas finas y arrugas, reafirma la piel, aclara la pigmentación y reduce las cicatrices.

Luz Verde: puede mejorar la función alternante de la utilización del oxígeno celular, promover la microcirculación superficial, destapar la linfa, eliminar el edema y calmar y equilibrar la piel. Efecto estable.

INTRODUCCIÓN DE MODOS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



EMS



Vibración acústica



Limpieza profunda



Compresa caliente



Iones positivos y negativos



Tres modos



Microcorriente EMS



Nutrición profunda

INVENTARIO



producto



Cable de datos



instrucciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El cabezal de masaje aerodinámico está diseñado específicamente para el cuello. El diseño aerodinámico se adapta a la ergonomía, transfiriendo energía a cada centímetro de la piel del cuello.
- La vibración de la onda sonora del cabezal de masaje se combina con tres modos, así como luz azul, luz roja y luz verde, para promover la circulación sanguínea, estimular los puntos de acupuntura facial y del cuello, desbloquear meridianos, mejorar la circulación, promover la desintoxicación y promover la desintoxicación a largo plazo. Reduce el envejecimiento de las células epidérmicas, reduce las líneas del cuello, reduce la hinchazón, relaja los hombros

y el cuello, terapia de puntos de acupuntura, elimina rápidamente la fatiga y restaura la condición física.

- Los tres modos son: 1. Modo de limpieza e iluminación 2. Modo cálido e hidratante 3. Modo de limpieza profunda. Mantenga presionado el interruptor para iniciar, y cada interruptor de modo realizará un ciclo. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar.
- Carga tipo C, segura y ecológica
- Compacto y portátil, se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar
- Un nuevo concepto de diseño biomimético para Dolphin Terrace, exquisito y novedoso
- Batería de gran capacidad, sin problemas de larga duración
- Después de un uso continuo durante 20 minutos, se apagará automáticamente para garantizar la seguridad.
- Enciende automáticamente la microcorriente EMS al iniciarse

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Intente guardar este producto en un ambiente seco y a temperatura normal o en una caja de almacenamiento tanto como sea posible.

2. No lo sobrecargue para evitar dañar la vida útil de la batería.

3. Si no lo usa durante un tiempo prolongado, límpielo después de cargarlo y colóquelo en la caja de almacenamiento.

4. El exterior del producto se puede limpiar con alcohol o detergente diluido.

Durante el uso, es normal que el dispositivo esté ligeramente caliente, pero no caliente.

6. Está prohibido limpiar el cuerpo directamente con agua.

7. Si no se usa durante un tiempo prolongado, cargue la batería al menos cada 3 meses.

NOTA

- No lo use con dispositivos médicos implantados (como marcapasos), ya que esto puede causar un mal funcionamiento del equipo o representar un peligro.
- Si tiene problemas en la piel de la palma, como heridas, eccemas, descamación, etc., no lo use. Uso de este producto.
- No utilice este producto en áreas con alta humedad, como baños.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- El desmontaje, la reparación o la modificación no autorizados de este producto pueden provocar un mal funcionamiento del equipo o lesiones personales.
- No le dé este producto a niños menores de seis años para evitar lesiones personales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CUIDADO DE LA PIEL

P: ¿Se puede usar todos los días? ¿Cuánto tiempo puede durar?

R: Se puede usar todos los días. Se recomienda usarlo una vez por la mañana y una vez por la noche, durante 5 a 10 minutos cada vez.

P: ¿Qué se debe tener en cuenta antes de usar?

R: Limpie la piel antes de usar. Es mejor usarlo junto con crema para el cuello y crema de masaje. Al usarlo, tire y levante suavemente cada componente; no aplique demasiada fuerza para evitar dañarlo.

P: ¿Se puede usar en pieles propensas al acné?

R: Se recomienda tratar el acné con precaución y evitar daños secundarios.

P: ¿Cómo cargarlo y usarlo?

R: Este producto utiliza un puerto de carga tipo C para la energía