


Masseur pour les yeux OT – 019

Mode d'emploi

Préparation avant utilisation

- Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les d'abord.
- Veillez à ce que le bouton de massage souple reste propre (en cas de salissure, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide). Ne pas utiliser par des personnes souffrant de lésions ou d'inflammations oculaires.

Méthode d'insertion des piles

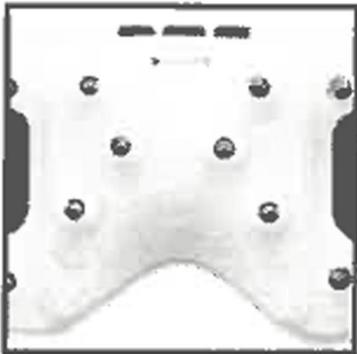


- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'intérieur de l'unité principale et insérez deux piles de taille AAA dans le compartiment à piles.
 - Fermez le couvercle du compartiment à piles.
- (Assurez-vous que les bornes positives et négatives des piles sont correctes.)

Mode de fonctionnement

Mettez l'appareil sous tension, appuyez sur l'interrupteur ON-OFF, entrez dans le mode de cycle automatique, selon les 9 programmes.

1. La séquence de massage à commutation automatique, si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur, la machine s'arrête immédiatement.
2. appuyez sur la touche de fonction pour changer automatiquement de programme.
3. appuyez sur la touche « TIME », vous pouvez choisir une durée de 3 minutes ou de 5 minutes.

Schéma de la structure du produit

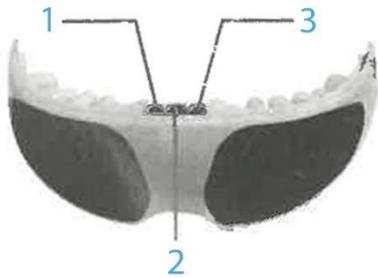

1. Touche de sélection de l'heure TIME
2. bouton de sélection MODE
3. Touche ON/OFF ON/OFF

Méthode de fonctionnement en cas de situation atypique

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la pile à l'intérieur doit être retirée.

* En cas de situation anormale

L'appareil ne s'allume pas ou ne change pas de mode.

Analyser les causes :

La batterie est-elle déchargée ?

Les bornes positives et négatives de la batterie sont-elles correctes ?

Solution :

-Remplacer la batterie

-Vérifier si les bornes positives et négatives sont correctement installées.

Vérifier si les bornes positives et négatives sont correctement installées- Remettre en service

- Il est recommandé de procéder à un nettoyage trimestriel en profondeur. L'appareil est doté d'un trou de chargement à l'intérieur, qui peut être retiré pour le nettoyage.

Types de programmes

- 1) Mode automatique : ce mode permet de changer les modes d'imitation 2 à 8 de manière répétée en une seconde, par coïncidence.
2. manche forte : forte secousse
3. engrenage moyen : forte secousse de la manche
4. Engrenage faible : faible force de secousse
5. Doux : toutes les 5 secondes, il y aura des vagues de mouvement de blocage.
(Les fluctuations fortes et faibles peuvent être alternées).
6. confortable : toutes les 5 secondes, il y aura des vagues de mouvement assez fortes.
(Il est possible d'alterner des fluctuations fortes et faibles).
7. Rush de Qi fort : toutes les 5 secondes, il y aura un massage de pouls.

Mesures de sécurité

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les circonstances suivantes :

- * Personnes souffrant de lésions ou d'inflammations oculaires.
- * Personnes souffrant d'un traumatisme crânien.
- * Personnes présentant des brûlures de la peau autour des yeux ou souffrant d'une maladie.

Avertissement

- 1) Ne pas placer l'appareil sur le sol ni l'immerger dans l'eau.
2. ne pas utiliser ce produit dans des endroits où la température est élevée, tels que les salles de bains.
3. Éviter la lumière directe du soleil afin d'empêcher le vieillissement prématuré ou le jaunissement du silicone souple.
4. Il est recommandé aux patients atteints de myopie forte d'utiliser ce produit sous la supervision d'un médecin.
5. Les enfants de moins de huit ans ne doivent être utilisés que sous la surveillance d'un adulte.

6. Lors de l'utilisation de ce produit, ne pas marcher à l'air libre.
7. ne pas utiliser ce produit en conduisant une voiture.
8. Ne pas utiliser ce produit à la suite d'une intervention chirurgicale ou d'une blessure à l'œil ; cesser d'utiliser le produit ; reprendre l'utilisation dès la guérison complète.
9. Toute conversion, démontage ou réparation ne doit être effectué que par du personnel technique autorisé.

Description de l'état des substances toxiques et dangereuses contenues dans les produits :

Conformément au « Règlement sur le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques », nous énumérons les noms et les teneurs des substances toxiques ou dangereuses qui peuvent être contenues dans nos produits électriques :

Nom de la pièce Moteur

Composants électroniques Pièces métalliques

Ce tableau est basé sur les dispositions de la compilation de référence SJ/T 11364-2014 de la période d'utilisation de protection de l'environnement de l'Association chinoise des appareils ménagers publiée par l'Association chinoise de l'électricité [2016] No. 36 « guidance on the environmental protection use period of home appliances ».

La teneur en substances toxiques et dangereuses de tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence de limite spécifiée dans GB/126572-201 1.

La teneur en substances toxiques et dangereuses d'au moins un matériau homogène du composant dépasse les limites spécifiées dans le document Gzhimen 26572-201 1.

Indique que le produit a une période d'utilisation de protection de l'environnement de 10 ans dans des conditions de travail et d'utilisation normales.