

APPAREIL DE BEAUTÉ POUR LE CONTOUR DES YEUX



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation

Description

La charge de travail élevée, le rythme de vie accéléré et l'utilisation fréquente de divers écrans électroniques exercent une forte pression sur les yeux, favorisant la fatigue oculaire, les troubles du sommeil et la surexposition visuelle. Il est donc important d'accorder une attention particulière au soin et à la protection des yeux.

Ce produit utilise des technologies sûres et efficaces d'ionophorèse et de vibration à basse fréquence. Grâce à sa sonde de précision, il offre un soin complet du contour des yeux.

Il peut contribuer à améliorer l'absorption des produits cosmétiques pour le contour des yeux, tels que les crèmes contour des yeux, favoriser la circulation sanguine et le métabolisme de la zone périoculaire, aider à atténuer progressivement l'apparence des cernes, réduire les poches et maintenir une peau d'apparence plus ferme autour des yeux.

Conseils

Appareil de massage oculaire par micro-courant EMS, ionophorèse et vibration à basse fréquence.

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir un fonctionnement correct. Après lecture, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.

Ce produit est conçu pour le soin approfondi du contour des yeux et n'est pas destiné à un usage médical ou thérapeutique.

Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce produit correctement et d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

Test de sensibilité cutanée

Pour éviter toute irritation de la peau, il est recommandé d'effectuer un test de sensibilité avant d'utiliser un produit cosmétique avec cet appareil.


1. Nettoyez l'intérieur du coude et séchez-le avec une serviette.
2. Appliquez le produit cosmétique sur la zone sensible située à l'intérieur du coude. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour mettre l'appareil en marche. Après le massage, laissez sécher naturellement. Évitez de mouiller ou d'essuyer la zone pendant la période d'observation.
3. Si aucune réaction anormale n'apparaît dans les 48 heures, le produit cosmétique peut être considéré comme adapté à votre peau.

Entretien du produit

1. Ne rincez pas l'appareil ni l'adaptateur d'alimentation à l'eau. Ne les plongez pas dans l'eau et ne les exposez pas aux éclaboussures.
2. N'utilisez pas, ne rechargez pas et ne stockez pas ce produit dans une salle de bain ou dans un environnement chaud et humide.
3. Ce produit contient des composants de précision. Ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même.
4. Avant chaque utilisation, vérifiez que la sonde n'est ni endommagée ni déformée afin d'éviter toute irritation ou blessure de la peau.
5. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en cours de chargement.

Présentation du produit

Pour utiliser ce produit correctement et éviter tout dommage inutile causé par une mauvaise utilisation, veuillez prêter attention aux avertissements suivants.

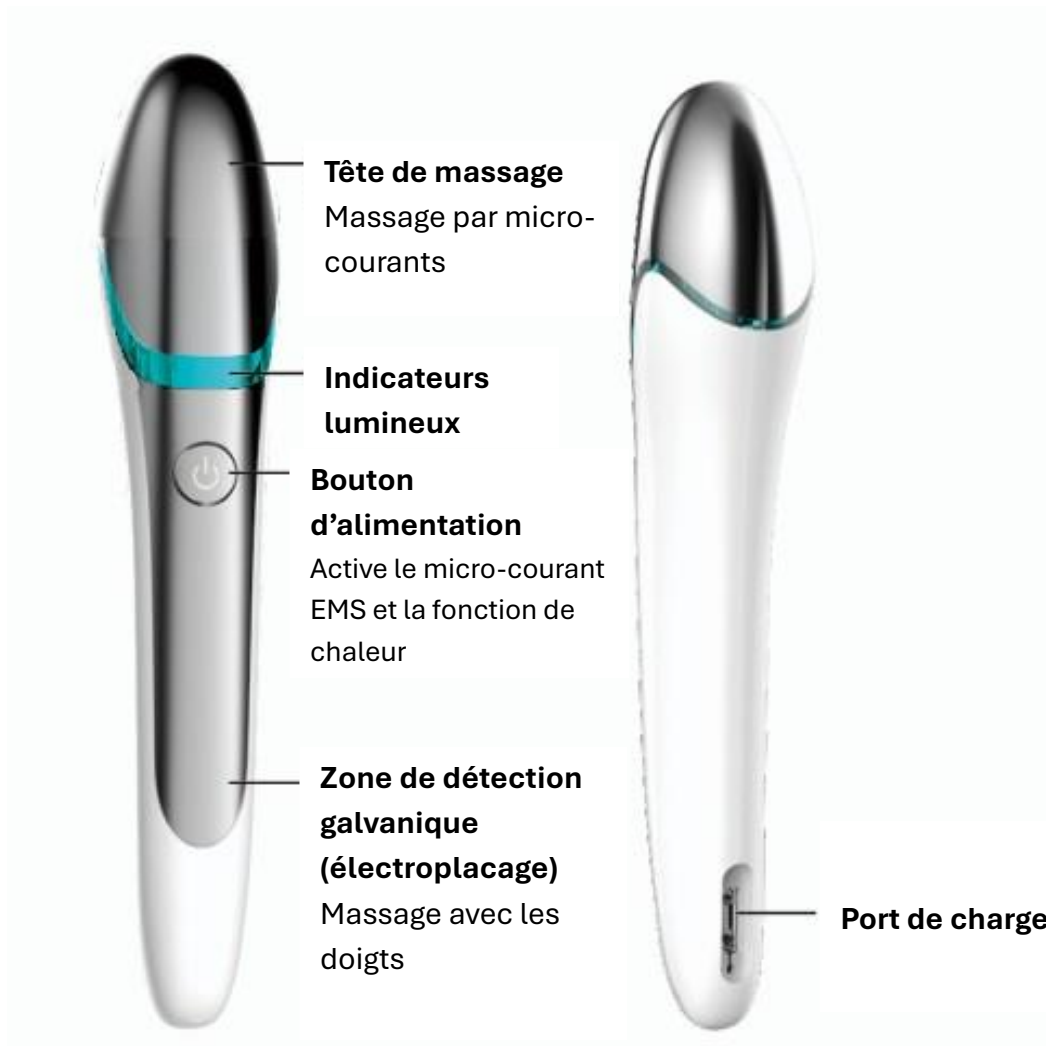

Mode d'emploi

Étape 1 : Charge complète

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil. Le temps de charge est d'environ 30 minutes.

Une charge complète permet une utilisation d'environ une semaine si l'appareil est utilisé entre 10 et 15 minutes par séance. Il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par jour.

Étape 2 : Application de la crème contour des yeux

Appliquez une petite quantité de crème contour des yeux à l'aide de l'annulaire. Étalez-la délicatement du coin interne de l'œil vers la tempe afin de préparer la zone au massage.


Étape 3 : Traitement par massage

Assurez-vous que la peau est en contact avec la zone de détection de l'appareil. Placez la tête de massage sur le contour des yeux et effectuez des mouvements doux. Le traitement peut être réalisé par pressions ponctuelles ou par mouvements circulaires.

Étape 4 : Activation des fonctions EMS et chaleur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction de micro-courant EMS ainsi que la fonction chauffante.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver ces fonctions.

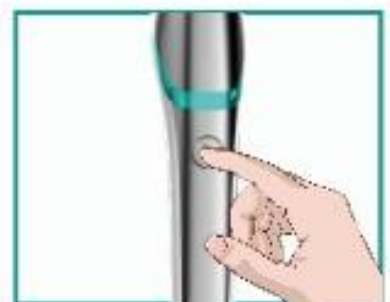

Étapes recommandées d'utilisation

Étape 1 : Appliquer la crème contour des yeux

Prélevez une petite quantité de crème contour des yeux avec l'annulaire et appliquez-la délicatement du coin interne de l'œil vers la tempe.



Étape 2 : Soin bidirectionnel

Maintenez le contact avec la zone tactile de l'appareil et faites glisser lentement la tête de massage du coin interne de l'œil vers la tempe en suivant la ligne inférieure de l'œil. Il est recommandé de garder les yeux légèrement fermés pendant le traitement.



Étape 3 : Soin par points

En suivant les points indiqués sur l'illustration, appliquez une légère pression localisée avec l'appareil. Maintenez la tête de massage sur chaque point pendant environ 10 secondes et répétez l'opération 2 à 3 fois.



Étape 4 : Soin circulaire

Effectuez des mouvements circulaires autour du contour des yeux en suivant le sens indiqué par les flèches de l'illustration. Il est recommandé d'effectuer 3 à 5 rotations lors de chaque séance.

