


INSTRUMENT DE BEAUTÉ AU COLLAGÈNE

BP-16 Manuel d'instruction

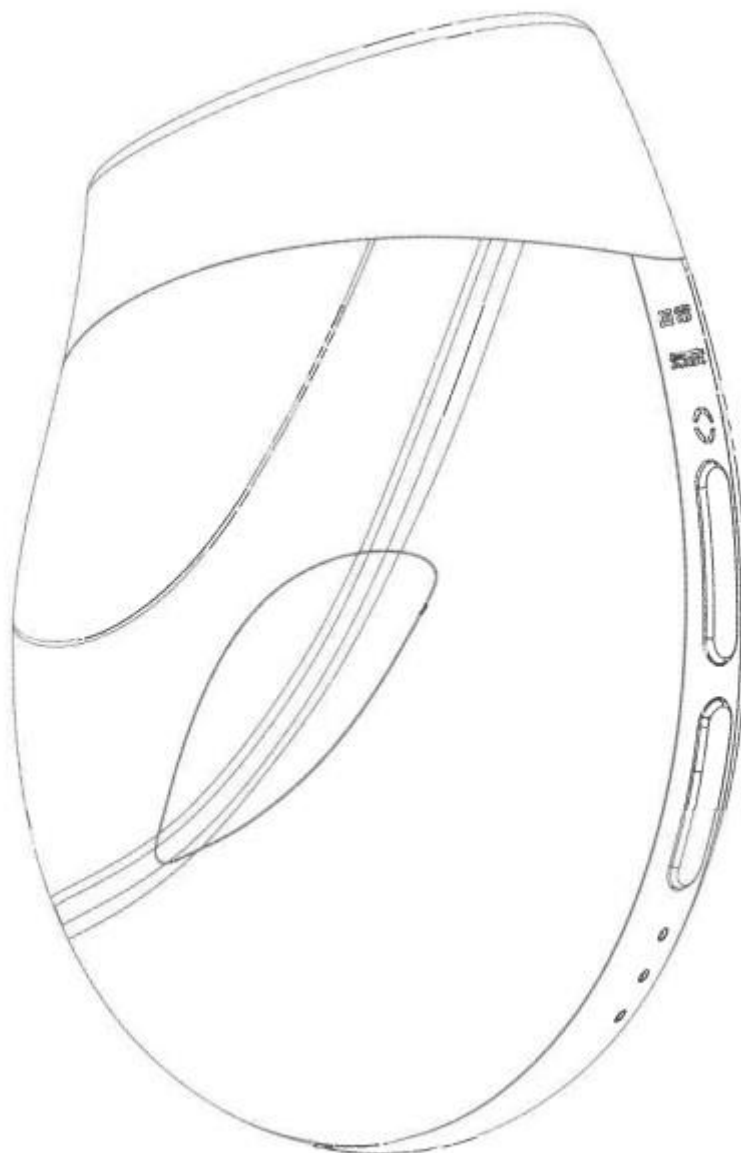

L'entreprise s'efforce constamment d'améliorer les performances des produits et de garantir l'exactitude de leurs spécifications. Certains éléments de ce manuel peuvent différer de votre produit. L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel.

Veillez lire attentivement ce manuel et le conserver avant de l'utiliser.

Précautions liées aux instructions

- Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits.
- Les instructions peuvent vous permettre d'utiliser le produit en toute sécurité. Si vous devez prêter ou donner l'instrument à d'autres personnes, veuillez joindre ce mode d'emploi.
- Veuillez à ce que [la date d'achat, le nom du magasin d'achat] et les autres informations soient correctement remplies et conservées.

POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET SÛRE

- Avant toute utilisation, veuillez lire ce document et l'utiliser correctement.
- Afin d'éviter de mettre en danger la santé humaine ou de causer des dommages matériels, les avertissements sont indiqués par les ICONS suivants. Les signes d'avertissement et leurs implications sont illustrés ci-dessous

Avertissement : une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.



L'icône indique une "conduite interdite".

Les détails seront indiqués à l'intérieur ou autour du diagramme.



L'icône indique "Contenu à respecter".



L'icône indique qu'il faut faire attention au contenu.

Pour une utilisation correcte et sûre :

A avis:

- Pour éviter les accidents ou les désagréments physiques.
- Veuillez éviter d'utiliser cet appareil si vous utilisez les machines électroniques médicales suivantes. Un mauvais fonctionnement des appareils électroniques médicaux peut provoquer des accidents ou des malaises physiques.
- Machines électroniques médicales implantées, telles que les stimulateurs cardiaques.



CDpacemakers.

- Machines électroniques de maintien en vie telles que les cœurs et les poumons artificiels. INTERDICTION - Machines électroniques médicales montées telles que scanner ECG ou perfusion.

Avertissement :

Ne pas utiliser par les personnes suivantes

-Maladie cardiaque, tumeur maligne ou tension artérielle anormale. Souffrant de maladies, de maladies infectieuses et de maladies aiguës accompagnées de fièvre.

Pendant un traitement dentaire.

Patients dont l'immunité est affaiblie ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs en raison de maladies immunodéficientes telles que le SIDA.

Patients atteints d'hémophilie, de troubles hémorragiques, de diabète et de névralgie faciale.

Perception anormale et perception de la douleur.

Crabes avec pieds gonflés, mélanose faciale, hypersensibilité à la lumière et pigmentation anormale.

-Utilisation à long terme d'hormones stéroïdiennes ou dilatation microvasculaire causée par un dysfonctionnement du foie.

Les personnes présentant une constitution allergique, une dermatite atopique, une dermatose et une peau sensible.

-Patients ayant des antécédents d'épilepsie ou d'inconfort dû au scintillement de la lumière.

-Séquelles au niveau de la tête ou des yeux causées par des accidents de la circulation.

-Les patients ayant subi une chirurgie oculaire. (Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser)

Pendant la grossesse, la période menstruelle et l'allaitement.

-Les jeunes enfants ou les personnes incapables d'exprimer leur propre volonté. Les personnes qui empestent l'alcool et qui ont la gueule de bois.

Les personnes qui prennent des médicaments somnifères.

Les personnes qui se sentent extrêmement fatiguées ou en mauvaise condition physique.

-Les problèmes de peau tels que les taches et les inflammations causées par des fibres chimiques.

- Les personnes qui souffrent ou ont souffert d'une dermatite due aux produits cosmétiques. -Les personnes qui ont récemment reçu un traitement de rajeunissement chimique dans un salon de soins de la peau.

Les personnes qui ont des problèmes de peau après avoir utilisé l'instrument.

Ne pas utiliser l'instrument sur les parties suivantes

-En dehors du site désigné.

-Le cœur périphérique, les globes oculaires et les yeux. Les zones muqueuses telles que la paupière supérieure, les lèvres ou la bouche.



Taches pathologiques, grains de beauté ou verrues virales.

-Les picotements et l'inflammation de la peau provoqués par une exposition excessive au soleil. -Le site d'une tache pathologique due à des démangeaisons, de la fièvre, une stimulation physique, etc.

Parties ayant subi une intervention chirurgicale, région pubienne, anus, autour de la pomme d'Adam et des oreilles.

-Les parties qui ont été récemment épilées à la cire ou rasées.

*Les patients sous traitement médical doivent consulter un médecin avant d'utiliser le médicament.

INTERDICTION - Ne pas utiliser avec d'autres instruments de beauté.

- Ne pas l'utiliser à d'autres fins que la beauté. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé ou défectueux.



Cet instrument de beauté est un instrument de soin spécial pour la beauté. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins thérapeutiques ou autres.

- Ne regardez pas ou ne regardez pas directement les lumières LED.

- Ne pas l'utiliser en continu sur la même partie afin d'éviter les lésions cutanées, les infections, les inflammations, les saignements, la pigmentation et d'autres problèmes de peau ou l'aggravation des symptômes. -Ne pas utiliser sur les animaux domestiques.



- Ne pas utiliser ou stocker dans la salle de bain ou dans des endroits très humides.

- Ne pas placer dans des endroits humides avec de l'eau (nettoyeur de visage, etc.).



- Ne pas toucher l'instrument avec des mains mouillées. (Risque d'électrocution ou de blessure)

- Ne pas utiliser à proximité d'eau de banane, d'huile volatile, d'eau légère, d'aérosols et d'autres éléments inflammables.



- N'utilisez pas de câbles USB autres que ceux prévus à cet effet. (Risque d'incendie, de choc électrique ou d'instrument - Ne connectez pas d'autres instruments avec des câbles USB spéciaux.)

- L'instrument peut être chaud pendant son utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal qui ne pose aucun problème de sécurité.



- N'endommagez pas le fil de la fiche. Endommager, plier, tirer, tordre, placer des objets lourds sur le dessus, serrer le câblage, etc. (risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance de l'appareil).

- Ne pas partager la prise avec d'autres appareils. (risque de chaleur ou d'incendie)



- Convient uniquement aux prises de courant domestiques.

- Veillez à ce que la fiche soit fermement insérée



- L'instrument peut être chaud pendant son utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal qui ne pose aucun problème de sécurité

- Ne connectez pas l'instrument à des produits métalliques ou électriques INTERDITS. (téléphone portable, télévision, etc.)



- Ne pas démonter, modifier ou réparer l'instrument. Pour toute réparation, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté.

- Veuillez retirer les accessoires métalliques, les lunettes ou les lentilles de contact avant d'utiliser l'instrument. Accessoires métalliques : boucles d'oreilles, colliers, montres, etc.

- Pour les personnes qui utilisent l'appareil pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, veuillez régler l'intensité sur l'utilisation la plus primaire (niveau 1).



- N'appuyez pas le guide sur la peau et ne le gardez pas sur la même partie pendant plus d'une minute afin d'éviter les problèmes de peau. Lors du traitement de la peau autour des yeux, veuillez fermer les deux yeux avant l'application.

- Si vous ressentez une douleur ou une anomalie au niveau de la peau ou du corps pendant l'u



- Ne pas tremper, vaporiser ou verser de liquide sur l'instrument. (Risque d'électrocution, d'incendie ou de défaillance de l'instrument)

Avis:

Veuillez lire attentivement les points suivants avant d'utiliser l'instrument.

1. Les soins du visage doivent être effectués après le démaquillage, le nettoyage, le démaquillage et l'élimination du sébum et l'application d'un gel.

2. Avant d'utiliser ce produit ou un produit de soin pour la première fois, veuillez à tester au préalable l'adaptabilité du produit à la peau.

1. Nettoyer la peau : laver l'intérieur du bras avec du savon et l'essuyer avec une serviette ;
2. Appliquer le produit de soin ou de l'eau à l'intérieur du poignet et utiliser le produit en mode MFIP pendant 4 minutes.

Note : Afin d'éviter les problèmes de peau, veuillez à effectuer un test préalable. Si des conditions anormales telles que des éruptions cutanées, des rougeurs et des irritations apparaissent sur le site du test, veuillez interrompre immédiatement le test et cesser d'utiliser l'instrument.



- N'installez pas de pièces métalliques et ne les poussez pas sur la prise. (Risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance de l'instrument)

- Ne pas faire tomber ou heurter l'instrument

- Garder l'instrument hors de portée des enfants pour le conserver ou l'utiliser.

- Ne pas conserver l'instrument dans les endroits suivants : lumière directe du soleil, forte humidité, endroit poussiéreux.



- Endroits soumis à des températures élevées ou à des températures extrêmes, telles que des températures inférieures à zéro, et voitures soumises à des températures élevées et exposées au soleil.

- Endroits susceptibles de s'enflammer ou exposés au vent et à la pluie.

- Produits chimiques, sites de production de gaz ou sites violents.

- Près d'équipements de chauffage ou de sources de chaleur, et à proximité de matériaux magnétiques.

- Méthode de nettoyage :



- Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et essoré. L'utilisation d'un chiffon rugueux pour essuyer l'instrument risque de le rayer ou d'altérer sa fonction.

- Ne pas utiliser de solvant alcalin, d'alcool, d'eau de banane, d'huile volatile et d'autres solvants, ni d'eau de polissage, de poudre de polissage, d'eau chaude ou de machine de nettoyage pharmaceutique.

- Ne pas utiliser l'instrument lorsqu'il est gelé.

Vérification avant utilisation

- Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de six mois, il convient de vérifier si l'instrument présente des anomalies avant de l'utiliser. (si le voyant lumineux s'éteint normalement, s'il y a des fissures ou des dommages) - Il peut provoquer des accidents s'il est utilisé dans des conditions de dysfonctionnement à sec.

Présentation du produit.

L'instrument de beauté au collagène dispose de deux modes de beauté, quotidien et profond, de la lumière rouge, de la radiofréquence, du microcourant EMS, de trois types de fonctions de beauté comme l'un des instruments de beauté multifonctionnels.

Présentation des fonctions

1. La lumière rouge, d'une longueur d'onde de 630 nm, est appelée (lumière bioactive) pour améliorer l'activité cellulaire, accélérer la régénération cellulaire et favoriser la formation de collagène.
2. la radiofréquence fait bouger les molécules de la peau à grande vitesse pour générer de l'énergie thermique, et absorbe une grande quantité de chaleur pour synthétiser du collagène, ce qui élimine efficacement les rides et rétablit l'élasticité.
3. le micro-courant EMS stimule le cerveau pour qu'il produise des mouvements musculaires involontaires, incitant le muscle à se presser, ce qui permet à la peau d'ajuster son élasticité. L'EMS conduit le micro-courant à la base du muscle par le biais du guide d'induction, favorisant la croissance du collagène et améliorant les contours.


Mode de fonctionnement

- Mode quotidien = RF (faible) +EMS + lumière rouge
- Mode profond = RF (forte) + lumière rouge

Mise en marche et arrêt

- 1.Appuyez longuement sur le bouton marche-arrêt pendant environ 2 secondes pour démarrer l'appareil, et le voyant vert de veille s'allume.
- 2.En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer à l'état de fonctionnement. Effleurez continuellement pour passer de l'état quotidien à l'état profond.
- 3.Les trois voyants de l'engrenage clignotent tour à tour pendant la charge, et les trois voyants restent allumés lorsque la charge est complète.
- 4.Lorsque la batterie est faible, les trois indicateurs de vitesse clignotent ensemble pour indiquer la nécessité de recharger.
- 5.S'il n'y a pas d'opération ou d'induction dans les 15 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Si l'appareil entre en état de charge, il ne peut pas être utilisé. 5. Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, l'écran numérique s'éteint et la carte de contrôle entre en état d'arrêt.

Structure du produit

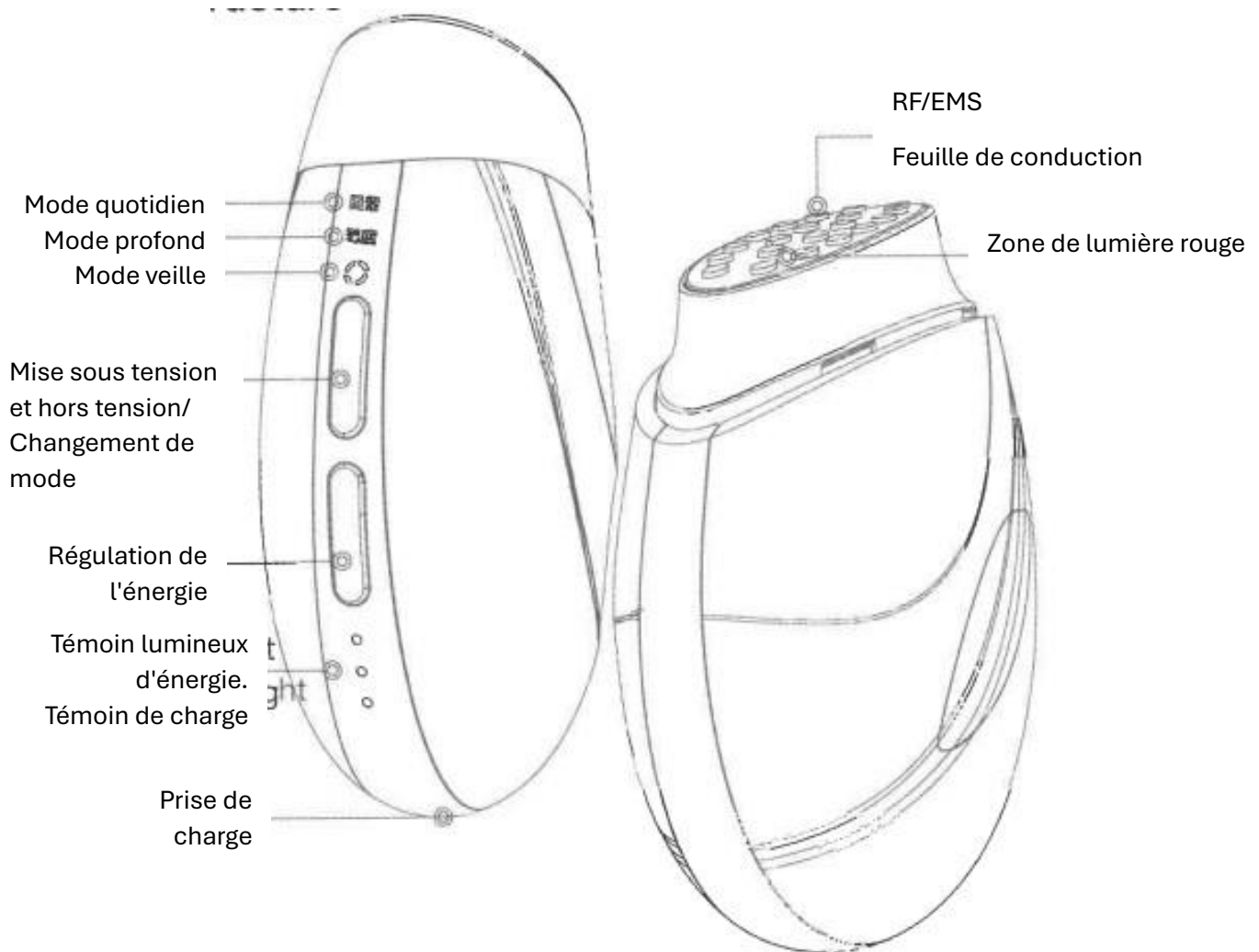

Méthode d'utilisation

Lors de la première utilisation de cet instrument, assurez-vous que le produit lui-même contient de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, veuillez le charger complètement et l'utiliser à nouveau (la fonction ne peut pas être utilisée pendant la période de charge).

Mode de sélection


- 1.Appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Collagen PAO démarre et se met en mode veille, et l'indicateur vert de veille s'allume.
- 2.Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le mode quotidien et le mode profond. Le mode quotidien est RF (faible) + EMS + lumière rouge, tandis que le mode profond est RF (fort) + lumière rouge.

Énergie sélective

- Les vitesses sont divisées en 3 vitesses (3 indicateurs, 1 voyant allumé en 1ère vitesse, 2 voyants allumés en 2ème vitesse et 3 voyants allumés en 3ème vitesse).

- Touche de sélection : Une pression courte permet de changer la position du robinet. Il y a trois positions de prise au total, et il faut continuellement appuyer brièvement sur la position de prise dans l'ordre suivant : 1 -2-3-2-1

Méthode de soins:

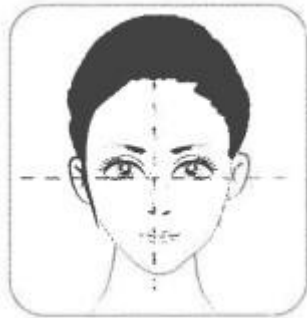

Pour les soins du visage entier, divisez le visage en quatre parties selon l'image de gauche et appliquez et soignez dans l'ordre, plutôt que d'appliquer un seul soin sur l'ensemble du visage.

Avant le soin

- Retirez les colliers, bagues et autres accessoires, ainsi que tous les objets métalliques sur votre corps.

- Veuillez suivre les procédures générales de démaquillage et de nettoyage pour éliminer les produits cosmétiques, le sébum et la saleté avant de procéder aux soins. Appliquez le gel sur le site de soins en fonction du mode d'utilisation.

Fonction de soin en profondeur

- Appliquez le gel sur la zone de soin, en vous déplaçant lentement et en évitant de rester plus de 3 secondes.

* Ajoutez du gel si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire pendant l'allaitement.

-Un dosage trop faible peut provoquer une irritation de la peau, et l'effet d'allaitement ne peut pas être pleinement joué.


*Lors de l'allaitement, veuillez ajuster complètement le guide à la peau.

* Un soin excessif peut entraîner une surcharge de la peau. Évitez de l'utiliser plus d'une fois par jour.

*Pendant l'allaitement, si la surface du guide est sale et rugueuse, veuillez utiliser un chiffon doux ou un mouchoir en papier pour nettoyer la surface du guide.

*Évitez d'utiliser le guide en cas de maladie.

L'ordre des soins intensifs

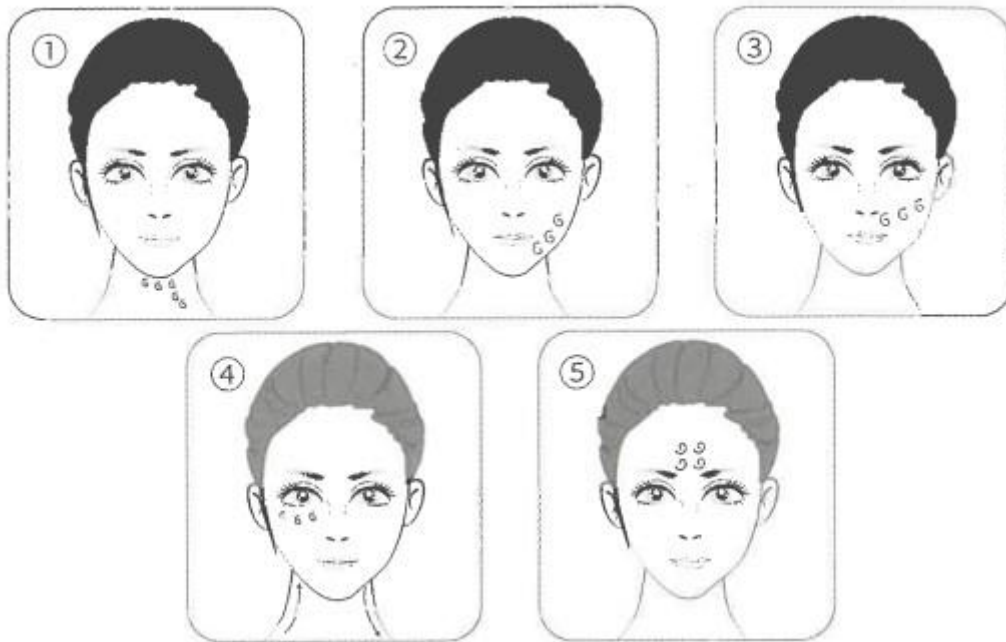

- Effectuez les étapes 1 à 5 2 à 3 fois respectivement.

Soignez chaque partie de la peau avec l'instrument pendant environ 3 secondes dans l'ordre indiqué sur la figure.

Si la quantité de gel est insuffisante, ajoutez-en.

Avis : Ne pas appliquer sur les muqueuses, la paupière supérieure, le globe oculaire, la région de l'oreille et la région de la pomme d'Adam.

Après les soins

Après les soins, pétrissez et massez doucement la peau pour faire pénétrer et absorber le gel restant dans la peau.

Après l'allaitement, essuyez l'instrument à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette de toilette humide pour éliminer les salissures restantes, puis essuyez l'humidité à l'aide d'un mouchoir en papier sec.

Appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pour éteindre l'appareil après utilisation, puis essuyez la surface de l'appareil et conservez-la.

Fréquence d'utilisation

État normal : 3 fois par semaine ; état sensible : 1 fois par semaine ; état sec : 2 fois par semaine ;

état gras : 3-4 fois par semaine ;

- Mode quotidien pour (faible RF + micro-courant EMS + lumière rouge) trois fonctions, peut être utilisé pour les soins quotidiens.

- Mode profond (forte radiofréquence + lumière rouge) deux fonctions, le premier peut être utilisé tous les deux jours, après 2-3 mois, il peut être utilisé deux fois par semaine.

Mode de soins quotidiens

- Appliquez du gel sur le site de soins et soignez-le. Ajoutez du gel supplémentaire si vous vous sentez insuffisante pendant l'allaitement.

- Un dosage insuffisant peut provoquer une irritation de la peau et l'effet d'allaitement ne peut pas être pleinement exploité.

- Lors de l'allaitement, veuillez ajuster complètement le guide à la peau.

- Des soins excessifs risquent d'alourdir la peau. Évitez de l'utiliser plus d'une fois par jour.

- Pendant l'allaitement, si la surface du guide est sale et rugueuse, utilisez un chiffon doux ou un mouchoir en papier pour nettoyer la surface du guide.

- Évitez de l'utiliser si vous vous sentez mal à l'aise.

Séquence d'entretien courant.



① En partant du menton et en suivant les contours du visage, glisser derrière les oreilles. Il passe ensuite par les glandes sub-auriculaires et glisse jusqu'à l'épaule.



② De la pointe du menton, le long des contours du visage, glisser vers les tempes. Puis du nez, en passant par les joues, jusqu'aux tempes. Enfin, de la tête de l'œil, le long de l'œil, jusqu'à la tempe.



③ Des sourcils à la racine des cheveux, en partant du bas vers le haut.

- Effectuez les étapes 1 à 3 respectivement 2 ou 3 fois.
- Bougez lentement et évitez de rester continuellement au même endroit.
- Si vous sentez que la quantité de gel est insuffisante, ajoutez-en.

Après le soin.

- Après le soin, pétrissez et massez doucement la peau pour faire pénétrer et absorber le gel ramianin dans la peau.

- Après l'allaitement, essuyez l'instrument avec un chiffon doux humide ou une serviette pour le visage afin d'éliminer la saleté restante, puis essuyez l'humidité avec un mouchoir en papier sec.

- Après utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. L'écran numérique s'éteint et la surface de l'appareil est nettoyée et sauvegardée.