


**Produit de beauté**  
**Guide de démarrage**  
**rapide**

**Acquérez une meilleure compréhension du produit pour mieux l'utiliser:**

- Structure du produit:

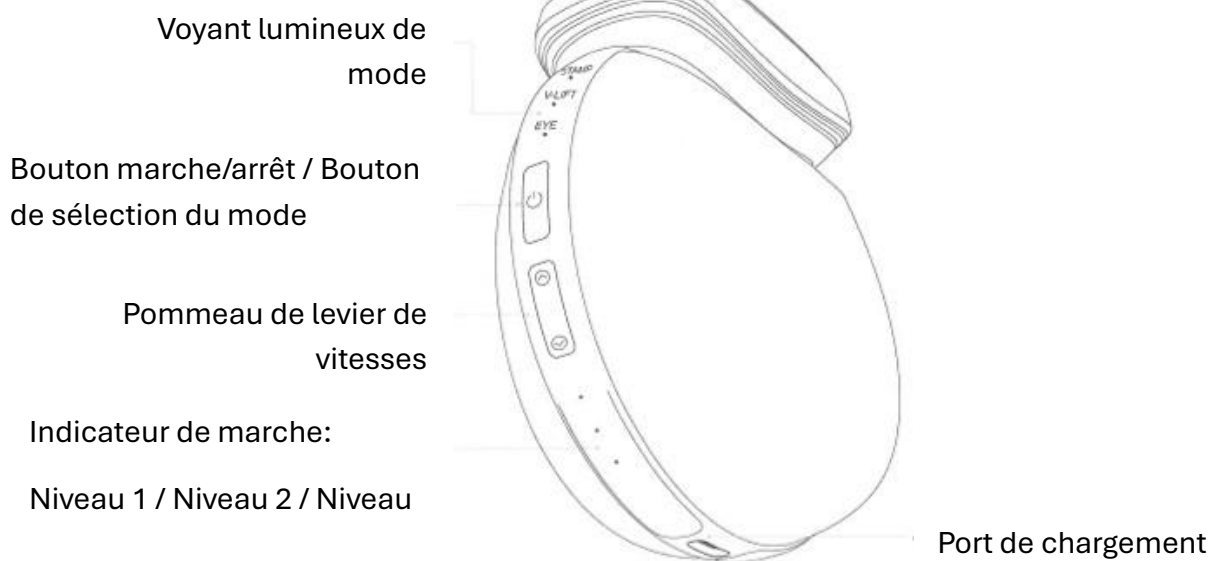

## Préparation à la routine de soins de la peau à l'aide d'un produit de beauté:



1) Veuillez vous démaquiller, vous laver le visage et retirer vos boucles d'oreilles ou autres accessoires avant utilisation.




2) Appliquez une quantité suffisante de gel sur la zone à traiter.



3) Branchez l'appareil. Une fois branché, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde pour le mettre en marche.

Le voyant du mode oculaire et celui de la vitesse 1 s'allument, le mode oculaire (mode par défaut) se met en marche et la LED orange de la tête s'allume.

## Sélection du mode:

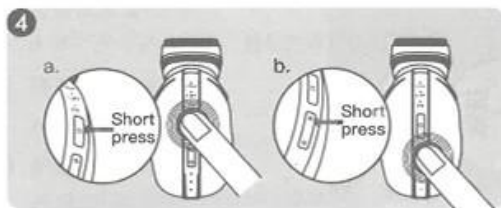

4) Appuyez sur le bouton de changement de mode ; lorsque le voyant de mode s'allume et reste allumé pendant un certain temps, l'appareil passe en mode de fonctionnement.


a) À chaque fois que vous appuyez sur le bouton de changement de mode, le mode change selon le cycle suivant:

EYE → V-Lift → STAMP → EYE

b) Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de changement de vitesse, la vitesse change selon le cycle suivant:

1 → 2 → 3 → 1

## Quelle zone du visage faut-il soigner?:

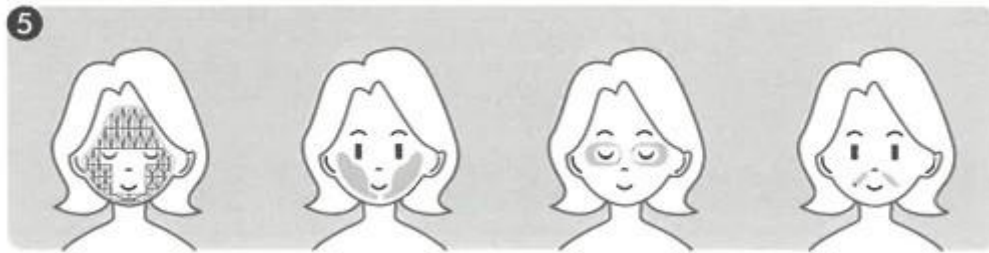

5) Les soins sont dispensés dans les domaines suivants.

### Foire aux questions:

Q: ¿Je peux l'utiliser dans la salle de bains?

R: Ce produit n'est pas étanche, ne l'utilise pas dans la salle de bain.

Q: ¿Une sensation de chaleur sur la peau après utilisation?

R: Cela est dû aux effets thermiques.

Q: ¿Le guide d'utilisation ne transmet pas la chaleur?

R: Une chaleur en profondeur dans la peau grâce à l'effet thermique.

Q: ¿En quoi consiste l'accélération de la marche?

R: Plus l'intensité est élevée, plus la sensation de courant électrique et de chaleur est forte.

- Si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous n'y êtes pas habitué, passez la première vitesse.

Q: ¿Je peux le rincer à l'eau?

R: Ce produit n'est pas étanche ; ne le lavez pas à l'eau, car cela pourrait endommager l'appareil..

Q: ¿Que se passe-t-il si j'oublie d'éteindre l'appareil?

R: Cet appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes s'il n'est ni utilisé ni manipulé.

Q: ¿Puis-je utiliser un appareil de beauté alors que je suis maquillée?

R: Non. Avant de l'utiliser, il faut se démaquiller et se nettoyer le visage pour s'assurer qu'il ne reste ni sébum ni impuretés, afin que la peau soit propre et nette.

Q: ¿Quelle est la fréquence et la durée d'utilisation recommandées?

R: Il est recommandé de l'utiliser 5 à 6 fois par semaine, en adaptant la fréquence en fonction de l'état de la peau.

Il est recommandé d'utiliser le mode souhaité le matin, avant de se maquiller, ou le soir, après le nettoyage. Pour obtenir de meilleurs résultats en matière de soins de la peau, il est recommandé de l'utiliser 5 à 6 jours par semaine, pendant 6 à 10 minutes à chaque fois.

La combinaison scientifique la plus recommandée est l'utilisation du mode V-LIFT et du mode EYE (3 à 4 fois par semaine), avec un lifting et un raffermissement intenses pendant 10 minutes ; le mode STAMP uniquement avec un masque (1 à 4 fois par semaine), traitement de l'ensemble du visage pendant 6 minutes.

\*Afin d'éviter un soin excessif et d'endommager la barrière cutanée, la durée maximale de chaque utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes (sans compter le temps de préparation, comme l'application du gel).

Exemple de routine hebdomadaire avec recommandations:

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
STAMP	VLift+EYE	STAMP	VLift+EYE	STAMP	VLift+EYE	Descanso

Q: ¿Puis-je emporter mon produit de beauté dans un train à grande vitesse ou dans un avion?

R: Si vous le pouvez.

**Veillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité suivantes:**

- Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, effectuez un test de tolérance cutanée à l'intérieur du bras.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du bras, appliquez une quantité suffisante de gel et utilisez le mode V-LIFT sur la zone de test pendant 3 minutes.
- Ce produit peut être utilisé si aucune anomalie cutanée n'apparaît sur la zone de test dans les 24 heures.
- N'utilisez pas ce produit sur les zones ombrées suivantes lors des traitements du visage :
  - La zone située à l'intérieur de l'orbite, comme le globe oculaire, le haut de l'œil, etc.
  - Les lèvres (y compris la lèvre supérieure et inférieure) et l'intérieur de la bouche.



- Veillez à maintenir la pointe de l'électrode en contact avec la peau une fois que vous l'avez correctement positionnée.
- Ne la laissez pas trop longtemps au même endroit et ne la réutilisez pas.
- Ne rincez pas l'appareil à l'eau et ne le nettoyez pas avec des liquides corrosifs, tels que l'alcool, les détergents alcalins ou l'eau de Javel.