

MANUEL D'INSTRUCTIONS

APPAREIL DE BEAUTÉ À RADIOFRÉQUENCE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Avertissement : N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Avertissement : Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.

1. Lors du branchement à un chargeur externe, utilisez un chargeur certifié CCC ou CQC de 5 V = 1 A ou plus.
2. Avant de charger l'appareil, assurez-vous qu'aucun corps étranger, tel que des peluches ou des gouttes d'eau, ne se trouve à proximité de la prise et de la fiche. Nettoyez-les soigneusement avant de brancher l'appareil ; dans le cas contraire, un incendie, une électrocution ou un court-circuit pourrait se produire.
3. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ni à la lumière directe du soleil pendant la charge. Une fois la charge terminée, retirez le chargeur rapidement afin d'éviter toute surcharge et tout accident.
4. Pendant la charge, placez l'appareil à l'horizontale afin d'éviter qu'il ne bascule. 5. Avant utilisation, entraînez-vous sur le dos de votre main pour vous familiariser avec le produit avant de l'appliquer sur votre visage. Une application trop forte pourrait endommager votre peau.
6. Ce produit n'est pas étanche. Ne rincez pas l'appareil directement sous l'eau courante et ne l'immergez pas. Après utilisation, essuyez simplement la tête de massage avec un essuie-tout.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un composant spécifique acheté auprès du fabricant ou d'un centre de service agréé.
8. Lors de l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser une fois que vos soins pour la peau et votre crème contour des yeux ont été absorbés. Ne pas utiliser sur une peau sèche.
9. Cet appareil convient au visage et au cou. Ne pas utiliser sur les zones suivantes : plaies, zones opérées, intérieur de la bouche, paupières, globes oculaires ou contour des yeux (sauf en mode revitalisation des yeux). Évitez tout contact avec la pomme d'Adam pendant l'utilisation. 10. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical.
11. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le placez pas dans des environnements humides, comme les salles de bains, afin d'éviter les courts-circuits ou autres dommages.
12. Ce produit possède une fonction chauffante ; les personnes sensibles à la chaleur doivent donc l'utiliser avec précaution. Lors de l'utilisation de cette fonction, ne restez pas au même endroit plus de 3 secondes.
13. Cet appareil n'est pas adapté aux personnes ayant une force physique réduite, des réflexes lents ou des troubles mentaux (y compris les enfants). Son utilisation, si nécessaire, doit se faire sous la surveillance et la supervision d'un adulte responsable.

L'utilisation de cet appareil sans surveillance est interdite aux nourrissons et aux personnes handicapées.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce produit utilise la chaleur profonde pour un nettoyage du visage en profondeur, revitalisant et adoucissant la peau, et raffermissant les contours du visage. C'est un appareil de beauté multifonctionnel à utiliser à domicile qui combine ions positifs et négatifs, chaleur, vibrations, lumière rouge, lumière bleue et photothérapie EMS.

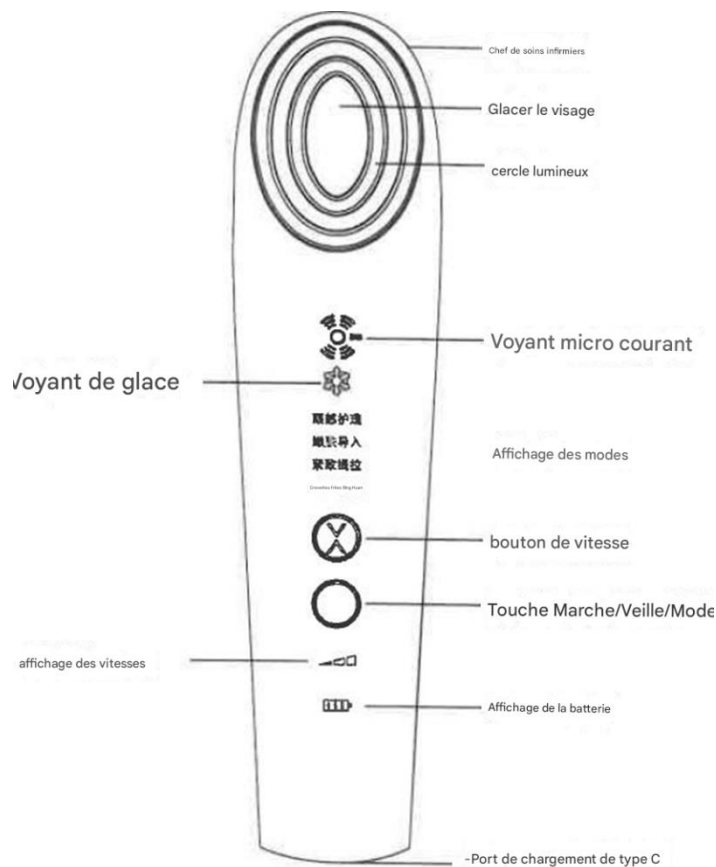

ORGANIGRAMME DE STRUCTURE DU PRODUIT

Nom du produit	Outil de beauté
Modèle du produit	CP-2165
Entrée de charge	5 V-1 A
Tension de fonctionnement	3,7 V =
Puissance d'entrée nominale	5W
Capacité de la batterie	2000 mAh
Temps de charge	Environ 4 heures
Estándares de implementación	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

MODE D'EMPLOI

1. Touche Marche/Arrêt/Mode : Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le mode par défaut est le soin des yeux. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour parcourir les quatre modes : rajeunissement de la peau, raffermissement et lifting, compresse froide et apaisement, et soin des yeux. Appuyez de nouveau sur cette touche pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil et le mettre en veille.
2. Touche Vitesse : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur cette touche pour sélectionner l'une des trois vitesses : moyenne, élevée et faible.
3. Après la mise en marche, l'appareil fonctionne pendant quatre minutes dans le mode actuel, puis passe en mode veille. Après une minute d'inactivité en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement.
4. En mode veille, le voyant du mode actuel clignote. (L'appareil s'éteint automatiquement une fois le cycle de refroidissement terminé.)
5. Lors de l'utilisation de produits de soin, veillez à utiliser des produits solubles dans l'eau. N'utilisez pas de produits à base d'huile ni d'exfoliants, car ils pourraient provoquer des problèmes de peau ou un dysfonctionnement de l'appareil.
6. Toujours utiliser par mouvements de glissement (sauf autour des yeux et en mode compresse froide). Une utilisation continue sur la même zone peut provoquer de légères brûlures cutanées.
7. Vitesse de glissement recommandée sur la peau : 2 cm/s. Si la sensation de chaleur s'intensifie, augmentez la vitesse de glissement.

TEST D'ADAPTATION CUTANÉE

Avant la première utilisation, assurez-vous de tester la compatibilité du produit avec votre peau.

1. Nettoyez l'intérieur de vos bras avec du savon ou un autre produit nettoyant, puis séchez-les soigneusement avec une serviette ou un accessoire similaire (veillez à ce qu'ils soient parfaitement secs).
2. Appliquez vos soins habituels et utilisez l'appareil pendant 3 minutes en mode Lifting et Infusion, au niveau 1.
3. Vérifiez l'absence de réaction cutanée. Si aucune rougeur ni sensation de brûlure n'apparaît dans les 24 heures, vous pouvez utiliser le produit.
4. En cas d'apparition d'une éruption cutanée, de rougeurs, de démangeaisons ou de picotements sur la zone testée, arrêtez immédiatement le test.

PRÉSENTATION DU MODE

Mode Soin des Yeux :

1. Fonction : Vibrations intermittentes, sans émission de lumière.
2. Réglages : Trois réglages.
3. Durée d'utilisation : 1,5 minute par œil, 3 minutes au total.
4. Utilisation recommandée : Sérums contour des yeux, crèmes contour des yeux.
5. Fréquence d'utilisation : Utilisation recommandée une fois par jour.
6. Procédure : Répétez le traitement en effectuant des mouvements de va-et-vient et de tapotements du coin interne de l'œil vers le coin externe.



Remarque :

- (1) Ne pas appliquer le produit sur la même zone pendant plus de 3 secondes.
 - (2) Ne pas appliquer le patch sur le contour des yeux ni le faire glisser vers l'extérieur.
- Modo de cuidado de los ojos:

Mode d'importation pour le rajeunissement de la peau :

1. Fonction : EMS (microcourant) + vibration, émission de lumière rouge.
2. Réglages : Trois réglages.
3. Durée d'utilisation : 6 minutes recommandées.
4. Combinaisons recommandées : Lotion tonique/Lotion/Crème/Masque/Gel.
5. Fréquence d'utilisation : Utilisation quotidienne recommandée (réduire la fréquence d'utilisation en cas de peau sensible).
6. Mode d'emploi : Appliquez une lotion tonique, une lotion tonique, une crème ou une huile essentielle. Pour le visage et le cou, utilisez la tête de massage pour soulever l'appareil et l'insérer, en massant de bas en haut le lo



Mode Raffermissant et Liftant :

1. Fonctions : Vibrations, émission de lumière rouge.
2. Réglages : Trois réglages.
3. Durée d'utilisation : 4 minutes recommandées.
4. Combinaisons recommandées : Lotion tonique/Lotion/Crème/Masque/Gel.
5. Fréquence d'utilisation : 2 à 3 fois par semaine recommandées.
6. Mode d'emploi : Après avoir appliqué le produit sur le visage, massez avec l'embout massant. Massez les contours du visage en effectuant des mouvements liftants de bas en haut.



Mode Compresse Glacée Apaisante :

1. Fonctions : Refroidissement, émission de lumière bleue.
2. Appareil : Aucun.
3. Durée d'utilisation : 4 minutes recommandées.
4. Utilisation et association : Aucune.
5. Fréquence d'utilisation : Après chaque soin recommandé.
6. Mode d'emploi : Peut être utilisé quotidiennement selon les besoins, ou sur le contour des yeux, les poches sous les yeux, etc. Appliquez l'embout massant sur la zone souhaitée.

FALLOS COMUNES Y ANÁLISIS.

DÉFAILLANCES	ANALYSE DES CAUSES	SOLUTION
Il ne démarre pas.	La batterie est déchargée.	Rechargez-la, puis allumez-le.
	Allumez-le sans appuyer sur le bouton marche/arrêt.	Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	Le produit est défectueux.	Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
La tête de massage ne fonctionne pas après la mise en marche.	La tête de massage n'est pas en contact avec la peau.	Repositionnez la tête de massage afin d'assurer un contact optimal avec la peau.
	Le produit est défectueux.	Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble de chargement avant de le nettoyer.
2. Ne rincez pas le corps de l'appareil directement sous l'eau courante. Nettoyez-le avec un chiffon doux et propre ou un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon.
3. La tête de massage de ce produit peut être rincée directement sous l'eau courante. Avant de la rincer, débranchez le chargeur et détachez le câble du corps de l'appareil. Ne la plongez pas dans l'eau pendant une période prolongée. Essuyez-la ensuite avec un essuie-tout propre.
4. N'utilisez pas de solutions corrosives (telles que de l'alcool, des solvants, de l'essence, du dissolvant pour vernis à ongles, etc.) pour nettoyer le corps de l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou des fissures et une décoloration des pièces.
5. Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

MÉTHODES D'ÉLIMINATION DES PILES

Les piles doivent être retirées des appareils avant d'être jetées. L'appareil doit être éteint lors du retrait de la pile. Les piles doivent être éliminées en toute sécurité.

1. À l'aide d'un marteau ou d'un autre outil, tapotez le boîtier de l'appareil pour séparer les parties avant et arrière.

Retirez ensuite complètement la pile interne.

2. Après avoir retiré la pile, ne la jetez pas n'importe où. Placez-la dans le conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Mélangez-la avec vos ordures ménagères afin de ne pas polluer l'environnement.