

INSTRUMENT DE BEAUTÉ AU COLLAGÈNE

MANUEL D'UTILISATION



- Merci d'avoir acheté l'un de nos produits. L'interface utilisateur et les autres illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.
- Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.
- Après lecture, conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.
- Si vous transmettez ce produit à un autre utilisateur, veuillez à lui remettre également ce manuel.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations sur le produit
2. Présentation du fonctionnement
3. Instructions d'utilisation
4. Consignes de sécurité
5. Conditions de garantie

1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques du produit :

Nom du produit : Appareil de beauté au collagène Pao

Modèle : BC912

Dimensions : 95 × 80 × 38 mm

Dimensions de la tête de traitement à matrice dorée : 40 × 15 mm

Poids net : 82 g

Entrée nominale : 5 V = 1 A

Temps de charge : environ 90 minutes


Capacité de la batterie : 500 mAh

Pays de fabrication : Chine

Contenu de l'emballage :

- Appareil de beauté au collagène Pao × 1
- Câble de charge × 1
- Manuel d'utilisation × 1

2. PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT

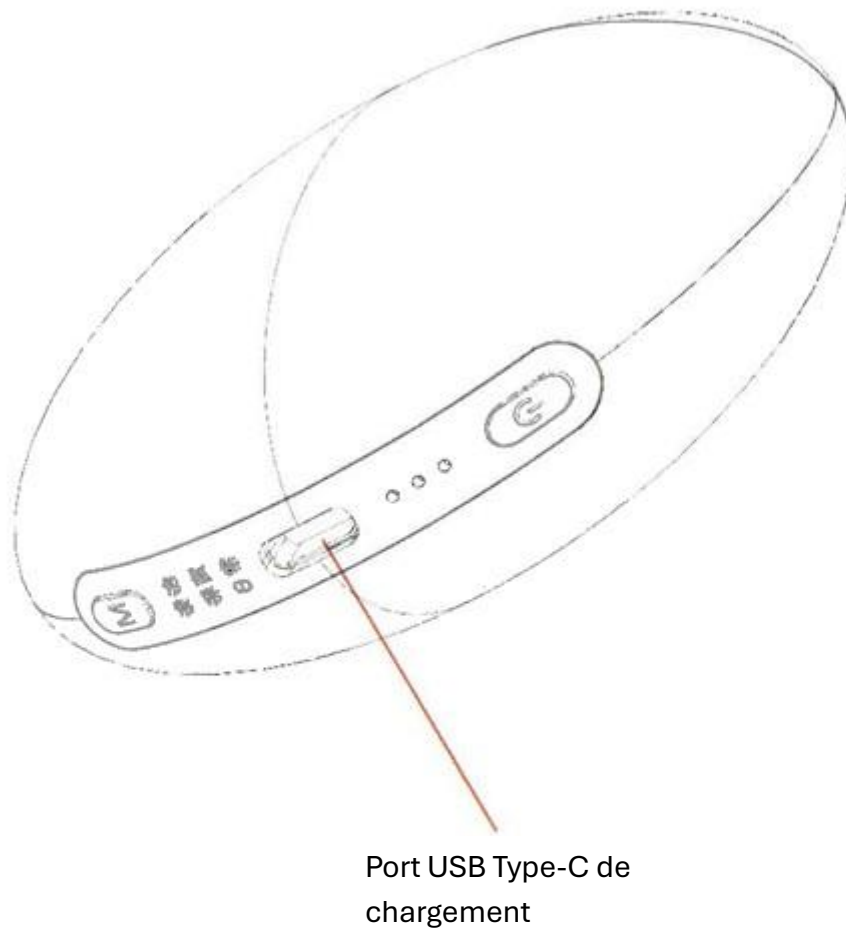

2.1 Charge

- Connectez le câble de charge à un adaptateur secteur compatible 5 V – 1 A, certifié conformément aux normes applicables.
- Branchez complètement le connecteur USB Type-C dans le port de charge de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur à une prise électrique.
- Lorsque le voyant lumineux clignote, l'appareil est en cours de charge.
- Lorsque le voyant reste allumé en permanence, la charge est terminée.

- Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise puis retirez le câble de charge de l'appareil.
- En cas d'utilisation pendant la charge, utilisez un adaptateur d'une puissance minimale de 5 V = 1 A.

2.2 Mise sous tension et arrêt

- Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde pour l'allumer.
- Au démarrage, le mode par défaut est le mode Quotidien avec un niveau d'intensité 1.
- Si l'appareil n'est pas utilisé et n'entre pas en contact avec la peau pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement.
- Pour l'éteindre manuellement, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde.

2.3 Changement de mode

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur la touche M pendant 0,5 seconde pour alterner entre les modes Profondeur et Nettoyage quotidien.

2.4 Sélection des modes [Quotidien] [Profondeur] [Nettoyage]

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur la touche M pour passer d'un mode à l'autre : Quotidien, Profondeur ou Nettoyage.

2.5 Réglage de l'intensité

- L'intensité par défaut au démarrage est le niveau 1.
- Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour modifier l'intensité.
- Les niveaux défilent dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3 → 2 → 1 → 2 → 3...
- Le voyant correspondant indique le niveau sélectionné.
- Le niveau 3 est le plus puissant, le niveau 1 est le plus faible.
- Le niveau 1 est recommandé pour permettre à la peau de s'adapter progressivement.
- Lors de la première utilisation, appliquez le gel entre le pouce et l'index afin d'évaluer l'intensité de la sensation de chaleur.

2.6 Indicateur de batterie

- Pendant le fonctionnement, le niveau de batterie restant n'est pas affiché.
- Lorsque la batterie est déchargée, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Pendant la charge, le voyant clignote lentement.
- Une fois la charge terminée, le voyant bleu reste allumé en continu.


2.7 Avertissement relatif à la batterie

- Ce produit peut être utilisé lorsqu'il est connecté au câble de charge.
- Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, la batterie est probablement faible et doit être rechargée.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Description de l'appareil

- Voyant du mode Nettoyage
- Voyant du mode Profondeur
- Voyant du mode Quotidien
- Bouton d'alimentation / changement de mode

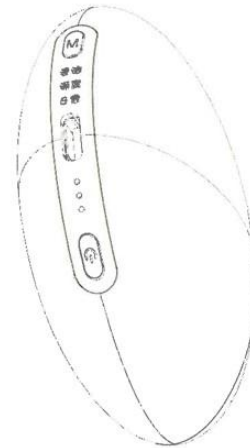

Fonctions des boutons

Bouton d'alimentation :

- Appui long : marche / arrêt

Touche M :

- Appui court : changement de mode (Nettoyage / Profondeur / Quotidien)

Réglage de l'intensité :

- Appui court : modification du niveau d'intensité



4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Informations importantes

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement l'ensemble des consignes de sécurité et respecter les instructions de ce manuel.

Précautions d'utilisation

- Température d'utilisation recommandée : de 10 °C à 30 °C.
- Température de charge recommandée : de 10 °C à 30 °C.
- Avant la première utilisation ou après une longue période sans utilisation, rechargez complètement l'appareil et vérifiez le bon fonctionnement des boutons et des voyants.
- Commencez toujours au niveau d'intensité 1.

Avant utilisation

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
- Démaquillez et nettoyez soigneusement le visage.
- Retirez les objets métalliques, lunettes et lentilles de contact.
- Utilisez uniquement l'appareil à des fins esthétiques.
- Ne plongez pas l'appareil ni sa base de charge dans l'eau.
- N'utilisez pas la base de charge dans un environnement humide.
- Les personnes à peau sensible devraient effectuer un test préalable derrière l'oreille ou à l'intérieur du bras et attendre au moins 15 minutes.

Pendant l'utilisation

- Veillez à ce que la tête de traitement soit entièrement en contact avec la peau.
- En cas de réaction anormale, cessez immédiatement l'utilisation.
- Sans masque cosmétique, appliquez une quantité suffisante de gel conducteur.
- En mode Quotidien, faites glisser continuellement l'appareil sur la peau.
- Si la chaleur est trop importante, ajoutez du gel ou réduisez l'intensité.
- Si la chaleur semble insuffisante, augmentez légèrement la vitesse de déplacement.

- Ne maintenez pas l'appareil immobile sur une même zone pendant une période prolongée.
- Ne regardez pas directement les LED pendant de longues périodes.
- N'appliquez pas la tête de traitement sur les paupières ou à proximité immédiate des yeux.
- La sensation de chaleur peut varier selon la sensibilité individuelle de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur une même zone.

Après utilisation

- Gardez la base de charge et le connecteur propres et secs.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Une légère rougeur ou sensation de chaleur après utilisation est normale.
- En cas d'inconfort important, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Mise au rebut de la batterie

- Ne remplacez pas la batterie vous-même.
- En cas de fuite de batterie, évitez tout contact avec la peau ou les vêtements.
- Avant de jeter le produit, la batterie doit être retirée conformément à la réglementation locale.
- L'appareil doit être éteint et débranché avant toute intervention.

Personnes ne devant pas utiliser ce produit

Ne pas utiliser l'appareil en cas de :

- Maladie cardiaque.
- Hypertension ou hypotension anormale.
- Tumeur maligne.
- Maladie infectieuse ou fièvre.
- Trouble de la coagulation.
- Sensibilité altérée à la douleur.
- Grossesse ou allaitement.

- Adolescence ou période de croissance.
- Implant métallique dans la zone de traitement.
- Cancer, maladie cutanée ou affection médicale grave.
- Système immunitaire affaibli.
- Présence de produits de comblement, implants esthétiques ou injections de toxine botulique dans la zone concernée.
- Herpès récurrent ou affection aggravée par la chaleur.
- Peau très sensible ou allergique.
- Fatigue extrême, état d'ébriété ou prise de somnifères.
- Utilisation d'un stimulateur cardiaque, défibrillateur implantable, poumon artificiel ou autre dispositif médical électronique implanté.

Zones du corps interdites

Ne pas utiliser sur :

- Les yeux, paupières, globe oculaire.
- L'intérieur de la bouche.
- Les muqueuses.
- Les parties génitales.
- Les ganglions lymphatiques du visage ou du cou.
- Les zones présentant une infection, une inflammation ou un eczéma.
- Les cicatrices chéloïdes.
- Les zones récemment traitées par laser, peeling chimique ou chirurgie.
- Les coups de soleil.
- Les lésions pigmentaires suspectes.
- Les verrues ou grains de beauté surélevés.

Si vous avez un doute concernant votre état de santé ou l'utilisation du produit, consultez un professionnel de santé avant toute utilisation.

5. CONDITIONS DE GARANTIE

En cas de problème de fonctionnement du produit, veuillez contacter directement le service après-vente à l'adresse suivante :

service@empresimientosurbanos.es