

APPAREIL DE BEAUTÉ POUR LE COU

MANUEL D'UTILISATION



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : Appareil de beauté IPL pour le cou

Modèle du produit : MJ-400

Tension de charge : 5 V = 1 A

Puissance nominale : 5 W

Paramètres de la batterie : 3,7 V/500 mAh

Temps de charge : 3 heures

Dimensions de l'appareil : 14,2 x 8,2 x 3,9 cm

Dimensions de la base : 8 x 7,3 x 4,3 cm

Méthode de charge : Charge de type C

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



① Bouton de changement: appui long sur l'interrupteur/appui court sur l'interrupteur de mode

② Affichage du mode correspondant

③ Photothérapie couleur

Bouton d'arrêt

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Le buzzer retentit pendant 3 secondes.

Appui court pour changer

1. Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer, par défaut en « Mode nettoyage et éclairage », la barre lumineuse s'allume en vert et le buzzer retentit pendant 3 secondes.
2. Appui court pour passer en « Mode chaud et hydratant », la barre lumineuse s'allume en bleu, le buzzer émet un bip court (température constante de 45 degrés Celsius, contrôle de température NTC)
3. Appuyez brièvement pour passer en « Mode nettoyage en profondeur », la barre lumineuse s'allume en rouge, le chauffage est activé (température constante de 45 degrés Celsius, contrôle de la température NTC).

Pendant le chargement, le voyant bleu avant est allumé, le voyant de fréquence respiratoire est allumé et le voyant bleu reste allumé lorsque l'appareil est complètement chargé.

Moins de 10 % de batterie, voyant rouge clignotant

Arrêt automatique après 20 minutes d'utilisation continue


Allume automatiquement le micro-courant EMS au démarrage

Lumière bleue : peut favoriser la synthèse des protéines et du collagène. Active la peau, la raffermir et la détend, affine les pores, convient très bien aux peaux grasses et améliore les peaux très sensibles.

Lumière rouge : améliore la vitalité cellulaire, accélère la circulation sanguine, favorise la croissance des fibroblastes et du collagène, lisse les rides et ridules, raffermir la peau, éclaircit la pigmentation et réduit les cicatrices.

Lumière verte : peut améliorer la fonction alternée de l'utilisation de l'oxygène cellulaire, favoriser la microcirculation superficielle, débloquent la lymphe, éliminer l'œdème et apaiser et équilibrer la peau. Effet stable.

INTRODUCTION DES MODES

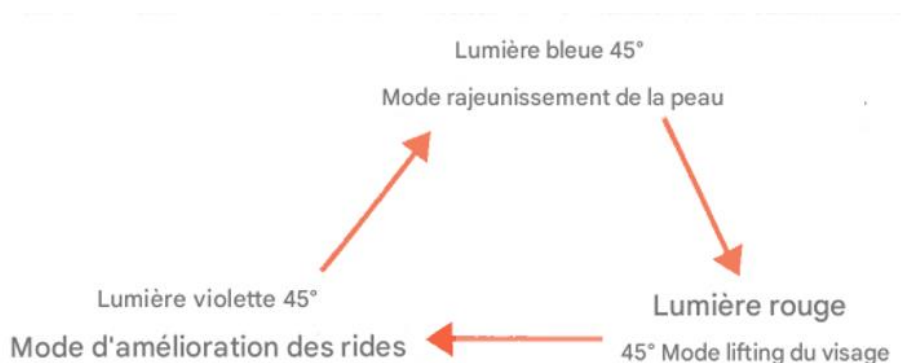

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



EMS



Vibration acoustique



Nettoyage en profondeur



Compresse chaude



Ions positifs et négatifs



Trois modes



Microcourant EMS



Nourrissant en profondeur

INVENTAIRE



produit



Câble de données



instructions

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La tête de massage aérodynamique est spécialement conçue pour le cou. Son design aérodynamique s'adapte à l'ergonomie, transférant l'énergie à chaque centimètre de la peau du cou.
- La vibration de l'onde sonore de la tête de massage est combinée à trois modes, ainsi qu'à une lumière bleue, une lumière rouge et une lumière verte, pour favoriser la circulation sanguine, stimuler les points d'acupuncture du visage et du cou, débloquer les méridiens, améliorer la circulation, favoriser la détoxification et promouvoir une détoxification à long terme. Réduit le vieillissement des cellules épidermiques, atténue les rides du cou, réduit les gonflements, détend les épaules et le cou, thérapie par points d'acupuncture, élimine rapidement la fatigue et rétablit la condition physique.

- Les trois modes sont les suivants : 1. Mode nettoyage et éclairage 2. Mode chaud et hydratant 3. Mode nettoyage en profondeur. Maintenez le bouton enfoncé pour démarrer, et chaque bouton de mode effectuera un cycle. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil.
- Charge de type C, sûre et écologique
- Compact et portable, il peut être utilisé à tout moment et en tout lieu
- Un nouveau concept de design biomimétique pour Dolphin Terrace, raffiné et novateur
- Batterie haute capacité, sans problème de longue durée
- Après une utilisation continue pendant 20 minutes, il s'éteindra automatiquement pour garantir la sécurité.
- Allume automatiquement le micro-courant EMS au démarrage

ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Essayez de conserver ce produit dans un environnement sec et à température normale ou dans une boîte de rangement autant que possible.
2. Ne le surchargez pas afin de ne pas nuire à la durée de vie de la batterie.
3. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, nettoyez-le après l'avoir chargé et placez-le dans la boîte de rangement.
4. L'extérieur du produit peut être nettoyé avec de l'alcool ou un détergent dilué.

Pendant l'utilisation, il est normal que l'appareil soit légèrement chaud, mais pas brûlant.

6. Il est interdit de nettoyer le boîtier directement avec de l'eau.
7. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rechargez la batterie au moins tous les 3 mois.

REMARQUE

- Ne pas utiliser avec des appareils médicaux implantés (tels que des stimulateurs cardiaques), car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou présenter un danger.
- Ne pas utiliser en cas de problèmes cutanés au niveau de la paume, tels que blessures, eczéma, desquamation, etc. Utilisation de ce produit.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits très humides, tels que les salles de bains.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Le démontage, la réparation ou la modification non autorisés de ce produit peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'équipement ou des blessures corporelles.
- Ne donnez pas ce produit à des enfants de moins de six ans afin d'éviter toute blessure corporelle.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SOINS DE LA PEAU

Q : Peut-on l'utiliser tous les jours ? Combien de temps dure-t-il ?

R : Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Il est recommandé de l'utiliser une fois le matin et une fois le soir, pendant 5 à 10 minutes à chaque fois.

Q : Que faut-il prendre en compte avant utilisation ?

R : Nettoyez la peau avant utilisation. Il est préférable de l'utiliser avec une crème pour le cou et une crème de massage. Lors de l'utilisation, tirez et soulevez doucement chaque composant ; n'appliquez pas trop de force pour éviter de l'endommager.

Q : Peut-on l'utiliser sur une peau sujette à l'acné ?

R : Il est recommandé de traiter l'acné avec prudence et d'éviter les dommages secondaires.

Q : Comment le charger et l'utiliser ?

R : Ce produit utilise un port de chargement de type C pour l'alimentation.