

Depiladora IPL - T22

Manual do utilizador



Obrigado por ter adquirido este produto. Para sua conveniência, leia e guarde este manual cuidadosamente antes de o utilizar.

I. Declaração de princípios

O instrumento utiliza tecnologia fotónica avançada de cosmética IPL, que irradia diretamente a pele com luz pulsante para produzir um efeito fotobioquímico. Por um lado, pode fazer regenerar as fibras de colagénio e as fibras elásticas da pele, restaurar a elasticidade da pele, melhorar a microcirculação facial e eliminar ou atenuar as rugas. Por outro lado, a luz pulsada pode penetrar na pele e ser seletivamente absorvida pela massa pigmentada e pelos capilares do tecido, sob a premissa de não destruir o tecido cutâneo normal, a energia térmica melhora a coagulação sanguínea e a massa pigmentada é destruída por decomposição térmica, serve para tratar a dilatação capilar, remover manchas de cor e remover o excesso de pêlos.

II. Limitações de utilização

Informações de segurança importantes: Ler antes de utilizar:

- Consultar o tipo de pele na tabela [imagem de controlo da cor da pele]. Se tiver um tom de pele VI, recomendamos que não utilize este instrumento, pois pode provocar reacções adversas na pele, tais como pigmentação e despigmentação, vermelhidão e inchaço graves ou ardor.



I. Branco, II. Amarelo, III. Castanho claro, IV. Castanho médio, V. Castanho escuro, VI. Castanho muito escuro.

III. Precauções de segurança

• Atenção especial

- Não aplicar nenhum gel ou produto de cuidado (gel de aloé vera, etc.) antes da utilização. Certifique-se de que monta e utiliza o produto de acordo com as regras contidas no Manual de Instruções.

- Leia atentamente o “Manual de Instruções” e guarde-o para consulta futura.

- Se tiver alguma dúvida durante a utilização, contacte o serviço de apoio ao cliente online na língua pretendida.

PERIGO: Conteúdo relacionado com ferimentos pessoais devido a operação incorrecta

AVISO: Conteúdo perigoso devido a operação incorrecta

CUIDADO: Conteúdo relacionado com a segurança pessoal ou danos materiais devido a operação incorrecta.

Nota sobre o símbolo de aviso: Não utilizar na banheira ou no duche.

AVISO: Não utilize este produto perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros utensílios que contenham água.

Mantenha este produto e o adaptador de corrente secos; se o produto apresentar sinais de danos, não toque nas peças internas para evitar choques eléctricos;

- Não introduza quaisquer objectos no produto;
- Não utilize este produto perto dos olhos. O uso de óculos de proteção é uma operação normal que protege o utilizador. Se for utilizado perto dos olhos, os óculos de proteção podem não bloquear completamente a energia e a luz será absorvida pela melanina na íris dos olhos a curta distância;
- Recomendamos a utilização de óculos de proteção sempre que utilizar este produto. Mesmo que a luz não afecte diretamente os seus olhos, a luz intermitente de alta frequência pode afetar a sua visão;
- Quando precisar de se barbear nas costas, pode precisar de um assistente ou parceiro. Esta é a nossa recomendação porque receamos que possa estar em risco se a utilizar sozinho;
- Se os seus pêlos tiverem mais de 1 mm de comprimento, rape-os primeiro. Se o excesso de pêlos absorver o calor na superfície da pele, provocará vermelhidão e inchaço da pele, e os pêlos queimados produzirão um cheiro peculiar, que afectará a sua experiência de utilização do produto;
- Se a pele na área irradiada não estiver seca ou limpa, isso afectará o efeito de utilização e poderá fazer com que o produto não pisque ou pisque acidentalmente;
- Não dispomos de dados sobre a utilização do produto em crianças com menos de 15 anos de idade, pelo que recomendamos que tenha o cuidado de evitar que crianças com menos de 15 anos de idade entrem em contacto com o produto;
- Utilize equipamentos com diferentes intensidades de luz para diferentes partes do corpo, uma vez que as suas tezes são diferentes;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigos, deve ser substituído por um especialista do serviço de assistência do fabricante ou de um serviço semelhante.

AVISO

- Não utilizar antitranspirantes imediatamente após a exposição das axilas;
- Verificar e limpar regularmente o portal de irradiação quanto a sujidade, para evitar queimaduras e avarias durante a utilização;
- Não colocar o portal de irradiação perto de objectos que possam ser facilmente desmagnetizados para evitar avarias e danos;
- Não o utilizar se estiver a bloquear a ventilação, pois pode provocar queimaduras e incêndios;
- Não apontar o portal de irradiação para objectos negros, para evitar um funcionamento anormal da máquina;
- Não iluminar a roupa, o cabelo e outros objectos para evitar queimaduras, descoloração e danos;
- Não utilizar em animais de estimação para evitar ferimentos;
- Não utilizar este produto perto dos olhos para evitar lesões oculares;

- Não utilizar perto de crianças, uma vez que a depilação emite uma luz intensa que pode danificar os olhos das crianças.
- Se a pele ficar ligeiramente quente e vermelha após a utilização, isso é normal;
- Não deixe o produto sem vigilância depois de o ligar, desligue-o imediatamente após a utilização;
- Limpar a pele para garantir que não há resíduos de cabelo na superfície da pele, que está completamente seca e sem substâncias oleosas e manchas;
- Se a diferença de temperatura ambiente for superior a 20 graus (de baixa temperatura para alta temperatura, ou vice-versa), desligar o instrumento e deixá-lo em repouso. Reutilizar após cerca de 2 horas. Não utilizar perto de materiais inflamáveis e explosivos (incluindo pulverizadores e bombas de gasolina, etc.), pois podem provocar incêndios e choques eléctricos,
- A temperatura ambiente para esta depiladora é de 0-45 C. Confirme a temperatura ambiente antes de a utilizar;
- Nas 24 horas seguintes à irradiação, evitar os raios ultravioleta diretos. Não exponha o produto à luz solar direta ou à luz ultravioleta durante muito tempo, pois isso danificará seriamente o produto;
- Se a ventoinha incorporada não funcionar (sem som de zumbido) depois de ligar a alimentação, não a utilize para evitar avarias como fumo e fogo.

Condições e situações inadequadas

Não é adequado para mulheres grávidas, mulheres a amamentar, mulheres em período menstrual, cicatrizes corporais, diabetes, pele frágil e pele sensível à luz;

- Proibida a utilização em pessoas com doença cardíaca grave, hipertensão moderada a grave, tumores malignos, foliculite, doenças infecciosas da pele, pele queimada e perturbações anticoagulantes;

- Não utilizar se tiver um metabolismo anormal do colagénio, incluindo antecedentes de cicatrizes e má cicatrização de feridas; doentes com doenças vasculares, como varizes e vasodilatação na área de irradiação;

- Não utilizar se a pele for sensível à luz e propensa a erupções cutâneas ou alergias; Não utilizar se a zona irradiada estiver infetada, se o doente tiver herpes simples, lesões cutâneas e hematomas;

- Proibida a utilização em doentes com doenças da resposta imunitária (incluindo infeção por VIH, lúpus eritematoso, porfíria, etc.). É proibida a utilização em doentes com distúrbios hemorrágicos e em doentes que utilizem isotretinoína, ácido de frutos (AHA), ácido salicílico (B1A) ou ácido de azálea;

- Utilizar este produto com precaução, especialmente se tiver utilizado depilação química nos 30 dias anteriores, se tiver utilizado produtos de branqueamento da pele num curto período de tempo ou se tiver utilizado ingredientes de vitamina A;

- Não utilizar em simultâneo com produtos à base de óleos essenciais. Certifique-se de que a pele na zona clara está limpa e seca e não utilize loções, lubrificantes e outros cosméticos.

- Se a superfície da pele não estiver limpa e seca, pode afetar a experiência de utilização do produto e até danificá-lo;

- Proibida a utilização durante a toma de medicamentos como a aspirina, a utilização de medicamentos imunossupressores, a isotretinoína e outros medicamentos. É proibida a utilização recente de medicamentos sensíveis à luz (como a tetraciclina).

Não utilizar nas seguintes partes do corpo ou nas seguintes condições

1/ Intra-orais, genitais, membranas mucosas, etc.

2/ Cirurgia plástica

3/ Nódulo na garganta

4/ Globo ocular, pálpebras, à volta dos olhos

5/ Cabeça

6/ Zona de acne

7/ Tatuagem, pintura corporal

8/ Sobrancelhas

9/ Orelha

10/ Mamilos, aureola

11/ Interior do umbigo

(Nota: Esta lista não é definitiva. Se não tiver a certeza se pode utilizar este produto, recomendamos que consulte um médico).

Notas

1. não utilizar o instrumento em peles naturalmente escuras. 2.

2. não se exponha ao sol antes da depilação.

3. Antes de utilizar a depiladora, depile-se primeiro (não utilize o método de depilação química).

4. Certifique-se de que arranca na primeira velocidade quando a utilizar pela primeira vez.

5. Quando se preparar para a depilação, certifique-se de que a saída de luz da unidade está próxima da pele e, em seguida, efectue a operação de depilação.

6. Proibida a utilização em ambientes escuros

7. Usar óculos de proteção durante a utilização


8. Não utilizar sob luz solar direta para evitar falhas na máquina.

9. Não bata nem agite violentamente este produto.

10. Não o desligue diretamente da ficha sem desligar a máquina para evitar danos na máquina.

Aviso: Quando deixar o aparelho de depilação a descansar, certifique-se de que a entrada está virada para cima e o ecrã LCD está virado para baixo, o que é benéfico para a dissipação do calor e o arrefecimento.

IV Introdução à utilização

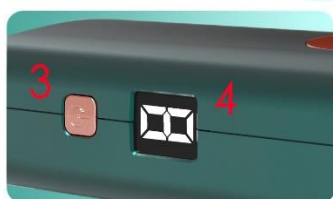

1. saída de luz

2. botão Flash

3. Botão de alimentação

4. Ecrã

Preparação para utilização

1) Remover primeiro os pêlos da superfície da pele. Certifique-se de que molha o pelo, utilize o método de barbear húmido para fazer um bom tratamento da pele com antecedência, de modo a que o pelo sob a superfície da pele possa ser absorvido pela fonte de luz para garantir o efeito do curso de tratamento. Se o pelo não exceder 2 mm, pode utilizar o instrumento sem fazer a barba.

2. Limpar a pele e certificar-se de que não existem pêlos na superfície da pele, que esta está completamente seca e isenta de substâncias oleosas.

3. Antes de utilizar a depiladora, é estritamente proibido aplicar condensador, gel de aloé e outros produtos, caso contrário haverá falta de luz (só é necessário aplicá-lo em equipamentos de grandes salões, mas não para uso doméstico).

Passos para utilização

1. retirar o instrumento, limpar o filtro da cabeça da máquina com um pano macio.

2. Antes de utilizar este instrumento de depilação, humedeça o pelo e raspe-o com uma lâmina.

3. Ligue o adaptador de corrente.

4. Premir o botão "Power" durante muito tempo até o ecrã se ligar (a máquina liga-se quando o conteúdo do ecrã muda).

5. Quando o conteúdo do ecrã muda de “intermitente” para “sempre brilhante”, significa que a depiladora está pronta (o primeiro flash é brilhante, os olhos podem não se adaptar, por favor use óculos para reduzir o desconforto do flash para os olhos).

6. O conteúdo do ecrã de visualização está “sempre ligado” e o aparelho está no estado de “flash pronto”; se o conteúdo do ecrã de visualização não tiver mudado, tente desligar o adaptador de corrente e reiniciar o aparelho.

7. Pressionar a depiladora verticalmente sobre a pele num ângulo de 90º para se certificar de que a pele está em contacto total, e o “número” no ecrã piscará. (Ao utilizar o instrumento de depilação pela primeira vez, haverá uma sensação de “micro-corrente” devido à inconformidade da pele, que é a reação normal do corpo humano, não causada pela fuga da máquina).

8. Depois de a máquina ter sido fixada à pele, prima suavemente o “botão de flash” no instrumento, e o instrumento emitirá um flash, acompanhado de um claro “som crepitante”, e sentirá a sensação de calor produzida pelo flash ao mesmo tempo (se a temperatura for demasiado elevada, significa que a mudança que escolheu é demasiado alta, recomenda-se que comece a partir da primeira mudança).

9. Depois de utilizar o aparelho para enviar um flash, mudar a parte da depilação, quando a alimentação estiver pronta, a “indicação de funcionamento” no ecrã será “sempre ligado”, e pode repetir o “passo 7” acima.

10. Utilize a primeira passagem para testar a pele. Se não houver nenhuma reação adversa após 24 horas, pode ajustar a engrenagem de potência através da “tecla de potência”, à medida que a pressiona, mudará para a seguinte, existem 5 engrenagens, quando chegar à última, voltará à primeira.

11. Siga estes passos e conseguirá depilar a parte que pretende. Geralmente, um curso de depilação é efectuado três vezes. Primeiro, depila-se todo o corpo, depois a segunda e a terceira vez para partes específicas.

12. Ligue o flash o mais próximo possível do último flash para tratar completamente a parte desejada.

13. Após a utilização, prima a tecla “Power” durante muito tempo para desligar e a fonte de alimentação será cortada. Finalmente, limpar a cabeça e a fuselagem.

Instruções de acordo com o modelo

- Modo de ação contínua (para grandes áreas, como braços, pernas), Coloque a saída de luz sobre a área a tratar na pele e aperte totalmente a pele. Neste momento, a lâmpada do sensor de depilação acende-se, indicando que a cabeça de lâmpada está em pleno contacto com a pele. Prima longamente o botão de flash e comece imediatamente a mover o instrumento lenta e uniformemente sobre a pele, mantendo o ajuste com a pele, e o flash será emitido num intervalo definido. Nesta altura, mantenha a depiladora em movimento e deslize-a para a frente e para trás duas vezes na área onde a depilação é necessária. Para garantir que a área a depilar é coberta de forma uniforme e evitar a falta de luz.

Conselho:

A velocidade do movimento da pele pode ser ajustada de acordo com a velocidade do flash, de modo a que a cobertura seja mais uniforme, a frequência do flash seja mais rápida na primeira velocidade, a frequência do flash seja mais lenta na segunda velocidade e, quanto mais alta for a velocidade, mais lenta será a velocidade de saída da luz.

Modo de reprodução individual

Adequado para pequenas áreas, como os dedos, coloque a saída de luz sobre a área a ser tratada na pele e ajuste-a completamente à pele. Neste momento, a luz do sensor de depilação acende-se, indicando que a cabeça da lâmpada está em contacto total com a pele. Prima brevemente o botão de flash para iniciar a depilação. Mova a cabeça de lâmpada para a próxima parte da pele, aguarde que a luz branca da lâmpada do sensor de depilação se acenda e prima o botão de flash para repetir a operação acima por ordem. Sugestão: Em qualquer altura durante o processo de depilação, se a sua pele começar a ficar sobreaquecida, basta fazer uma pausa de alguns segundos, deixar a saída de luz arrefecer novamente e retomar a depilação.

Tabela de referência do ciclo terapêutico**Entre 1-4 semanas**

Utilizar 2-3 vezes por semana

Mais de 75% dos cabelos começam a cair naturalmente.

5-6 semanas

Utilizar duas vezes por semana

Os pêlos novos caem e o crescimento é inibido.

7-8 semanas

Utilizar uma vez por semana

Os pêlos tornam-se mais finos e menos, já não voltam a crescer.

Mais de 8 semanas

Utilizar 1-2 vezes por semana

Utilizar seletivamente em função do estado de crescimento do cabelo como manutenção.

Cuidados posteriores**Precauções após a depilação**

- Recomenda-se que se evite o contacto com a água durante 6 horas após a operação de depilação, após o que se pode utilizar água hidratante para hidratar a zona irradiada.
- Não utilizar perfumes, máscaras ou cosméticos que contenham pérolas foscas após a depilação da pele. Evitar a exposição aos raios UV durante 24 horas após a depilação e, se necessário, aplicar um protetor solar.

- Os banhos de sol podem provocar o escurecimento da pele. Por conseguinte, durante a utilização deste produto, ter o cuidado de não se expor ao sol, e o tempo de reparação das queimaduras solares não deve ser inferior a 1 semana.

- Não é permitido o bronzamento superficial durante a operação de depilação.

- Se necessitar de uma cirurgia plástica após a depilação (apenas para a zona depilada), consulte o seu médico.

- Se se sentir mal, consulte o seu médico.

Limpeza e manutenção

- Para garantir os melhores resultados e uma vida útil mais longa do produto, limpe-o antes e depois de cada depilação para evitar a acumulação prolongada de pêlos e poeiras.

- Antes de iniciar a limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada para o deixar arrefecer.

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do espelho de saída de luz.

- Guardar o aparelho num local seco, sem pó e a uma temperatura entre 10 e 60° C.

- Nunca lavar o produto ou os acessórios em torneiras ou máquinas de lavar louça.

- Não utilizar esponjas de aço, produtos de limpeza abrasivos (pasta de dentes, etc.) ou líquidos corrosivos (gasolina, óleo de motor, acetona, etc.) para limpar o produto. Nota: Se a água não limpar bem, pode adicionar algumas gotas de álcool de alta concentração (não mais de 96%) à água para humedecer o pano e limpar as partes acima mencionadas.

Proteção do ambiente Ao eliminar o produto, não o deite fora juntamente com o lixo doméstico geral, mas envie-o para um centro de reciclagem designado.

Resolução de problemas comuns

Este capítulo descreve os problemas mais comuns que podem ocorrer durante a utilização deste instrumento. Se não conseguir resolver o problema com as informações seguintes, contacte o centro de apoio ao cliente do seu país.

*** O aparelho/adaptador de corrente aquece durante a utilização.**

Trata-se de um fenómeno normal.

Não é necessária qualquer ação.

*** Coloquei a depiladora na minha pele e o número piscou, mas a ventoinha de arrefecimento começou a funcionar.**

A proteção contra sobreaquecimento foi activada.

Quando a proteção contra sobreaquecimento é activada, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar continuamente. Não desligue a unidade, aguarde que arrefeça durante mais de 15 minutos antes de continuar a utilizá-la.

***Flash Ready] pisca, mas o dispositivo não pisca quando o botão de flash é premido.**

É necessário reiniciar o dispositivo. Reinicie o dispositivo, desligue-o e volte a ligá-lo.

*** Cheira mal quando se utiliza o aparelho.**

É provável que não tenha removido completamente os pêlos na zona de tratamento. Estes pêlos podem arder e produzir um mau cheiro.

Retire os pêlos da superfície da pele antes de utilizar este aparelho.

***Durante o tratamento, a pele fica mais sensível do que o habitual/dor insuportável durante a utilização do aparelho.**

A intensidade da luz que está a utilizar é demasiado elevada

Verifique se selecionou a intensidade de luz correta. Se necessário, reduzir a intensidade.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Não pode ser considerado como uma garantia:

O não funcionamento de acordo com os requisitos do Manual, operações e manutenção resultando em danos ao produto 2.

2. Danos no produto causados por mau funcionamento durante a utilização (lavagem, imersão, etc.).

3. Danos no produto causados por exceder o ambiente de uso permitido (como alta temperatura, corrosão, etc.).

4. Danos no produto causados por forças externas anormais (queda, extrusão, impacto, etc.).

5. Danos no produto causados por força maior natural (incêndio, inundaç o, queda de raio, etc.).

6. Danos causados pela utiliza o de pe as e extens es n o provenientes da f brica. Em caso de altera o da lista acima, prevalecem os regulamentos relevantes recentemente formulados pela nossa empresa ou as leis e regulamentos relevantes actualizados pelo Estado.