

## Instrucciones de uso rápido del anillo de mano.

### Introducción de componentes



Nota: Al probar el ECG, debe contactar los tres electrodos con la piel

### Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteligente

Para el uso inicial, saque la pulsera y cárguela con el cargador correspondiente. Al cargar, el brazalete se encenderá automáticamente (el método de carga se muestra en la siguiente figura: saque el cuerpo del brazalete de la correa para la muñeca y conecte el puerto de carga al puerto USB estándar. El voltaje de carga es de 5V.) aparece en los pergaminos al cargar y la rejilla estará llena cuando esté completamente cargada.



Desenchufe la correa primero  
(toque el extremo del botón)



Enchufe en el puerto USB de carga  
(tenga en cuenta la dirección)

### Instalar pulsera APP

Escanee el código QR o ingrese a los principales mercados de aplicaciones Descargue e instale "SmartHealth"



23 Español

Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y superior; Android 4.4 y superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

Abre el cliente móvil para configurar información personal.

Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en el dispositivo de enlace

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

Encuadración completada

### Interfaz de la función principal


#### Interfaz principal / dial

En el menú de la APLICACIÓN, haga clic en "Selección de tema" Cambiar la interfaz principal / dial. Dials vienen en 5 estilos



#### Podómetro / Distancia / Calorías

Ver pasos, distancia, calorías quemar en tiempo real Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los datos de movimiento.

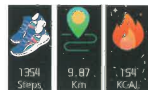

#### Interfaz de temperatura corporal

Cambie a la interfaz de prueba de temperatura a ingrese la temperatura en tiempo real datos de medición y prueba Se puede actualizar al tipo de aplicación Sincrónicamente y tiene un informe de prueba.

Nota: Al medir la temperatura corporal, el electrodo inferior debe estar completamente en contacto con la piel (prueba después de 10 minutos de uso) La prueba de temperatura corporal se verá afectada por la diferencia de temperatura ambiental y solo sirve como recordatorio de advertencia. Consulte el equipo médico profesional y el diagnóstico del médico para obtener más detalles.



24 Español

### Monitoreo de la frecuencia cardiaca

Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardiaco, Monitorización de la frecuencia cardiaca, en tiempo real. Los datos de medición se pueden sincronizar con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.



### Monitoreo de la presión arterial

Cambiar al monitor de presión arterial. interfaz, para entrar en tiempo real de monitoreo. Los datos de medición se pueden sincronizar con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

Nota: Al medir la presión arterial, por favor mida por la postura correcta. El resultado de la prueba es para referencia solo, no puede ser utilizado como datos médicos.



### Interfaz de oxígeno en la sangre

Cambie a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre para ingresar la detección de oxígeno en sangre en tiempo real y datos de medición Se puede actualizar a la APLICACIÓN sincrónicamente, y hay un informe de prueba.



### Monitor de frecuencia respiratoria

Cambie a esta interfaz, la pulsera automáticamente activa la medición de frecuencia respiratoria única modo, después de la vibración del dispositivo, puede leer el datos de medición en el dispositivo.



### Interfaz de movimiento

Mantenga presionado para ingresar a la detección del modo deportivo.

Hay múltiples modos de deporte para elegir.

Mantenga presionado para ingresar al modo deportivo, haga clic para cambiar modos, mantenga presionado para iniciar el cálculo, mantenga presionado para detener



### Interfaz de mensajes

En la interfaz de mensajes, puede ver el mensaje en tres segundos en Chang'an. Después de ver el mensaje, mantenga presionado para Tres segundos para salir.



### Rechazar llamadas por pulsera

Después de conectarse con el móvil, la llamada será se muestra en el dispositivo. Mantenga presionado el toque área para rechazar las llamadas entrantes.



### Página de cierre


En la página de apagado, mantenga presionado el pulsera por más de tres segundos para sacudirse.



### Otros recordatorios de funciones

La función de recordatorio debe configurarse para habilitar recordatorio en el lado de la aplicación y mantenga el móvil teléfono y la pulsera conectados con éxito en Bluetooth. El mensaje es un recordatorio de vibración.


### ECG Correct testing method

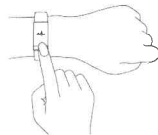

ECG Correct testing method tips: please wear the bracelet tightly, keep the metal sheet on the back of the bracelet close to the skin, and touch the metal sheet on the front of the bracelet with your fingers

## Detección de ECG

Detecta ECG haciendo clic en "Inicio" en la aplicación. Entrará en automático modo de detección después de comenzar. Presione su dedo contra el electrodo lateral de la pulsera, no mueva su dedo y quedarse quieto.

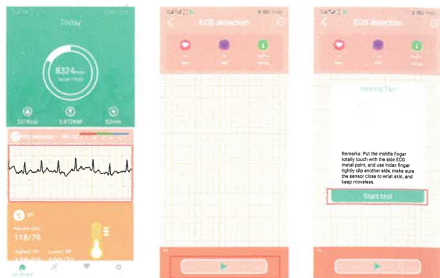

## Precauciones

1. No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A. El tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas.
  2. No cargar después de que el dispositivo fue dañado por agua.
  3. Este es un producto de monitoreo electrónico, datos recibidos. A partir de ella no se puede utilizar como base médica.
- Punta de la prueba de la presión 4. Blood:
- a) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la prueba.
  - b) Mantenga el dispositivo a la misma altura que su corazón, y no hables mientras estás probando.



27 Español

## Notice d'utilisation rapide de l'anneau

### Introduction de composant



Remarque: lors du test de l'ECG, vous devez contacter les trois électrodes avec la peau

### Recharge et activation de la montre

Pour la première utilisation, veuillez sortir le bracelet et le charger avec le chargeur correspondant. Lors de la charge, le bracelet s'allumera automatiquement (la méthode de charge est illustrée dans la figure suivante: retirez le corps du bracelet de la dragonne et branchez le port de charge sur le port USB standard. La tension de charge est de 5V.) La grille de la batterie s'affiche en défilement lors du chargement et la grille sera pleine lorsqu'elle sera complètement chargée.



### Installer le bracelet APP

Scannez le code QR ou entrez dans les principaux marchés d'applications Téléchargez et installez "SmartHealth"



28 Française