
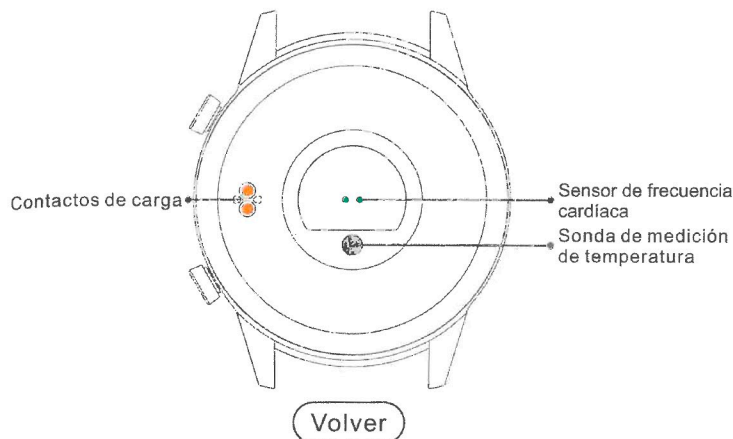



1. Apariencia

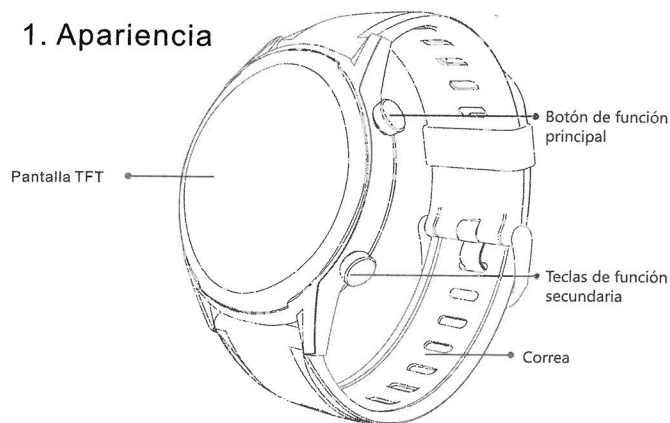

2. Instrucciones de carga

Gracias por elegir el brazalete de salud inteligente de nuestra compañía. Lea el manual detenidamente cuando lo use por primera vez. Primero, mantenga presionado el botón de función principal durante 5 segundos para encenderlo. Si la energía es insuficiente o la energía está agotada, cárguela primero.

Después de conectar la base de carga, conecte la interfaz USB (como un host de computadora, fuente de alimentación móvil o adaptador de corriente estándar) para cargar, y el voltaje de entrada es 5V1A o 5V2A. Como se muestra a continuación:

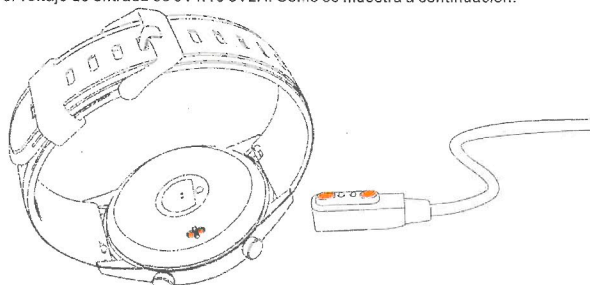

3. Descargar APP y emparejamiento Bluetooth

(1) Instalar la APLICACIÓN

Antes de usar este dispositivo, descargue e instale la APLICACIÓN, escanee el siguiente código QR con su teléfono móvil y seleccione el software correspondiente para instalar de acuerdo con el sistema del teléfono móvil.




También puede buscar "FitCloudPro" en la tienda de aplicaciones Apple AppStore e instalarlo. Los teléfonos Android se pueden descargar en otras tiendas, como buscar "FitCloudPro" en el mercado de Android para descargar e instalar. (Sistema compatible: iOS8.4 + Android4.4 o superior)

(2)Emparejamiento Bluetooth

1. Cuando los nuevos usuarios usan el dispositivo por primera vez, después de descargar e instalar la APLICACIÓN, primero registran sus identidades personales, inician la APLICACIÓN y se registran según sea necesario. Después de completar el registro, ingrese el número de cuenta y la contraseña para iniciar sesión.

2. Establezca el estado de Bluetooth del teléfono móvil para que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido, luego abra la APLICACIÓN y haga clic-> "Dispositivo" Haga clic-> "Agregar dispositivo" Haga clic-> "BUSCANDO", seleccione el nombre de Bluetooth del brazalete correspondiente-> "Enlace exitoso".

(Como se muestra a la derecha)

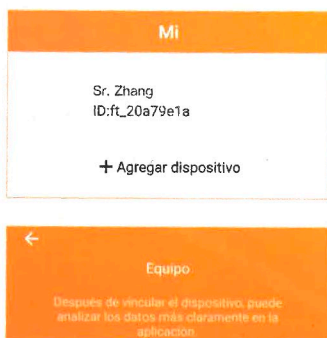

4. Selección de interfaz principal


Como se muestra en la figura a continuación, en la interfaz principal, mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos para seleccionar diferentes interfaces principales, hay 5 interfaces principales para la selección. *Observaciones: la quinta interfaz principal se puede cambiar libremente en el lado de la aplicación.



Consideraciones especiales al medir la temperatura corporal:

1. Para la primera medición, úselo durante 5 minutos antes de realizar la medición de temperatura.
2. Se recomienda medir la temperatura corporal por debajo de la temperatura de 18-32 °C, de lo contrario, afectará la precisión de la medición.

5. Método de operación

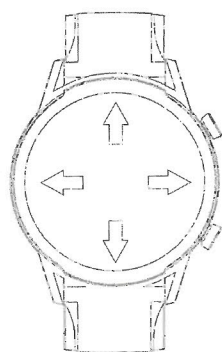

Botones de funciones principales: 1. Mantenga presionado durante 5 segundos para encender / apagar. 2. Presione brevemente para encender / apagar la pantalla.

Botón de función auxiliar: en estado de pantalla brillante, mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar a la interfaz deportiva; presione brevemente para iniciar / pausar el modo deportivo

Mantenga presionada la pantalla: mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos en el estado del dial principal para seleccionar diferentes diales.

Deslice hacia la izquierda: ingrese a la siguiente interfaz.

Deslizar hacia la derecha: retroceder o ir a la página anterior.

Deslizar hacia arriba: en el estado del dial principal, deslice hacia arriba la pantalla para ver rápidamente la información.

Deslizar: en el estado del dial principal, deslizando la pantalla puede ingresar rápidamente al menú de configuración.

6. Parámetros del producto

Control principal: RTK8762C
Pantalla: pantalla a color IPS de 1.3 "
Resolución: 240 * 240 ppp
Clasificación a prueba de agua: IP67
Material de pulsera: TPU
Sensor: STK8321
Sensor de temperatura: CT1711

Chip de frecuencia cardíaca: HX3300
Capacidad de la batería: 240 mAh
Tiempo de trabajo: aproximadamente 5-7 días.
Método de sincronización: Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C
Lista de embalaje: ◊ Host ◊ Cable de carga
◊ Correa para la muñeca ◊ Manual de instrucciones
Compatibilidad: iOS8.4 + Android4.4 o superior

7. Idioma de la aplicación

La aplicación admite idiomas: chino simplificado, inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y más idiomas se agregarán en el futuro.

8. Función principal

- ⌚ Tiempo
- 👣 Pasos
- 📏 Distancia
- 🔥 Calorías
- 🌙 Monitoreo del sueño
- 🏃 Múltiples modos de deporte.
- 👤 Recordatorio sedentario
- 🔌 Cerrar
- ☎ Recordatorio de llamada
- ✉ Información push (puede recibir WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk y otra información)
- 👤 Monitoreo de temperatura corporal
- ⌚ Temporizador
- 📞 Encuentra teléfono
- 🌐 Multi-idioma
- ❤ Monitoreo de la frecuencia cardíaca
- 🩺 Control de la presión arterial
- 💧 Monitoreo de oxígeno en la sangre

9. Asuntos que requieren atención

1. No golpee severamente al host.
2. No toque productos químicos como benceno y diluyentes.
3. No se acerque a campos magnéticos fuertes ni a estaciones de descarga eléctrica.
4. Evite la luz directa o los aparatos de calefacción.
5. No desmonte, repare ni modifique usted mismo.
6. Deseche el embalaje, las baterías y los productos electrónicos viejos, clasifíquelos adecuadamente.
7. No se debe usar al tomar un baño. (La temperatura no puede superar los 45 °C)