


Masajeador Ocular OT – 019

Modo de empleo

Preparación antes del uso

- Si lleva lentes de contacto, quíteselas antes.
- Asegúrese de que el mando de masaje suave se mantiene limpio (si se ensucia, puede limpiar la suciedad con un paño húmedo). No debe ser utilizado por personas con lesiones o inflamación ocular.

Método de colocación de las pilas

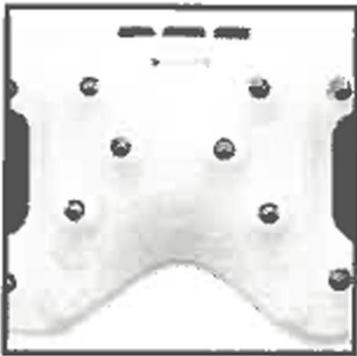


- Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en el interior de la unidad principal y coloque dos pilas tamaño AAA en su interior.
 - Cierre la tapa del compartimento de las pilas.
- (Asegúrese de que los terminales positivo y negativo de las pilas son correctos.)

Método de funcionamiento

Conecte la alimentación, pulse el interruptor ON-OFF, entre en el modo de ciclo automático, de acuerdo con los 9 programas

1. La secuencia de masaje de conmutación automática, si pulsa el interruptor de nuevo, la máquina se detiene inmediatamente
2. pulse la tecla de función, cambiar automáticamente un programa.
3. pulse la tecla de tiempo "TIME", puede elegir 3 minutos o 5 minutos de temporización.

Diagrama de la estructura del producto

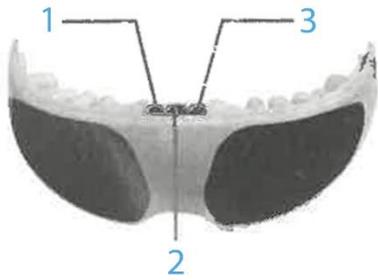

1. Botón de selección de tiempo TIME
2. Botón de selección de MODO
3. Botón de encendido / apagado ON/OFF

Método de funcionamiento en situación atípica

- Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, se debe sacar la batería del interior.

* Cuando se produce una situación anormal

Dispositivo no enciende o no cambia los modos

Analice las causas:

¿Está agotada la batería?

¿Son correctos los terminales positivo y negativo de la batería?

Solución:

-Sustituya la batería

-Chequee si los terminales positivo y negativo están correctamente instalados

-Vuelva a poner en funcionamiento

- Se recomienda realizar una limpieza profunda cada trimestre, y hay un orificio de carga en el interior, que se puede extraer para la limpieza

Tipos de programas

1. Modo automático: utilizar este modo, puede cambiar la siguiente imitación 2-8 modos repetidamente dentro de un segundo coincidente.
2. Manga fuerte: temblando fuerte
3. Marcha media: temblor manga fuerte
4. Engranaje débil: baja temblando fuerza
5. Suave: cada 5 segundos habrá olas de movimiento de bloqueo.
(Se pueden alternar fluctuaciones fuertes y débiles)
6. cómodo: cada 5 segundos habrá oleadas de movimiento bastante.
(Fluctuaciones fuertes y débiles pueden ser alternadas)
7. Fuerte Qi rush cada 5 segundos habrá un masaje de pulso.

Precauciones de seguridad

No debe ser usado en las siguientes circunstancias:

- * Personas con lesiones o inflamación ocular.
- * Personas con lesión en la cabeza.
- * Personas con quemaduras en la piel alrededor de los ojos o con enfermedades.

Advertencia

1. No coloque el dispositivo en el suelo ni lo sumerja en agua.
2. No utilice este producto en lugares de alta temperatura como baños.
3. Evite la luz solar directa para evitar el envejecimiento prematuro o el amarilleamiento de la silicona blanda.
4. Se recomienda a los pacientes con alta miopía que lo utilicen bajo la supervisión de un médico.
5. Los niños menores de ocho años deben utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto.

6. Cuando utilice este producto, no camine al aire libre.
7. No utilice este producto mientras conduce un coche.
8. No utilice posterior a una cirugía ocular o lesión, por favor suspenda el uso, una vez se encuentre totalmente recuperado podrá retomar su uso.
9. Cualquier transformación, desmontaje o reparación sólo debe ser realizado por personal técnico autorizado.

Descripción del estado de las sustancias tóxicas y peligrosas en los productos:

De acuerdo con el "Reglamento sobre el Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos", enumeramos los nombres y contenidos de las sustancias tóxicas o peligrosas que pueden contener nuestros productos eléctricos:

Nombre de la pieza Motor

Componentes electrónicos Piezas metálicas

Esta tabla se basa en las disposiciones de SJ/T 11364-2014 compilación de referencia del periodo de uso de protección medioambiental Asociación China de Electrodomésticos emitida por la Asociación Eléctrica de China [2016] N° 36 "orientación sobre el periodo de uso de protección medioambiental de los electrodomésticos".

El contenido de las sustancias tóxicas y peligrosas en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del requisito de límite especificado en GB/126572-201 1.

El contenido de sustancias tóxicas y peligrosas en al menos un material homogéneo del componente supera el requisito de límite especificado en Gzhimen 26572-201 1.

Indica que el producto tiene un período de uso de protección medioambiental de 10 años en condiciones normales de trabajo y uso.