



1. Apparence

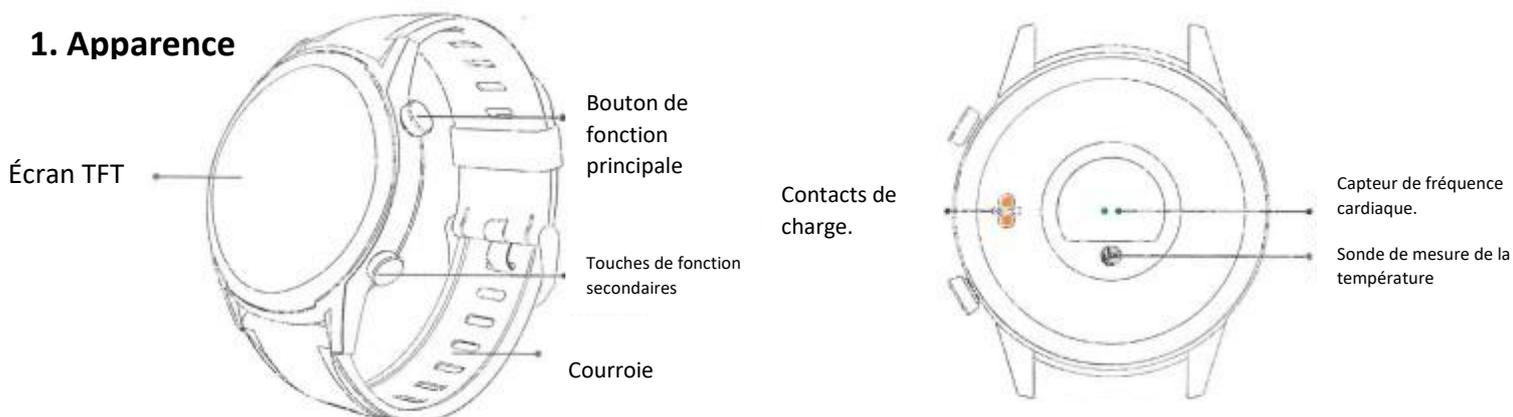

2. Instructions de chargement

Merci d'avoir choisi le bracelet de santé intaligent de notre société. Veuillez lire attentivement le manuel lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de fonction principale et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer. Si l'alimentation est insuffisante ou si le courant est coupé, chargez-le d'abord.

Après avoir connecté la base de chargement, connectez l'interface USB (comme l'hôte de l'ordinateur, l'alimentation mobile ou l'adaptateur d'alimentation standard) pour charger, et la tension d'entrée est de 5V1A ou 5V2A. Comme indiqué ci-dessous:

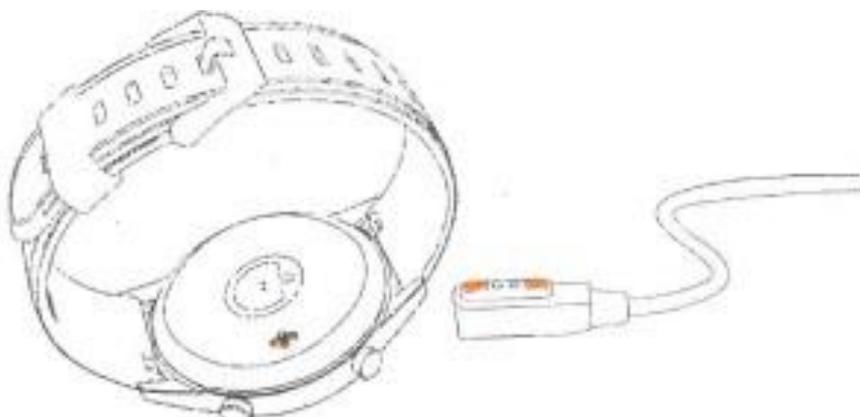

3. Téléchargez l'APP et l'appairage bluetooth.

1) Installer l'APPLICATION

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez télécharger et installer l'APPLICATION, scannez le code QR suivant avec votre téléphone portable et sélectionnez le logiciel correspondant à installer :- selon le système de votre téléphone portable.



Vous pouvez également rechercher "FitCloudPre" dans l'AppStore d'Apple et l'installer. Les téléphones Android peuvent être téléchargés à partir d'autres boutiques, par exemple en recherchant "FitCloudPro" sur le marché Android pour le télécharger et l'installer. (Système pris en charge : iOS8.4 AndrMc14.4 ou supérieur)

2)Appariement Bluetooth

1. lorsque les nouveaux utilisateurs utilisent l'appareil pour la première fois, après avoir téléchargé et installé "l'APPLICATION, ils enregistrent d'abord leurs identités personnelles, gèlent l'APPLICATION et s'enregistrent comme il se doit. Après avoir terminé l'enregistrement, entrez le numéro de compte et le mot de passe pour vous connecter.

2. Réglez le statut Bluetooth du téléphone mobile de sorte que le Bluetooth du téléphone mobile soit activé, puis ouvrez l'APPLICATION et cliquez sur "Périphérique" Cliquer-> "Ajouter un périphérique" Cliquer-> "RECHERCHE", sélectionner le nom du Bluetooth qui correspond au bracelet-a. Cliquez sur "Lien réussi".

(Comme indiqué ci-dessous)



4. Sélection de l'interface principale

Comme le montre l'image ci-dessous : sur l'int2.do, appuyez et maintenez l'écran pendant quelques secondes pour sélectionner différentes interfaces principales, il y a 5 interfaces principales à sélectionner.

pour sélectionner différentes interfaces principales, il y a 5 icônes pour la sélection.

Remarques: La cinquième interface principale peut être modifiée librement du côté de l'application.



Température de la peau:
Température de la peau humaine
en temps réel.




Temperatura corporal:
Temperatura corporal en tiempo
real.

Considérations particulières lors de la mesure de la température corporelle :

1. pour la première mesure, portez-le pendant 5 minutes avant de prendre la mesure de la température.
2. Il est recommandé de mesurer la température corporelle en dessous de 15-32 °C, sinon la précision de la mesure sera affectée.

5. Mode de fonctionnement

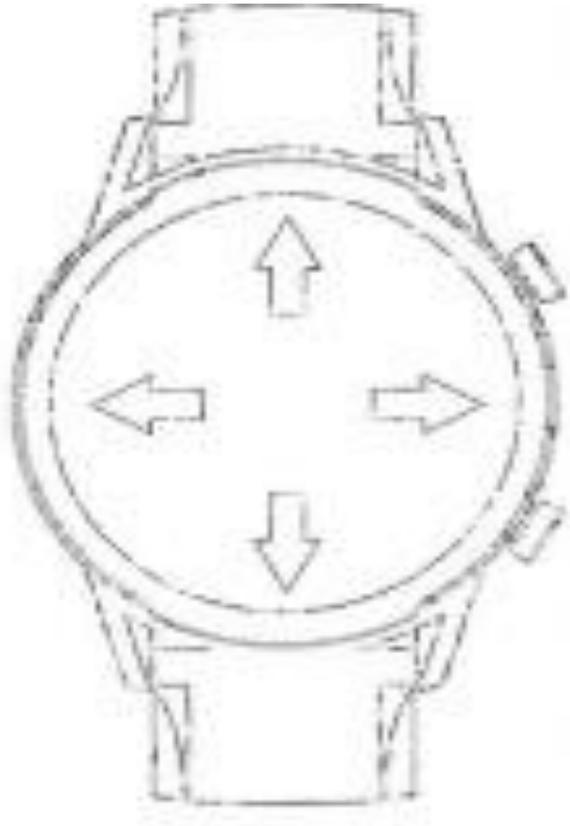

Boutons de fonction principale : Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour allumer / éteindre. 2. appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran.

Bouton de fonction auxiliaire : en état d'affichage lumineux, appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour entrer en t-press and hold pendant 3 secondes pour entrer en t-press and hold.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans l'interface sport, appuyez brièvement pour démarrer / mettre en pause le mode sport.

Changement de cadran : appuyez et maintenez l'écran : appuyez et maintenez l'écran pendant 3 secondes en état de cadran principal pour sélectionner différents cadrans.

Glissez à gauche : entrez dans le suivant [alertan.

Glissez vers la droite : revenez en arrière ou allez à la page précédente.

Balayage vers le haut : dans l'état de composition principal, balayez l'écran vers le haut pour afficher rapidement des informations.

Balayage : En mode de composition principale, un balayage de l'écran permet d'accéder rapidement au menu des paramètres.

6. Paramètres du produit

Contrôleur principal : RTK8762C

Affichage : écran couleur IPS 1,3"

Résistance à l'eau : IP67

Capteur : STK8321

Capteur de température : CT1711

Capacité de la batterie : 240 mAh

Temps de travail : environ 5 à 7 jours

Température de travail : -10 °C - 50 °C

Liste d'emballage : o Hôte Câble de chargement Courroie de poignet a Manuel d'instruction

Compatibilité : 1058.4 + Android4.4 ou supérieur

Résolution : 240 * 240 dpi

Matériau du bracelet : TPU

Puce de fréquence cardiaque : HX3300

Méthode de synchronisation : Bluetooth 5.0

7. Langue de la application

L'application prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, russe et d'autres langues seront ajoutées à l'avenir.

8. Fonction principale

 Météo	 Rappel sur la sédentarité	 Minuterie
 Étapes	 Fermer	 Trouver le téléphone
 Distance	 Rappel d'appel	 Multi-langue
 Calories	 Informations sur le push (Wechat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, kakaotalk et autres informations)	 Surveillance de la fréquence cardiaque
 Surveillance du sommeil	 Surveillance de la température corporelle.	 Surveillance de la pression sanguine
 Plusieurs modes sport		 Surveillance de l'oxygène dans le sang

9. Questions nécessitant une attention particulière

1. Ne pas choquer sévèrement l'hôte.
2. Ne pas toucher les produits chimiques tels que le benzène et les diluants.
3. Restez à l'écart des champs magnétiques puissants et des stations de chocs électriques,
4. Eviter la lumière directe ou les appareils de chauffage.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier par vous-même.
6. Jetez les vieux emballages, les piles et les produits électroniques, trie-les correctement.
7. Ne pas utiliser lors d'un bain (la température ne doit pas dépasser 45 °C).