

Istruzioni per l'uso rapido dell'anello manuale

Introduzione del componente



Nota: quando si esegue il test dell'ECG, è necessario contattare i tre elettrodi con la pelle

Ricarica e Attivazione dell'Orologio

Per l'uso iniziale, estrarre il bracciale e caricarlo con il caricabatterie corrispondente. Durante la ricarica, il bracciale si accenderà automaticamente (il metodo di ricarica è mostrato nella figura seguente: estrarre il corpo del bracciale dalla cinghia da polso e collegare la porta di ricarica alla porta USB standard. La tensione di ricarica è di 5 V.) La griglia della batteria viene visualizzata in rotoli durante la ricarica e la griglia sarà piena quando è completamente carica.




Installa il bracciale APP

34 Italiano

Scansiona il codice QR o entra nel mercato delle applicazioni principali Scarica e installa "SmartHealth"



Requisiti del dispositivo: iOS 9.0 e versioni successive; Android 4.4 e versioni successive, Bluetooth 4.0 è supportato.

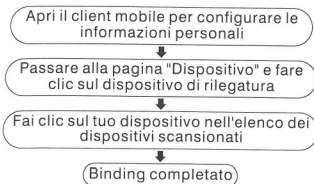

Interfaccia della funzione principale

Interfaccia principale/quadrante

Nel menu APP, fai clic su "Selezione tema" Cambia l'interfaccia / quadrante principale. I quadranti sono disponibili in 4 stili



Pedometro/distanza/calorie

Visualizza passi, distanza, calorie brucia in tempo reale. Può sincronizzare le app in tempo di visualizzare i dati di movimento.



Interfaccia temperatura corporea

Passare all'interfaccia del test di temperatura su inserisci la temperatura in tempo reale dati di misurazione e test Può essere aggiornato al tipo di APP in modo sincrono e ha un rapporto di prova. **Nota:** quando si misura la temperatura corporea, l'elettrodo inferiore deve essere completamente a contatto con la pelle (test dopo 10 minuti di usura) il test della temperatura corporea sarà influenzato dalla differenza di temperatura ambientale e serve solo come promemoria di avvertimento. Per i dettagli, consultare le attrezzature mediche professionali e la diagnosi del medico



Monitoraggio della frequenza cardiaca

Passare all'interfaccia del monitor della frequenza cardiaca, Monitoraggio della frequenza cardiaca, in tempo reale I dati di misurazione possono essere sincronizzati con l'APP in tempo reale con un rapporto di prova.



Monitoraggio della pressione arteriosa


Passare al monitor della pressione sanguigna interfaccia, per accedere al monitoraggio in tempo reale. I dati di misurazione possono essere sincronizzati con l'APP in tempo reale con un rapporto di prova.

Nota: quando si misura la pressione sanguigna, si prega di misurare dalla postura corretta. Il risultato del test è per riferimento solo, non può essere usato come dati medici



Interfaccia ECG

Tenere premuto il tasto touch sul Interfaccia ECG e poi L'altro la mano tocca l'elettrodo anteriore del bracciale, tre elettrici Contatto con la pelle estremamente pieno, test, rapporto di prova Il rapporto deve essere visualizzato nell'APP.

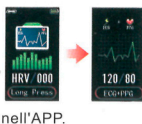

36 Italiano

Interfaccia ossigeno nel sangue

Passare all'interfaccia del test dell'ossigeno nel sangue per accedere il rilevamento in tempo reale dell'ossigeno nel sangue e dati di misurazione Può essere aggiornato all'APP in modo sincrono e c'è un rapporto di prova.



Interfaccia di movimento

Premere a lungo per accedere al rilevamento della modalità sport. Esistono diverse modalità sportive tra cui scegliere.

Premere a lungo per accedere alla modalità sport, fare clic per passare modalità, premere a lungo per avviare il calcolo, premere a lungo per interrompere.



Funzione di monitoraggio del sonno

Quando si addormenta, il bracciale lo farà determina automaticamente di entrare nel sonno modalità di rilevamento e rilevamento automatico Calcola la qualità del sonno quando dormi sonno profondo / leggero / veglia per tutta la notte; dormire dati possono essere aggiornati contemporaneamente all'APP.

Nota: i dati relativi al sonno sono disponibili solo quando si indossa il bracciale per dormire.



Informazioni meteorologiche

La pagina del tempo mostra il tempo attuale, l'aria informazioni di qualità e condizioni di domani. Le informazioni meteorologiche devono essere collegate il client prima che i dati possano essere ottenuti Se ti disconnetti per molto tempo, le informazioni meteorologiche non verrà aggiornato.

Nota: per il posizionamento è necessario attivare le impostazioni del telefono



37 Italiano

Interfaccia del messaggio

Nell'interfaccia del messaggio, è possibile visualizzare messaggio in tre secondi a Chang'an. Dopo aver visualizzato il messaggio, tenere premuto per tre secondi per uscire.



Altre funzionalità

Nella pagina Altre funzioni, premere e tenere premuto per tre secondi per entrare in basso pagina del menu per ulteriori operazioni.



Accendi il polso

Nel menu APP, fai clic su "Accendi il polso per schiarire lo schermo" Accesso o spento.



Pagina di regolazione della luminosità

Nella pagina di regolazione della luminosità, tenere premuto il tasto touch per regolare la luminosità dello schermo.



Pagina di ripristino

Nella pagina di ripristino del bracciale, premere a lungo il tasto touch per ripristinare il bracciale.



Pagina di spegnimento

Nella pagina di spegnimento, premere a lungo il bracciale per più di tre secondi a scollarsi di dosso.



Torna alla pagina

Nell'interfaccia di ritorno, tenere premuto il tasto a sfioramento per tornare al menu precedente.



38 Italiano

Altri promemoria delle funzionalità

La funzione promemoria deve essere impostata per abilitare promemoria passa sul lato APP e mantieni il cellulare telefono e bracciale collegati correttamente Bluetooth. Il messaggio è un promemoria sulle vibrazioni.

Precauzioni

1. Non utilizzare un adattatore con corrente superiore a 2A. Il tempo di ricarica è di circa 2 ~ 3 ore
2. Non caricare dopo che il dispositivo è stato danneggiato dall'acqua
3. Questo è un prodotto di monitoraggio elettronico, i dati ricevuti da esso non può essere utilizzato come base medica.
4. consiglio di prova pressione del sangue:
 - a) Mantenere il corpo rilassato e tranquillo durante i test.
 - b) Tenere il dispositivo alla stessa altezza del cuore, e non parlare mentre stai testando



39 Italiano