

Istruzioni per l'uso rapido dell'anello manuale

Introduzione del componente



Nota: quando si esegue il test dell'ECG, è necessario contattare i tre elettrodi con la pelle

Ricarica e Attivazione dell'Orologio

Per l'uso iniziale, estrarre il bracciale e caricarlo con il caricabatterie corrispondente. Durante la ricarica, il bracciale si accenderà automaticamente (il metodo di ricarica è mostrato nella figura seguente: estrarre il corpo del bracciale dalla cinghia da polso e collegare la porta di ricarica alla porta USB standard. La tensione di ricarica è di 5 V.) La griglia della batteria viene visualizzato in rotoli durante la ricarica e la griglia sarà piena quando è completamente carica.



Scollegare prima la cinghia
(toccare l'estremità del pulsante)



Collegare alla porta USB di ricarica
(notare la direzione)

Installa il bracciale APP

33 Italiano

Scansiona il codice QR o entra nel mercato delle applicazioni principali Scarica e installa "SmartHealth"



Requisiti del dispositivo: iOS 9.0 e versioni successive; Android 4.4 e versioni successive, Bluetooth 4.0 è supportato.

Apri il client mobile per configurare le informazioni personali

Passare alla pagina "Dispositivo" e fare clic sul dispositivo di rilegatura

Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati

Binding completato

Interfaccia della funzione principale

Interfaccia principale a quadrante

Nel menu APP, fai clic su "Selezione tema" Cambia l'interfaccia / quadrante principale. I quadranti sono disponibili in 5 stili



Pedometro/distanza/calorie

Visualizza passi, distanza, calorie brucia in tempo reale Può sincronizzare le app movimento.



34 Italiano

Interfaccia temperatura corporea

Passare all'interfaccia del test di temperatura su inserisci la temperatura in tempo reale dati di misurazione e test Può essere aggiornato al tipo di APP in modo sincrono e ha un rapporto di prova.

Nota: quando si misura la temperatura corporea, l'elettrodo inferiore deve essere completamente a contatto con la pelle (test dopo 10 minuti di usura) Il test della temperatura corporea sarà influenzato dalla differenza di temperatura ambientale e serve solo come promemoria di avvertimento. Per i dettagli, consultare le attrezzature mediche professionali e la diagnosi del medico



Monitoraggio della frequenza cardiaca

Passare all'interfaccia del monitor della frequenza cardiaca, Monitoraggio della frequenza cardiaca, In tempo reale i dati di misurazione possono essere sincronizzati con l'APP in tempo reale con un rapporto di prova.



Monitoraggio della pressione arteriosa

Passare al monitor della pressione sanguigna interfaccia, per accedere al monitoraggio in tempo reale. I dati di misurazione possono essere sincronizzati con l'APP in tempo reale con un rapporto di prova.

Nota: quando si misura la pressione sanguigna, si prega di misurare dalla postura corretta. Il risultato del test è per riferimento solo, non può essere usato come dati medici



Interfaccia ossigeno nel sangue

Passare all'interfaccia del test dell'ossigeno nel sangue per accedere il rilevamento in tempo reale dell'ossigeno nel sangue e dati di misurazione Può essere aggiornato all'APP in modo sincrono e c'è un rapporto di prova.



Monitor della frequenza respiratoria

Passa a questa interfaccia, il braccialeto automaticamente attiva la misurazione della frequenza respiratoria singola modalità, dopo la vibrazione del dispositivo è possibile leggere il dati di misurazione sul dispositivo.



Interfaccia di movimento

Premere a lungo per accedere al rilevamento della modalità sport. Esistono diverse modalità *sports* tra cui scegliere.

Premere a lungo per accedere alla modalità sport, fare clic per passare modalità, premere a lungo per avviare il calcolo, premere a lungo per interrompere.



Interfaccia del messaggio

Nell'interfaccia del messaggio, è possibile visualizzare messaggio in tre secondi a Chang'an. Dopo aver visualizzato il messaggio, tenere premuto per tre secondi per uscire.



Rifiuta le chiamate per braccialeto

Dopo la connessione con il cellulare, la chiamata sarà mostrato sul dispositivo. Premere a lungo il tocco area per rifiutare le chiamate in arrivo.



Pagina di spegnimento


Nella pagina di spegnimento, premere a lungo il braccialeto per più di tre secondi a scrollarsi di dosso.



Altri promemoria delle funzionalità

La funzione promemoria deve essere impostata per abilitare promemoria passa sul lato APP e mantieni il cellulare telefono e braccialetto collegati correttamente Bluetooth. Il messaggio è un promemoria sulle vibrazioni.

ECG Metodo di prova corretto

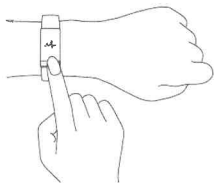

consigli: si prega di indossare il braccialetto stretto, mantenere la lamiera sul retro del braccialetto vicino alla pelle e toccare la lamiera sul davanti del braccialetto con le dita

Rilevazione ECG

Rileva ECG facendo clic su "Avvia" su APP. Entrerà automaticamente modalità di rilevamento dopo l'avvio. Premere il dito contro il elettrodo laterale del braccialetto, per favore non muovere il tuo dito e fermati.



Precauzioni

1. Non utilizzare un adattatore con corrente superiore a 2A. Il tempo di ricarica è di circa 2 ~ 3 ore
2. Non caricare dopo che il dispositivo è stato danneggiato dall'acqua
3. Questo è un prodotto di monitoraggio elettronico, i dati ricevuti da esso non può essere utilizzato come base medica.
4. consiglio di prova pressione del sangue:
 - a) Mantenere il corpo rilassato e tranquillo durante i test.
 - b) Tenere il dispositivo alla stessa altezza del cuore, e non parlare mentre stai testando

