




Smartwatch AH0072 - F800

Manuale di istruzioni


1. Descrizione del prodotto e parti

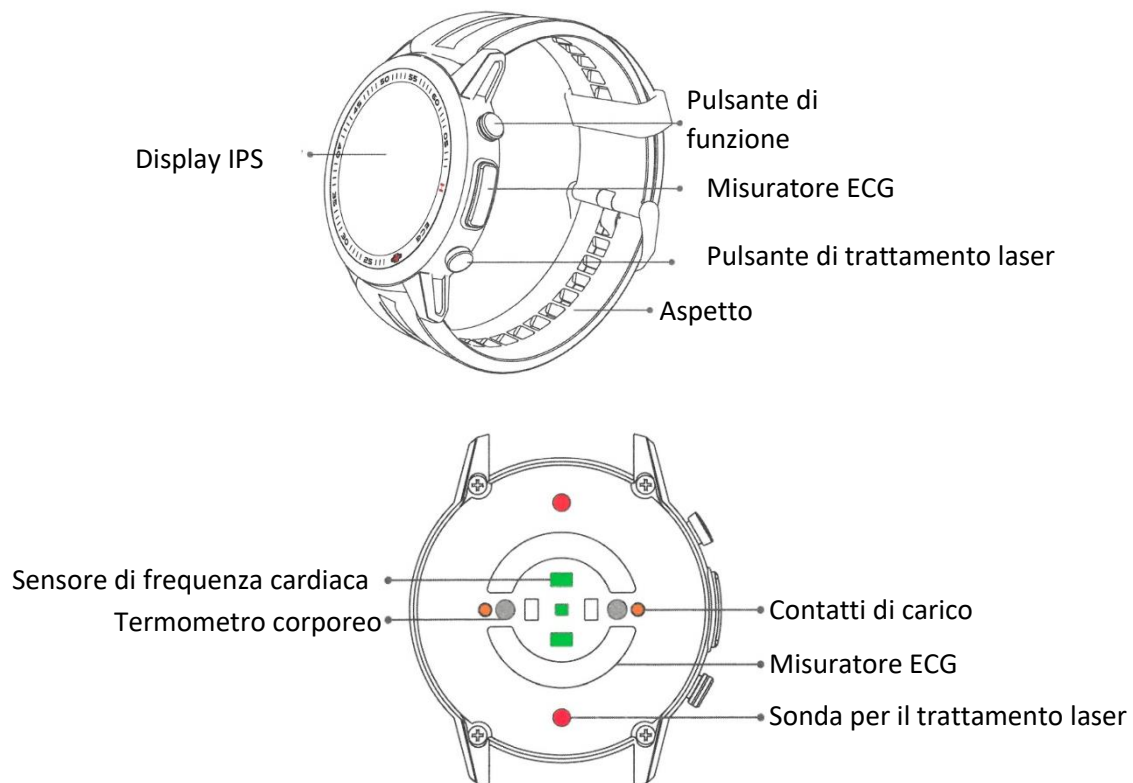

2. Istruzioni per il caricamento

Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente per la salute. Leggere attentamente il manuale quando lo si utilizza per la prima volta. Per prima cosa, tenere premuto il pulsante di funzione principale per 3 secondi per accenderlo. Se la batteria è scarica o esaurita, caricarla. Dopo aver collegato la base di ricarica, inserire l'interfaccia USB (in una porta USB del computer, in un alimentatore mobile o in un adattatore di corrente standard) per la ricarica. La

tensione di ingresso deve essere di 5V1A o 5V2A. Come mostrato di seguito:

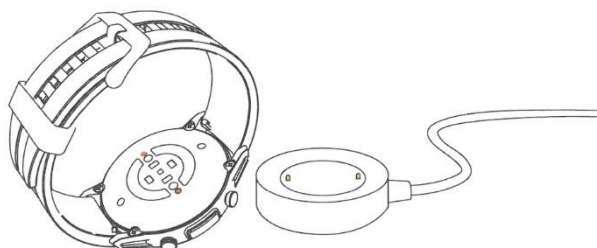

3. Download dell'APP e accoppiamento Bluetooth

(1) Installare l'APP

Prima di utilizzare questo dispositivo, scaricare l'APP e installarla, scansionare il seguente codice QR con il telefono cellulare e selezionare il software corrispondente da installare in base al sistema del telefono cellulare.

È anche possibile cercare "SmartHealth" nell'AppStore di Apple e installarlo. Sui telefoni Android cercate "SmartHealth" nel mercato Android per scaricarlo e installarlo.

(Sistema compatibile: iOS8.2+Android4.4 e successivi)



(2) Accoppiamento Bluetooth

1. Quando un utente utilizza questo dispositivo per la prima volta, dopo aver scaricato e installato l'APP, deve prima registrare la propria identità personale. Avviare l'APP e registrarsi come richiesto; dopo aver completato la registrazione, inserire l'account e la password per accedere.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono, quindi aprire l'APP per connettersi all'orologio e completare l'accoppiamento.

4. Selezione dell'interfaccia principale

Come mostrato nella figura sottostante, nell'interfaccia principale, premere a lungo lo schermo per 1 secondo per selezionare le diverse interfacce principali; quando il dispositivo è collegato all'APP, è possibile selezionare l'interfaccia principale anche nell'APP.



Quando si misura la temperatura corporea, prestare particolare attenzione a:

1. Per la prima misurazione, indossarlo per 5 minuti prima di misurare la temperatura.

2. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea in condizioni ambientali di 18-32°C, altrimenti l'accuratezza della misurazione sarà compromessa.

5. Trattamento laser

Principio ed effetto del trattamento: la lunghezza d'onda di 650 nm rilasciata dalla sonda laser può attivare efficacemente i globuli rossi, migliorare la fluidità e la viscosità del sangue, decomporre e dissolvere rapidamente i trombi e alcune tossine e ottenere un effetto di pulizia del sangue; alleviare efficacemente l'alta viscosità del sangue, l'iperlipidemia, l'ipertensione e il diabete in continuo aumento.

1. Nell'interfaccia principale, premere brevemente il pulsante di trattamento per accedere all'interfaccia di trattamento (come mostrato nell'immagine).



2. Nell'interfaccia principale, premere a lungo il pulsante di trattamento per 3 secondi per regolare l'intensità del laser e il tempo di trattamento (come mostrato nell'immagine).



6. Metodo di misurazione ECG

Come mostrato nell'immagine sottostante, quando si misura l'ECG, il dito tocca l'intera traccia ECG e il corpo si rilassa. Cercare di rimanere fermi durante la misurazione fino al termine della stessa (il tempo di misurazione è di circa 60 secondi). Se la forma d'onda dell'ECG è disordinata o si discosta notevolmente, è possibile Se la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna sono imprecise, misurarle nuovamente. Se la pelle è bassa o secca, inumidire la pelle della mano e ripetere la misurazione, mantenendo il foglio conduttore dell'ECG in buon contatto con la pelle (l'ECG può essere misurato anche online nell'APP).



7. Metodo di funzionamento

Pulsanti delle funzioni principali:

- (1) Premere a lungo per 3 secondi per accendere.
- (2) Premere brevemente per accendere/spegnere il display.

Pulsante di trattamento: nello stato di composizione principale, premere brevemente per accedere all'interfaccia di trattamento, premere a lungo per 3 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione del trattamento.

Premere a lungo lo schermo: tenere premuto lo schermo per 1 secondo nello stato di composizione principale per selezionare diversi quadranti.

Far scorrere il dito verso sinistra: Inserire l'interfaccia successiva. Passare il dito a destra: tornare indietro o alla pagina precedente. Scorrimento verso l'alto: nello stato di composizione principale, è possibile visualizzare rapidamente le informazioni scorrendo verso l'alto sullo schermo. Scorrimento verso il basso: nello stato di composizione principale, scorrere verso il basso lo schermo per accedere rapidamente al menu delle impostazioni.



8. Parametri del prodotto

Controllo principale: 8762DW

Display: Schermo a colori IPS da 1,30 pollici

Risoluzione: 360*360dpi

Grado di impermeabilità: Ip67

Sensore di frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue: 2703+4404

Sensore di temperatura corporea: Ct1711

Sensore ECG: TI ADS1291

Sonda di trattamento laser: GLD-650W005-2

Capacità della batteria: 280 mAh

Tempo di lavoro: circa 7-9 giorni

Metodo di sincronizzazione: Bluetooth 5.0

Materiale del braccialetto: silicone/altro

Temperatura di lavoro: -10 °C - 50 °C

Compatibilità: iOS8.2 e successivi / Android 4.4 e successivi

9. Idioma de la APP

L'APP supporta le seguenti lingue: cinese semplificato, inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, russo e altre lingue saranno aggiunte in futuro.

10. La función principal



Tempo



Passi



Distanza



Calorie






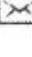








Dormire



Modalità Sport



Controllo della temperatura corporea

-  Promemoria sulla sedentarietà
-  Spegnimento
-  Promemoria per le chiamate
-  A visualizzazione delle notifiche (può ricevere WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, ecc.)
-  Misurazione ECG
-  Trattamento laser
-  Timer
-  Trova il telefono
-  Cambiare la lingua
-  Frequenza cardiaca
-  Pressione sanguigna
-  Ossigeno nel sangue

11. Precauzioni

1. Non colpire il display dell'orologio.
2. Evitare sostanze chimiche come il benzene o il diluente.
3. Si prega di stare lontani da forti campi magnetici e da stazioni di scosse elettriche.
4. Si prega di evitare la luce diretta o gli apparecchi termici.
5. Non smontare, riparare o modificare da soli.
6. Smaltite i vecchi imballaggi, le batterie e i prodotti elettronici, differenziandoli correttamente.
7. Non è indicato indossarlo quando si fa il bagno (la temperatura non deve superare i 45°C).