


Massaggiatore oculare OT- 019

Istruzioni per l'uso

Preparazione prima dell'uso

- Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle prima.
- Mantenere pulito il pulsante di massaggio morbido (se si sporca, è possibile pulirlo con un panno umido). Non utilizzare da persone che soffrono di danni o infiammazioni agli occhi.

Metodo di inserimento della batteria

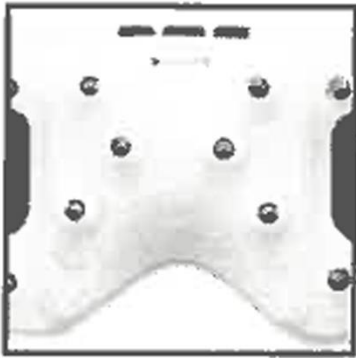

- Aprire il coperchio delle batterie all'interno dell'unità principale e inserire due batterie AAA nel vano batterie.

- Chiudere il coperchio del vano batterie.


(Assicurarsi che i terminali positivo e negativo delle batterie siano corretti.)

Modalità di funzionamento

Accendere l'apparecchio, premere l'interruttore ON-OFF, entrare in modalità ciclo automatico, secondo i 9 programmi.

1. Se si preme nuovamente l'interruttore, la macchina si arresta immediatamente.
2. premere il tasto funzione per cambiare programma automaticamente.
3. premere il pulsante "TEMPO" per scegliere una durata di 3 minuti o 5 minuti.

Schema della struttura del prodotto

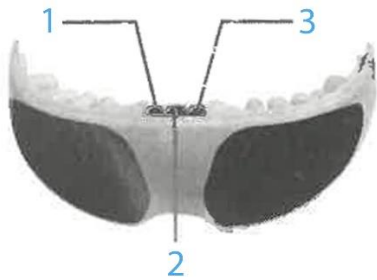

1. Pulsante di selezione dell'ora
2. Pulsante di selezione della MODALITÀ
3. Pulsante ON/OFF

Metodo di funzionamento in situazioni atipiche

- Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, è necessario rimuovere la batteria interna.

* In caso di situazione anomala

Il dispositivo non si accende o non cambia modalità.

Analizzare le cause:

La batteria è scarica?

I terminali positivo e negativo della batteria sono corretti?

Soluzione:

-Sostituire la batteria

-Verificare che i terminali positivo e negativo siano installati correttamente.

Controllare che i terminali positivo e negativo siano installati correttamente- Rimettere in servizio

- Si consiglia una pulizia accurata ogni tre mesi. L'apparecchio è dotato di un foro di ricarica all'interno, che può essere rimosso per la pulizia.

Tipi di programmi

1. modalità automatica: questa modalità consente di cambiare ripetutamente le modalità di imitazione da 2 a 8 in un secondo, per coincidenza.
2. marcia forte: forte scossa
3. marcia media: forte scuotimento del manicotto
4. Ingranaggio debole: bassa forza di scuotimento
5. Morbido: ogni 5 secondi ci saranno onde di movimento bloccanti.
(È possibile alternare oscillazioni forti e deboli).
6. Confortevole: ogni 5 secondi si verificano ondate di movimenti abbastanza forti.
(Si possono alternare fluttuazioni forti e deboli).
7. Impulso di Qi forte: ogni 5 secondi si verifica un massaggio a impulsi.

Precauzioni di sicurezza

Il dispositivo non deve essere utilizzato nelle seguenti circostanze:

- * Chi soffre di danni o infiammazioni agli occhi.

Persone che hanno subito un trauma cranico.

- * Persone con ustioni cutanee intorno agli occhi o affette da malattie.

Avvertenze

- 1) Non collocare il dispositivo sul pavimento e non immergerlo in acqua.
2. Non utilizzare il prodotto in luoghi con temperature elevate, come i bagni.
3. Evitare la luce diretta del sole per evitare l'invecchiamento precoce o l'ingiallimento del silicone flessibile.
4. Si raccomanda ai pazienti affetti da grave miopia di utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un medico.
5. I bambini di età inferiore agli otto anni devono essere utilizzati solo sotto la supervisione di un adulto.
6. Quando si utilizza questo prodotto, non camminare all'aria aperta.
7. Non utilizzare questo prodotto mentre si guida un'automobile.

8. Non utilizzare il prodotto dopo un intervento chirurgico o una lesione all'occhio; interrompere l'uso e riprenderlo non appena la guarigione è completa.

9. Qualsiasi trasformazione, smontaggio o riparazione deve essere effettuata solo da personale tecnico autorizzato.

Descrizione dello stato delle sostanze tossiche e pericolose contenute nei prodotti:

In conformità al “Regolamento sul riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, elenchiamo i nomi e i contenuti delle sostanze tossiche o pericolose che possono essere contenute nei nostri prodotti elettrici:

Nome della parte Motore

Componenti elettronici Parti metalliche

Questa tabella si basa sulle disposizioni della compilazione di riferimento SJ/T 11364-2014 del periodo di utilizzo per la protezione ambientale dell'Associazione cinese degli elettrodomestici pubblicata dalla China Electricity Association [2016] n. 36 “guida sul periodo di utilizzo per la protezione ambientale degli elettrodomestici”.

Il contenuto di sostanze tossiche e pericolose in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al requisito limite specificato nel regolamento GB/126572-201 1.

Il contenuto di sostanze tossiche e pericolose in almeno un materiale omogeneo del componente supera i limiti specificati nella norma GB/126572-201 1.

Indica che il prodotto ha un periodo di utilizzo per la protezione ambientale di 10 anni in condizioni di lavoro e di utilizzo normali.